

BTL-6000 LYMPHASTIM

PARAMETRI TECNICI



BTL-6000
Lymphastim 12 TOPLINE

BTL-6000
Lymphastim 12 EASY

BTL-6000
Lymphastim 6 EASY

Interfaccia utente	touch screen a colori 5,7"	LED numerici	LED numerici
Numero di canali	12	12	6
Impostazione pressione	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg	20 -160 mmHg
Gradiente	0 -100% regolazione continua	0, 10, 20, 30%	0, 10, 20, 30%
Programmi pre-impostati	15	8	8
Enciclopedia BTL	26 protocolli clinici (programmi in sequenze)		
Programmi utente	100 programmi definiti dall'utente		
Accessori	Gambali a 10 sezioni (destro e sinistro)	Gambali a 10 sezioni (destro e sinistro)	Gambali a 5 sezioni (destro e sinistro)
	Pantaloni a 22 sezioni 2x gambe + fascia a 2 sezioni	Pantaloni a 22 sezioni 2x gambe + fascia a 2 sezioni	Pantaloni a 11 sezioni 2x gambe + fascia ad 1 sezione
	Bracciali a 8 sezioni (destro e sinistro)	Bracciali a 8 sezioni (destro e sinistro)	Bracciali a 6 sezioni (destro e sinistro)
	Fasce di estensione di 10 cm per gambali - per l'allargamento della circonferenza dei manicotti delle gambe		
	Carrello		

BTL-6000 LYMPHASTIM

NUOVO SISTEMA DI PRESSOTERAPIA BTL PER UTILIZZO MEDICO ED ESTETICO



info@btlitalia.com
www.btlitalia.com

BTL Italia
Via San Leonardo, 120 - 84131 Salerno
Tel. +39 089 3069667 - Fax +39 089 3069379
Mobile: 320 4732191


Tutti i diritti sono riservati. Sebbene sia stata utilizzata la massima cura nel riportare informazioni corrette ed aggiornate, nessuna responsabilità può essere imputata per eventuali errori o difetti di stampa presenti in questo catalogo. I prodotti e le loro specifiche tecniche, così come indicati nel presente catalogo, possono essere modificati senza preavviso.



LINFODRENAGGIO

Il sistema linfatico è il principale responsabile dell'eliminazione dei fluidi interstiziali dai tessuti. Assorbe e trasporta gli acidi grassi ed i grassi al sistema circolatorio e trasporta cellule antigene presenti ai linfonodi dove la risposta immune viene stimolata. Le malattie ed altri problemi del sistema linfatico causano solitamente gonfiore ed altri sintomi.

Il BTL Lymphastim funziona con principio di pressoterapia pneumatico. Gli speciali applicatori dotati di varie sezioni sovrapposte forniscono un delicato massaggio che favorisce la naturale circolazione della linfa nel corpo, simile al drenaggio linfatico manuale effettuato dalle mani di un terapeuta.

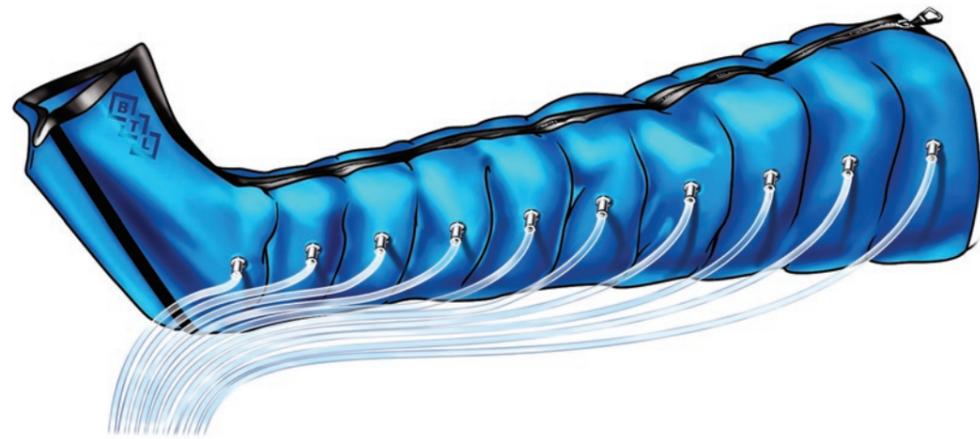


FACILE UTILIZZO, APPLICATORI DI ALTA QUALITÀ

◇ Chiusura lampo integrale altamente qualitativa



◇ Settori sovrapposti per un trattamento più delicato ed omogeneo

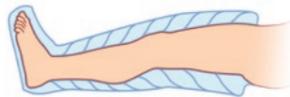

- ◇ Connettori sviluppati per un facile cambio degli applicatori, solo presa ed attacchi
- ◇ Identificazione automatica degli applicatori
- ◇ Numerosi applicatori con chiusure lampo addizionali per l'ampliamento dei manicotti
- ◇ Applicatori igienici e completamente lavabili
- ◇ Svuotamento automatico del manicotto dopo il trattamento - Trattamento confortevole con gli applicatori
- ◇ Sistema di controllo elettronico della pressione



BTL-6000 LYMPHASTIM 12 TOPLINE

Dispositivi di presso terapia a 12 canali con:

- ◇ Interfaccia utente di facile utilizzo con touch screen a colori da 5,7"
- ◇ Enciclopedia BTL con protocolli medici ed estetici
- ◇ Sequenze pre-impostate dei programmi
- ◇ Memoria interna per salvare fino a 100 programmi definiti dall'utente
- ◇ Impostazione della pressione continua da 20 - 160 mmHg con regolazione gradiente
- ◇ Pressione regolabile separata per ogni sezione
- ◇ Impostazioni avanzate per specifici trattamenti personalizzati
- ◇ Funzionamento del compressore affidabile e silenzioso
- ◇ Attività di funzionamento delle sezioni visualizzata sul display



BTL-6000 LYMPHASTIM 12 EASY BTL-6000 LYMPHASTIM 6 EASY

Dispositivi di presso terapia a 12 canali / 6 canali con:

- ◇ 8 programmi pre-impostati per i più comuni protocolli
- ◇ Impostazione della pressione continua da 20 - 160 mmHg con regolazione gradiente
- ◇ Funzionamento del compressore affidabile e silenzioso
- ◇ Attività di funzionamento delle sezioni visualizzata sulla barra grafica
- ◇ Impostazione della velocità di sgonfiamento



INDICAZIONI PIÙ COMUNI

Medicali:

- Edema cronico
- Insufficienze venose
- Cura post traumatica
- Artrosi
- Sindrome del Tunnel Carpale
- Angiopatia Diabetica
- Artrite
- Malattia ischemica degli arti inferiori
- Sindrome Algodistrofica
- Obesità
- Riparazione MLD male eseguita

Benessere / Estetica:

- Cellulite
- Sindrome delle gambe stanche
- Prevenzione delle vene varicose
- Miglioramento nel trofico della cute
- Lipoedema
- Cura post liposuzione
- Riconvalescenza
- Tenalgia
- Rigenerazione
- Detonificazione