


Fisiotech

tecnologie e benessere

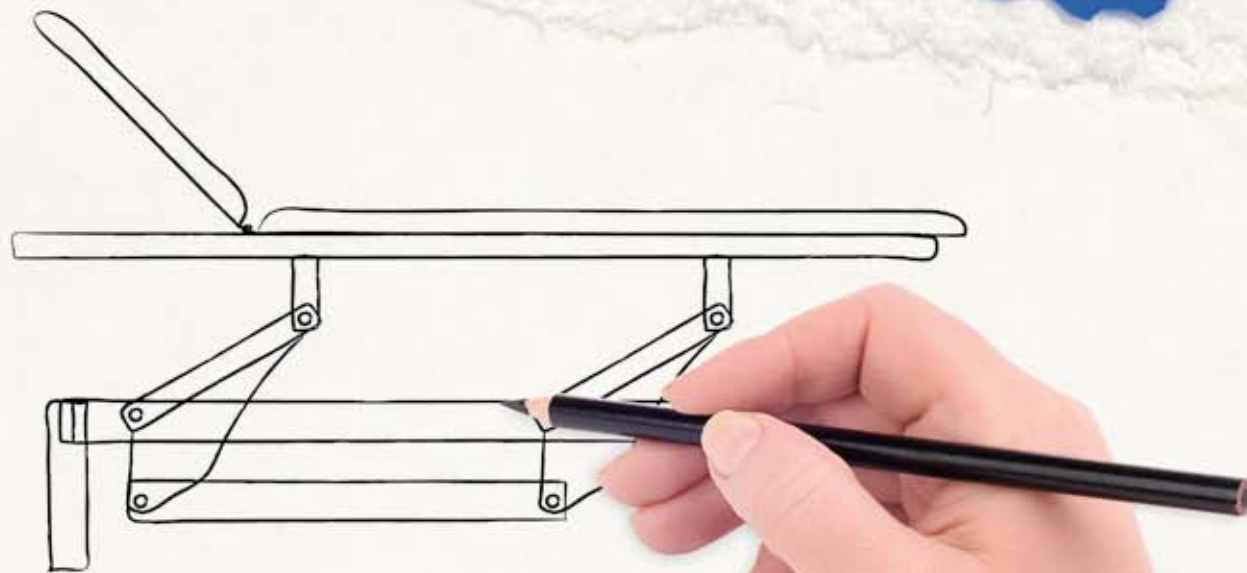

Fisiotech

tecnologie e benessere

FISIOTECH TECNOLOGIE E BENESSERE nasce nel 2001 come ditta individuale per la commercializzazione di articoli fisioterapici e riabilitativi. Nel 2002 compie un grande passo e inizia la produzione dei propri articoli fisioterapici e riabilitativi. Nel 2006 FISIOTECH S.R.L. ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 che nel corso degli anni è sempre stata rinnovata e confermata.

La collaborazione con tecnici del settore e l'impegno costante nella ricerca di materiali ed attrezzature sempre più all'avanguardia ci consentono di soddisfare le Vostre esigenze e di garantire un servizio e una produzione sempre più qualificata. Il nostro ufficio progettazione è in grado, come già dimostrato in passato, di realizzare anche prodotti alternativi. Oltre a tutto questo siamo in grado di affermare che i prodotti FISIOTECH S.R.L. godono di un ottimo rapporto qualità/prezzo.

FISIOTECH TECHNOLOGIES AND WELLNESS was born in 2001 as an individual company for the sale of physiotherapy articles. In 2002 FISIOTECH makes a big step: we start the production of our articles of physiotherapy. In 2006 FISIOTECH S.R.L. obtains certification UNI EN ISO 9001: 2000 that in the course of the years is always renewed and confirm.

The cooperation with technical and qualified staff, the constant effort in the research of the most up-dated materials and equipment allow us to comply with your request and to guarantee even more professional services and equipped articles. As already shown in the past our technical office can eve realize alternative products.

Every thing considered we can certainly confirm that FISIOTECH S.R.L. products can be praised for their excellent relationship quality/price.



CERTIFICATO n. **6559/0**
CERTIFICATE No. _____

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

FISIOTECH S.r.l.

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV)
Italia

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

EA: 19

Progettazione e produzione di articoli per
fisioterapia e riabilitazione.

*Design and production of articles for
physiotherapy and rehabilitation.*

Riferirsi al Manuale della Qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to Quality Manual for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione per la qualità delle aziende.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the rules for the certification of company quality management systems.

Data emissione
First issue
09/07/2008

Emissione corrente
Current issue
29/05/2013

Data di scadenza
Expiring date
28/06/2015

ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)



ISO 9001 N° 0004
SUA N° 0000
SCR N° 0000
ISO 9001 N° 0001
PIL N° 0000
SCR N° 0000

— IONet —

www.ionet-certification.com

IONet, the association of the world's first
class certification bodies, is the largest
provider of management System
Certification in the world.
IONet is composed of more than 30
bodies and counts over 150 subsidiaries
all over the globe.

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale.

CISQ is the Italian Federation
of management system
Certification Bodies.

FEDERAZIONE
CISQ

Lettini <i>Examination tables</i>	pag. 4	Ginnastica propriocettiva <i>Training therapy</i>	pag. 124	Clave <i>Indian claves</i>	pag. 170
Arredamento studio medico <i>Doctor's office furniture</i>	pag. 85	Apparecchi per diagnosi <i>Diagnosis instruments</i>	pag. 128	Cerchi <i>Hoops</i>	pag. 171
Scendiletto, sgabelli, panche, sedie <i>Bedside stairs, stools, benches, chairs</i>	pag. 90	Apparecchi per trazione <i>Traction instruments</i>	pag. 132	Polsiere/Cavigliere <i>Ankle bands</i>	pag. 172
Deambulazione: parallele e accessori <i>Deambulation: parallel bars and accessories</i>	pag. 94	Terapia degli arti superiori <i>Upper limb therapy</i>	pag. 134	Sport e ginnastica <i>Sport and gymnastics</i>	pag. 174
Deambulazione: scale e accessori <i>Deambulation: stairs and accessories</i>	pag. 100	Ruote dei lapidari <i>Lapidary's wheels</i>	pag. 137	Elastici <i>Elastic bands</i>	pag. 180
Deambulatori <i>Walking frames</i>	pag. 103	Ercoline <i>Ercolinas</i>	pag. 138	Manubri e accessori <i>Dumbbells</i>	pag. 183
Rollator <i>Rollator</i>	pag. 108	Spalliere e scale ortopediche <i>Wall-bars and orthopaedic ladder</i>	pag. 141	Giochi per bambini <i>Children's games</i>	pag. 184
Stampelle, tripodi, quadripodi <i>Crutches, tripods, 4-legs supports</i>	pag. 109	Specchi e accessori <i>Mirrors</i>	pag. 144	Panche spogliatoio <i>Locker room benches</i>	pag. 186
Bastoni ortopedici <i>Orthopaedic walking-sticks</i>	pag. 112	Materassi e stuoie <i>Mattress and matts</i>	pag. 146	Home Fitness <i>Home Fitness</i>	pag. 190
Carrozze pieghevoli <i>Folding wheelchairs</i>	pag. 113	Articoli Airex <i>Airex items</i>	pag. 150		
Carrozze rigide <i>Stiff wheelchairs</i>	pag. 116	Cuscini <i>Cushions</i>	pag. 156		
Seggioloni polifunzionali <i>Polyfunctional wheelchairs</i>	pag. 119	Palle e articoli per fisioterapia/riabilitazione <i>Balls and items for physiotherapy/rehabilitation</i>	Pag 158		
Fisiotek 3000 <i>Fisiotek 3000</i>	pag. 120	Bastoni e accessori <i>Sticks and accessories</i>	pag. 169		

tritone

LETTINO TRITONE

Lettino a nove segmenti multifunzionale per trattamenti. Due motori con comando a pedale, uno per la regolazione dell'altezza da cm. 50 a cm. 90 e uno per la regolazione dello schienale. Tutti i movimenti sono servo-assistiti da pistoni a gas. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Foro per la respirazione completo di tappo. Quattro appoggia braccia regolabili; i due posti sullo schienale sono sfilabili. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

TRITONE BED

Nine sections multifunctional electrical bed for treatments. Two motors, with pedal control: one for height adjusting from 50 to 90 cm. and one for back adjusting. All movements are servo-controlled by means of a gas-piston. It can assume the TRENDELENBURG position. Breathing hole. Adjustable armrests, the side ones are removable. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.





Lettino Tritone
Tritone Bed

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Tritone	195X70X50-90	2000



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Porta rotolo a pavimento
Roll of paper dispenser on floor



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
PORTA ROTOLO A PAVIMENTO struttura in acciaio verniciato. Dimensioni: cm. 70X25x83 Roll of paper dispenser on floor. Steel painted frame. Size: 70x25x83 cm.	4101
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6

OPTIONALS


artemide

LETTINO ARTEMIDE

Letino per osteopatia e altri trattamenti. Letino a otto segmenti. Due motori con comando a pedale, uno per la regolazione dell'altezza da cm. 45 a cm. 90 e uno per la posizione TRENDELENBURG. Testata regolabile mediante pistone a gas, regolabile in larghezza per la posizione prona. Gli appoggia braccia laterali sono ribaltabili. Pediera regolabile ed estraibile. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

ARTEMIDE BED

Bed for osteopathy therapies and other treatments. Eight sections. Two motors, with pedal control: one for height adjustable from 45 to 90 cm. and one for TRENDELENBURG position. Adjustable headpiece by means of a gas-piston and width-adjustable headpiece for prone position. Lateral armrests close away if necessary. Adjustable and removable feet section. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.

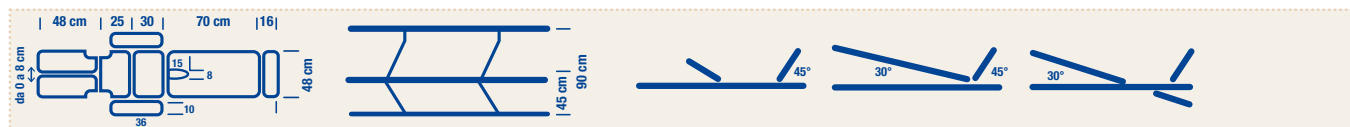

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Artemide	190X48X45-90	2001



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Porta rotolo a pavimento
Roll of paper dispenser on floor



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
PORTA ROTOLO A PAVIMENTO struttura in acciaio verniciato. Dimensioni: cm. 70X25x83 Roll of paper dispenser on floor. Steel painted frame. Size: 70x25x83 cm.	4101
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6

OPTIONALS


cassiopeia

LETTINO CASSIOPEIA

Lettino per osteopatia e altri trattamenti. Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Può assumere la posizione TRENDELENBURG mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Gli appoggia braccia scorrono su tutta la lunghezza del lettino e ruotano di 180°. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

CASSIOPEIA BED

Bed for osteopathy therapies and other treatments. Three sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. It can assume the TRENDELENBURG position by means of gas-piston. Breathing hole. Lateral armrests run on all length of bed and rotate to 180°. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.

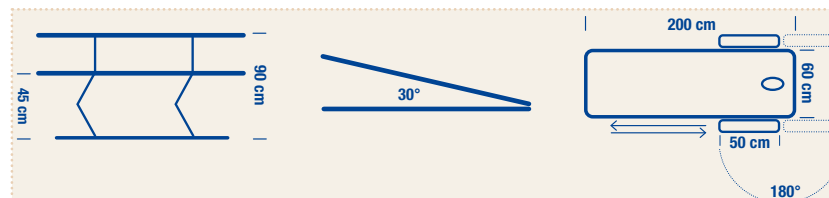

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Cassiopeia	200X60X45-90	2002



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Asta per consentire determinate posture.
Stick for special postural therapy.

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
ASTA REGOLABILE in altezza e removibile completa di corda e cavigliera con gancio per consentire determinate posture. <i>Manually height-adjustable and removable stick with rope and ankle straps with hook. Equipment for special postural therapy.</i>	2003

OPTIONALS


leo

LETTINO LEO

Letino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 50 a cm. 100 mediante comando a pedale. Piano a due sezioni, ampiezza minima delle sezioni cm. 100. Inclinazione della sezione busto-testata con escursione minima tra -15° e $+70^\circ$. Foro per la respirazione completo di tappo. Inclinazione della sezione gambe con escursione minima tra -10° e $+45^\circ$. La regolazione delle due sezioni, busto/testa e gambe, avviene mediante pistoni a gas. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata kg. 150 uniformemente distribuiti.

LEO BED

Two sections bed, electrically adjustable height from 50 to 100 cm by means of pedal control. Plane divided into two sections, minimum size 100 cm. each. Adjustment of the section bust-head minimum from -15° to $+70^\circ$. Breathing hole. Adjusting the leg section with minimum range between -10° and $+45^\circ$. The adjustment of the two sections bust / head and legs is possible by means of gas pistons. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM.

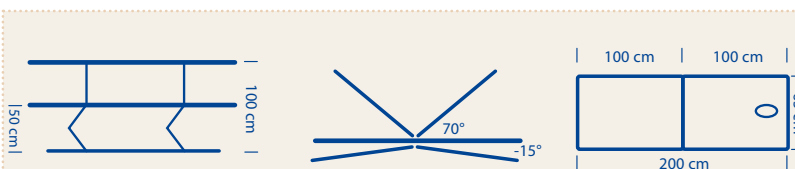



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds

OPTIONALS

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Leo	200x65x50-100	2004

edo

LETTINO EDO

Letino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

EDO BED

Two sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.



colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



particolare della pedaliera circolare
bed detail with peripheral system



sistema di regolazione idraulica
bed detail with hydraulic adjustment

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Edo Edo	190X65X45-90	3000
Edo a regolazione idraulica Edo with hydraulic adjustment	190X65X45-90	3000IDR
Edo con pedaliera circolare Edo with peripheral system	190X65X45-90	3000PC
Edo large Edo large	190X80X45-90	3000L
Edo large a regolazione idraulica Edo large with hydraulic adjustment	190X80X45-90	3000LIDR
Edo large con pedaliera circolare Edo large with peripheral system	190X80X45-90	3000LPC



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020

OPTIONALS


elia

LETTINO ELIA

Lettino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano può assumere la posizione TRENDELENBURG sempre mediante pistone a gas. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

ELIA BED

Two sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. TRENDELENBURG position always by means of gas-piston. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.

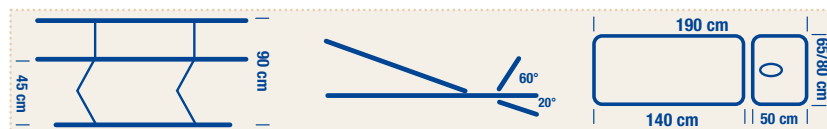



particolare della pedaliera circolare
bed detail with peripheral system



sistema di regolazione idraulica
bed detail with hydraulic adjustment

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Elia <i>Elia</i>	190X65X45-90	3001
Elia a regolazione idraulica <i>Elia with hydraulic adjustment</i>	190X65X45-90	3001IDR
Elia con pedaliera circolare <i>Elia with peripheral system</i>	190X65X45-90	3001PC
Elia large <i>Elia large</i>	190X80X45-90	3001L
Elia large a regolazione idraulica <i>Elia large with hydraulic adjustment</i>	190X80X45-90	3001LIDR
Elia large con pedaliera circolare <i>Elia large with peripheral system</i>	190X80X45-90	3001LPC



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 67 / 82
Towelling bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020

OPTIONALS

ZEUS

LETTINO ZEUS

Lettino a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

ZEUS BED

Four sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm. by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston with height adjustable armrests and breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.





particolare della pedaliera circolare
bed detail with peripheral system



sistema di regolazione idraulica
bed detail with hydraulic adjustment

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Zeus <i>Zeus</i>	190X65X45-90	3002
Zeus a regolazione idraulica <i>Zeus with hydraulic adjustment</i>	190X65X45-90	3002IDR
Zeus con pedaliera circolare <i>Zeus with peripheral system</i>	190X65X45-90	3002PC
Zeus large <i>Zeus large</i>	190X80X45-90	3002L
Zeus large a regolazione idraulica <i>Zeus large with hydraulic adjustment</i>	190X80X45-90	3002LIDR
Zeus large con pedaliera circolare <i>Zeus large with peripheral system</i>	190X80X45-90	3002LPC



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 65 / 80
*Towelling bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm*

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI <i>Lateral and folding edge</i>	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020

OPTIONALS


atena

LETTINO ATENA

Letto a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e la pediera sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

ATENA BED

Three sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Leg and bust section adjustable by means gas-piston. TRENDELENBURG position. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.

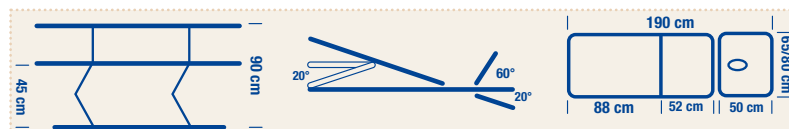



particolare della pedaliera circolare
bed detail with peripheral system



sistema di regolazione idraulica
bed detail with hydraulic adjustment

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Atena <i>Atena</i>	190X65X45-90	3003
Atena a regolazione idraulica <i>Atena with hydraulic adjustment</i>	190X65X45-90	3003IDR
Atena con pedaliera circolare <i>Atena with peripheral system</i>	190X65X45-90	3003PC
Atena large <i>Atena large</i>	190X80X45-90	3003L
Atena large a regolazione idraulica <i>Atena large with hydraulic adjustment</i>	190X80X45-90	3003LIDR
Atena large con pedaliera circolare <i>Atena large with peripheral system</i>	190X80X45-90	3003LPC



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Coprilettini in spugna colore blu
per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour
for beds width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020

OPTIONALS


eros

LETTINO EROS

Lettino a cinque segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e la pediera sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

EROS BED

Five sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston with height adjustable and breathing hole. Leg and bust section adjustable by means of gas-piston. TRENDELENBURG position. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.

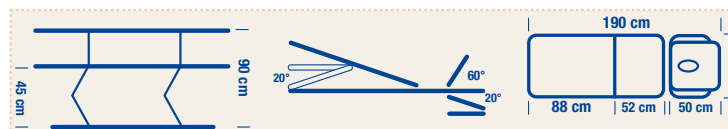



particolare della pedaliera circolare
bed detail with peripheral system



sistema di regolazione idraulica
bed detail with hydraulic adjustment

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Eros <i>Eros</i>	190X65X45-90	3004
Eros a regolazione idraulica <i>Eros with hydraulic adjustment</i>	190X65X45-90	3004IDR
Eros con pedaliera circolare <i>Eros with peripheral system</i>	190X65X45-90	3004PC
Eros large <i>Eros large</i>	190X80X45-90	3004L
Eros large a regolazione idraulica <i>Eros large with hydraulic adjustment</i>	190X80X45-90	3004LIDR
Eros large con pedaliera circolare <i>Eros large with peripheral system</i>	190X80X45-90	3004LPC



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Copriletti in spugna colore blu per lettini larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour for beds width 65 / 80cm

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020

OPTIONALS

amalthea

LETTINO AMALTHEA

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 56 a cm. 96 mediante comando a pedale. La sezione testiera/schienale è regolabile da +25° a -90° mediante pistone a gas ed è provvista di foro per la respirazione e di tappo. La sezione centrale è fissa. La sezione pediera è regolabile da 0° a +85° mediante pistone a gas. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM.


Portata max 200 Kg. Uniformemente distribuiti.

AMALTHEA BED

Three section bed, electrically adjustable height from 56 to 96 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from +25° to -90° by means of gas piston. Breathing hole and removable plug. Fixed central section. The section footboard is adjustable from 0° to +85° with gas piston. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 200 kg. well distributed.



Modello Amalthea con pedaliera circolare e ruote
Amalthea with peripheral system and wheels
cod. 3150PC + cod. 3009A

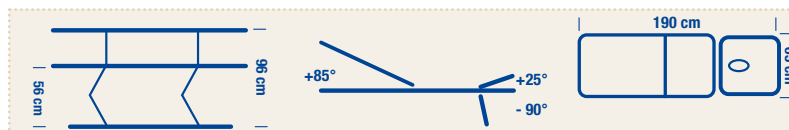



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Amalthea <i>Amalthea</i>	190x65x56-96	3150
Amalthea con pedaliera circolare <i>Amalthea with peripheral system</i>	190x65x56-96	3150PC

Optionals	Codice / Code
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6


iride

LETTINO IRIDE

Letino a otto segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e le pediere sono regolabili in più posizioni mediante pistoni a gas. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza e tre diversi sistemi di regolazione.

IRIDE BED

Eight sections bed, electrically adjustable height from 45 to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston with height adjustable and breathing hole. Leg, bust and middle sections adjustable by means of gas-piston. TRENDELENBURG position. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width and three various adjustment systems.

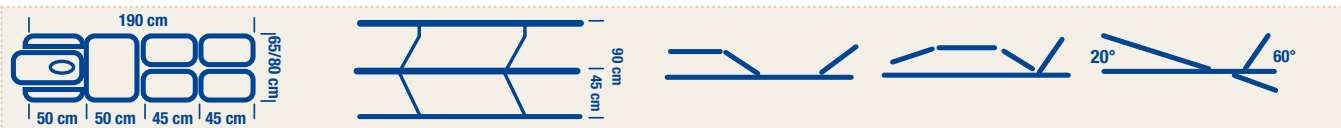



particolare della
pedaliera circolare
*bed detail with peripheral
system*



sistema di regolazione
idraulica
*bed detail with hydraulic
adjustment*



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Coprilettini in spugna colore blu per lettini
larghezza cm. 65 / 80
*Towelling bedspreads blue colour for beds
width 65 / 80 cm*



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Porta rotolo a pavimento
Roll of paper dispenser on floor

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code	Optionals	Codice / Code
Iride <i>Iride</i>	190X65X45-90	3005	SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009A
Iride a regolazione idraulica <i>Iride with hydraulic adjustment</i>	190X65X45-90	3005IDR	COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
Iride con pedaliera circolare <i>Iride with peripheral system</i>	190X65X45-90	3005PC	COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020
Iride large <i>Iride large</i>	190X80X45-90	3005L	LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
Iride large a regolazione idraulica <i>Iride large with hydraulic adjustment</i>	190X80X45-90	3005LIDR	PORTA ROTOLO A PAVIMENTO struttura in acciaio verniciato. dimensioni: cm. 70x25x83 <i>Roll of paper dispenser on floor. Steel painted frame. Size: 70x25x83 cm.</i>	4101
Iride large con pedaliera circolare <i>Iride large with peripheral system</i>	190X80X45-90	3005LPC		

ariosto

LETTINO ARIOSTO

Letino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti.

Portata max kg. 150 uniformemente distribuiti.

Disponibile in due diverse misure di larghezza.


ARIOSTO BED


Two sections bed, electrically adjustable height from 47 to 80 cm by means of pedal control.

Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter.

Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.


Available in two various measurement of width.

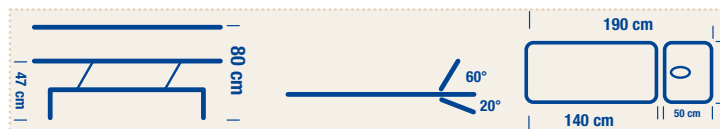

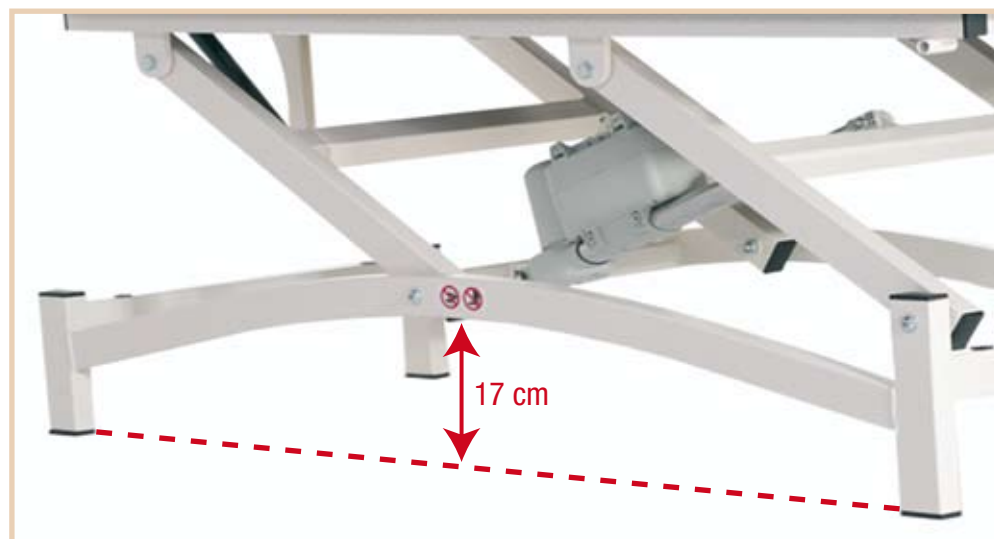

Particolare del lettino Ariosto
Detail of Ariosto bed

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Ariosto <i>Ariosto</i>	190X65X47-80	3006
Ariosto large <i>Ariosto large</i>	190X80X47-80	3006L

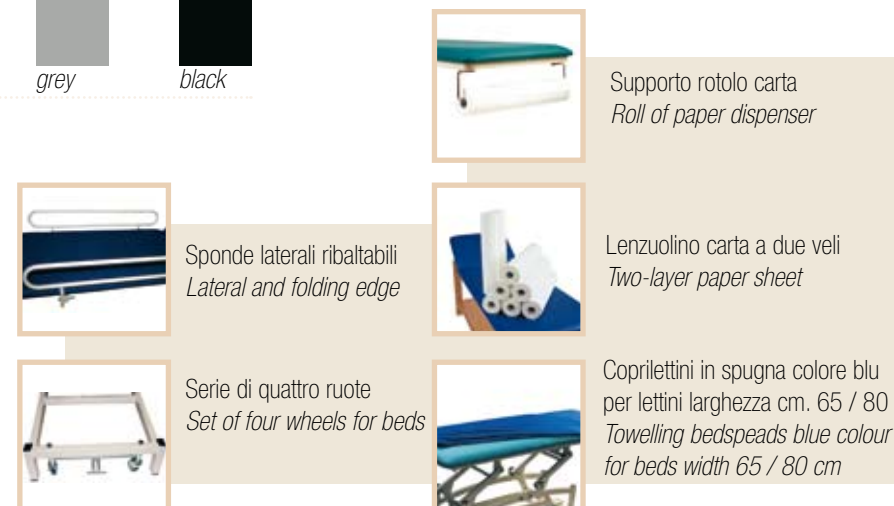

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI <i>Lateral and folding edge</i>	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE <i>Set of four wheels for beds</i>	3009B
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020

OPTIONALS

ermes

LETTINO ERMES

Letino a quattro segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza.

ERMES BED

Four sections bed, electrically adjustable height from 47 to 80 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece from +60° to -20° by means of gas-piston with height adjustable and breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width.



colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Particolare del lettino Hermes
Detail of Hermes bed

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Hermes Hermes	190X65X47-80	3007
Hermes large Hermes large	190X80X47-80	3007L

	Supporto rotolo carta Roll of paper dispenser
	Sponde laterali ribaltabili Lateral and folding edge
	Lenzuolino carta a due veli Two-layer paper sheet
	Coprilettini in spugna colore blu per lettini larghezza cm. 65 / 80 Towelling bedspreads blue colour for beds width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009B
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm	3020

OPTIONALS

arcade

LETTINO ARCADE

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 55 a cm. 86 mediante comando a pedale.


La sezione testiera è regolabile da $+55^{\circ}$ a -85° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione e tappo. Sezione centrale fissa. Sezione pediera regolabile da 0 a 85° mediante pistone a gas. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti.

Portata max. kg. 200 uniformemente distribuiti.

ARCADE BED

Three sections bed, electrically adjustable height from 55 to 86 cm. by means of pedal control.

Adjustable headpiece from $+55^{\circ}$ to -85° by means of gas piston. Breathing hole. Fixed central section. The section footboard is adjustable from 0° to $+85^{\circ}$ by means of gas piston. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifer. Maximum load capacity 200 kg. well distributed.

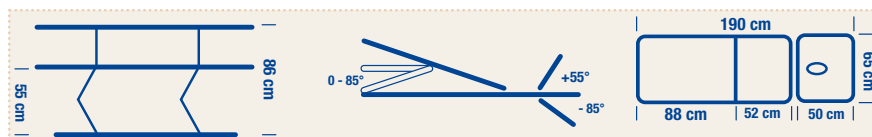

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Arcade	190x65X55-86	3102



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Serie di quattro ruote
Set of four wheels for beds



Coprilettini in spugna colore blu per lettini
larghezza cm. 65 / 80
Towelling bedspreads blue colour for beds
width 65 / 80 cm

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3010
SERIE DI QUATTRO RUOTE Set of four wheels for beds	3009B
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm	3019

OPTIONALS

oceano

LETTINO OCEANO

Letto a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 55 a cm. 86 mediante pedaliera circolare. Testata regolabile da $+60^\circ$ a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, ignifuga classe 1IM. Il lettino è dotato di quattro ruote retrattili. Portata max kg. 200 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza.

OCEANO BED

Two sections bed, electrically adjustable height from 55 to 86 cm. with peripheral system. Adjustable headpiece from $+60^\circ$ to -20° by means gas-piston. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant class 1IM. Oceano Bed is equipped with four retractable wheels. Maximum load capacity 200 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width.





Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet



Coprilettini in spugna
colore blu per lettini
larghezza cm. 65 / 80
*Towelling bedspreads
blue colour for beds
width 65 / 80cm*

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Oceano <i>Oceano</i>	190X65X55-86	3120
Oceano large <i>Oceano large</i>	190X80X55-86	3120L

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	3010
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 65 cm</i>	3019
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 80 <i>Towelling bedspread blue colour for beds width 80 cm</i>	3020

titan

LETTINO TITAN

Lettino ad un segmento di larghezza 100 cm, regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Completo di quattro ruote girevoli ed indipendenti. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM.

Portata Max kg. 350 uniformemente distribuiti.


Disponibile anche nella versione a 2 segmenti con testata regolabile solo in positivo mediante PISTONE A GAS.

TITAN BED

One section bed, 100 cm width, electrically adjustable height from 45 cm. to 90 cm. by means of pedal control. Complete with a set of four revolving and independent wheels. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 350 Kg. well distributed.

Also available in 2 segments with adjustable headpiece only in positive position by GAS-PISTON



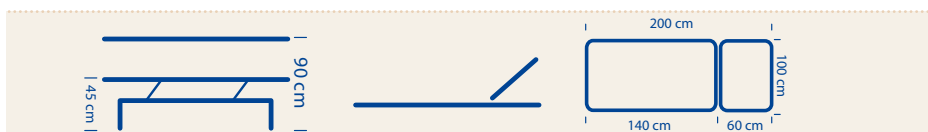

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Titan a un segmento <i>Titan, one section bed</i>	200x100x45-90	2010
Titan a 2 segmenti con testata regolabile <i>Titan, 2 section bed with adjustable headpiece</i>	200x100x45-90	2010PG

titan large

LETTINO TITAN - LARGE

Lettino ad un segmento di larghezza 120 cm regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Completo di quattro ruote girevoli ed indipendenti. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM.

Portata Max kg. 350 uniformemente distribuiti.

Disponibile anche nella versione a 2 segmenti con testata regolabile solo in positivo mediante PISTONE A GAS.


TITAN BED LARGE

One section bed, 120 cm width, electrically adjustable height from 45 cm. to 90 cm. by means of pedal control. Complete with set of four revolving and independent wheels. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 350 Kg. well distributed.

Also available in 2 segments with adjustable headpiece only in positive position by GAS-PISTON



colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

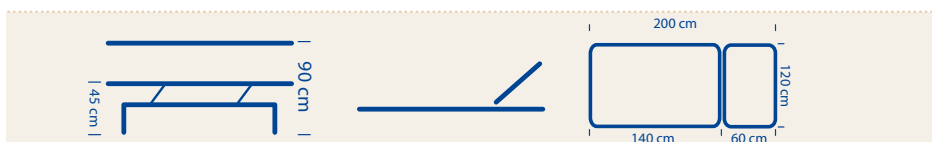

Portata max Kg. 350
Max load capacity 350 Kg.

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Titan a un segmento LARGE <i>Titan, one section bed LARGE</i>	200x120x45-90	2012
Titan a 2 segmenti con testata regol. LARGE <i>Titan, 2 section bed with adjust. head.piece LARGE</i>	200x120x45-90	2012PG

bobath xs

LETTINO BOBATH XS

Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.


BOBATH XS BED

One section bed, electrically adjustable height from 47 cm. to 80 cm by means of pedal control. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.





particolare del lettino Bobath a leva singola
Bobath bed detail

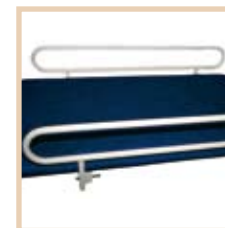

Sponde laterali
ribaltabili
Lateral and folding
edge



Serie di quattro ruote
girevoli ed indipendenti
per lettino bobath xs -s
Set of four revolving and
independent wheels for
boabth xs -s bed



Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath XS	200X100X47-80	3009

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH XS - S Set of four revolving and independent wheels for BOABTH XS - S bed	3015
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025

bobath xs

testata regolabile adjustable headpiece

LETTINO BOBATH XS TESTATA REGOLABILE

Lettino a due un segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Senza foro per la respirazione. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM.

Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.

Disponibile nella versione con testata regolabile solo in positivo mediante PISTONE A GAS.


BOBATH XS BED ADJUSTABLE HEADPIECE

Two sections bed, electrically adjustable height from 47 cm. to 80 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-ring. Without breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed. Models available: with adjustable headpiece in positive position by means of GAS-PISTON





particolare del lettino Bobath a leva singola
Bobath bed detail

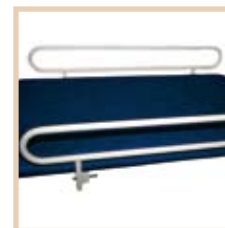

Sponde laterali
ribaltabili
Lateral and folding
edge



Serie di quattro ruote
girevoli ed indipendenti
per lettino bobath xs -s
Set of four revolving and
independent wheels for
boabth xs -s bed



Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath xs con testata regolabile Bobath xs bed adjustable headpiece	200X100X47-80	3009TR
Bobath xs con testata regolabile da pistone a gas Bobath xs bed, adjustable headpiece with gas piston	200X100X47-80	3009PG

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH XS - S Set of four revolving and independent wheels for BOABTH XS - S bed	3015
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025


bobath s

LETTINO BOBATH S

Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.


BOBATH S BED

One section bed, electrically adjustable height from 47 cm. to 80 cm by means of pedal control. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.

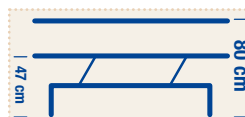



particolare del lettino Bobath a leva singola
Bobath bed detail

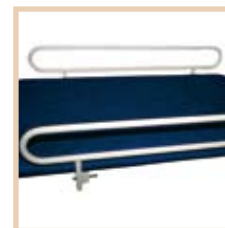

Sponde laterali
ribaltabili
Lateral and folding
edge



Serie di quattro ruote
girevoli ed indipendenti
per lettino bobath xs -s
Set of four revolving and
independent wheels for
boabth xs -s bed



Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath S	200X120X47-80	3011

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH XS - S Set of four revolving and independent wheels for BOABTH XS - S bed	3015
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025

bobath s

testata regolabile adjustable headpiece

LETTINO BOBATH S TESTATA REGOLABILE

Lettino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 47 a cm. 80 mediante comando a pedale. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Senza foro per la respirazione. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito in modo tale da consentire l'accostamento del sollevapazienti. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti. Disponibile nella versione con testata regolabile solo in positivo mediante PISTONE A GAS.


BOBATH S BED ADJUSTABLE HEADPIECE

Two sections bed, electrically adjustable height from 47 cm. to 80 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-ring. Without breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Conceived for approach by a patient lifter. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed. Models available: with adjustable headpiece in positive position by means of GAS-PISTON





particolare del lettino Bobath a leva singola
Bobath bed detail

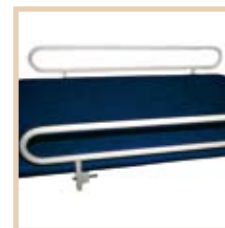

Sponde laterali
ribaltabili
Lateral and folding
edge



Serie di quattro ruote
girevoli ed indipendenti
per lettino bobath xs -s
Set of four revolving and
independent wheels for
boabth xs -s bed



Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath S con testata regolabile Bobath S bed adjustable headpiece	200X120X47-80	3011TR
Bobath S con testata regolabile da pistone a gas Bobath S bed, adjustable headpiece, with gas piston	200X120X47-80	3011PG

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH S - XS Set of four revolving and independent wheels for BOABTH S - XS bed	3015
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025

bobath m

LETTINO BOBATH M

Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.

BOBATH M BED

One section bed, electrically adjustable height from 45 cm. to 90 cm by means of pedal control. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.






Particolare del lettino con le ruote montate (optional)
Bed detail with assembled wheels (optional)



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote girevoli ed indipendenti per lettino bobath m-l
Set of four revolving and independent wheels for bobath m-l bed

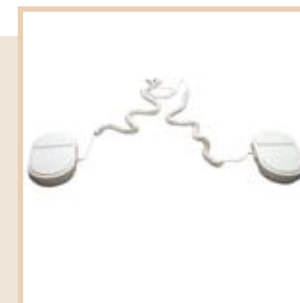

Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath M	200X120X45-90	3012

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH M - L Set of four revolving and independent wheels for BOABTH M - L bed	3015ML
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025

bobath m

testata regolabile adjustable headpiece

LETTINO BOBATH M TESTATA REGOLABILE

Lettino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniere a scatto. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti. Disponibile nella versione con testata regolabile solo in positivo mediante PISTONE A GAS.

BOBATH M ADJUSTABLE HEADPIECE BED

Two section bed, electrically adjustable height from 45 cm. to 90 cm by means of pedal control. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-ring. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed. Models available: with adjustable headpiece in positive position by means of GAS-PISTON






Particolare del lettino con le ruote montate (optional)
Bed detail with assembled wheels (optional)



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote girevoli ed indipendenti per lettino bobath m-l
Set of four revolving and independent wheels for bobath m-l bed

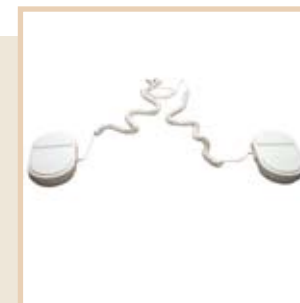

Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath M con testata regolabile Bobath M bed adjustable headpiece	200X120X45-90	3012TR
Bobath M con testata regolabile da pistone a gas Bobath M bed, adjustable headpiece, with gas piston	200X120X45-90	3012PG

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH M - L Set of four revolving and independent wheels for BOABTH M - L bed	3015ML
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025


bobath l

LETTINO BOBATH L

Lettino ad un segmento regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.

BOBATH L BED

One section bed, electrically adjustable height from 45 cm. to 90 cm by means of pedal control. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.

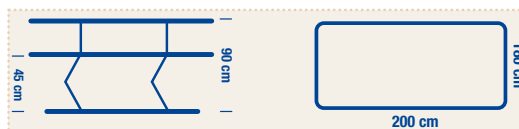




Particolare del lettino con le ruote montate (optional)
Bed detail with assembled wheels (optional)



Sponde laterali ribaltabili
Lateral and folding edge



Serie di quattro ruote girevoli ed indipendenti per lettino bobath m-l.
Set of four revolving and independent wheels for bobath m-l bed

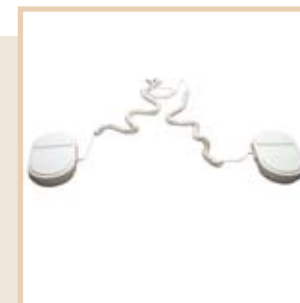

Doppia pedaliera
Double pedal board

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Bobath L	200X180X45-90	3013

Optionals	Codice / Code
SPONDE LATERALI RIBALTABILI Lateral and folding edge	3008
SERIE DI QUATTRO RUOTE GIREVOLI ED INDIPENDENTI PER LETTINO BOBATH M - L Set of four revolving and independent wheels for BOABTH M - L bed	3015ML
DOPPIA PEDALIERA Double pedal board	7025

ade

LETTINO ADE

Lettino a un segmento. Struttura in acciaio verniciato. Il piano è imbottito e rivestito insimpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.

LETTINO ADE CON TESTATA REGOLABILE

Lettino a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Senza foro per la respirazione. Struttura in acciaio verniciato. Il piano è imbottito e rivestito in simipelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 180 uniformemente distribuiti.

ADE BED

One section bed. Painted steel frame. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.

ADE BED WITH ADJUSTABLE HEADPIECE

One section bed. Painted steel frame. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-ring. Without breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 180 Kg. well distributed.



Ade
Ade bed



Ade
Ade bed



Ade con testata regolabile
Ade bed, adjustable headpiece

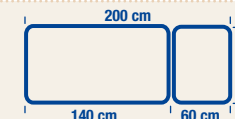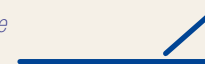



Ade con testata regolabile
Ade bed, adjustable headpiece



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Ade Ade	200X120X50	3018
Ade con testata regolabile Ade bed, adjustable headpiece	200X120X50	3018TR

urano


LETTINO URANO

Lettino a quattro segmenti per statica e terapia ad altezza fissa. Regolazione dell'inclinazione da 0° a 85° mediante pulsantiera. Quattro ruote di cui due fisse e due con freno. Pedane indipendenti regolabili da -20° a +15° mediante pistoni a gas. Dotato di 5 cinghie ferma pazienti. La sezione testiera è regolabile da ca. +30° a -80° mediante pistone a gas ed è provvista di foro per la respirazione e di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max 150 Kg. Uniformemente distribuiti.

URANO BED

Four section bed for static and therapy with fixed height. Adjusting the inclination from 0° to 85° with hand control. Four wheels, two fixed and two with brake. Independent footrests adjustable from -20° to +15° by means of gas pistons. The Urano bed is equipped with 5 straps. Adjustable headpiece from ca. +30° to -80° by means of gas piston. Breathing hole and removable plug. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM.

Maximum load capacity 150 kg, well distributed.

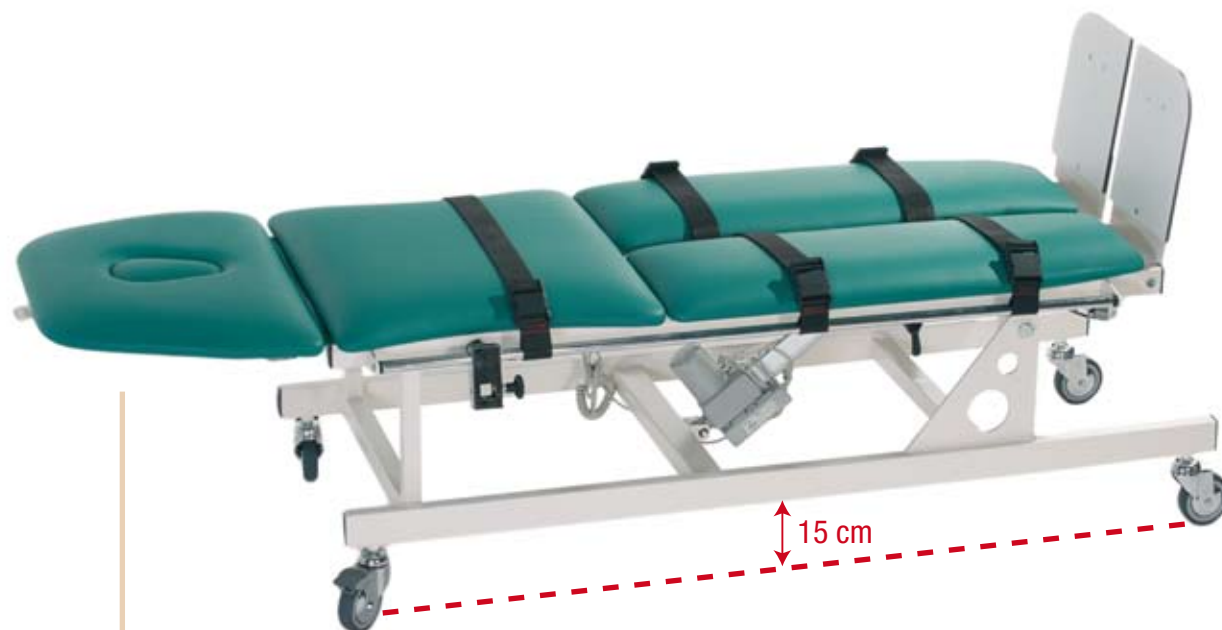



Supporti in dotazione
Media included



Tavolino per tavoli di statica (optional)
Small table for static table (optional)



Pedane indipendenti regolabili da +15° a -20°
Independent footrests adjustable from -20 ° to + 15 °



Tavolino per tavoli di statica
Small table for static table

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Urano	Dimensioni cm. 200x65x50- Larghezza ingombro: 75 cm. Dimensions: 200x65x50 cm. Width encumbrance: 75 cm.	2040

Optionals	Codice / Code
TAVOLINO PER TAVOLI DI STATICA Small table for static table	3037

pegaso


LETTINO PEGASO

Lettino a due segmenti. Due motori, uno per la regolazione dell'altezza da cm. 55 a cm. 100 e uno per la regolazione dell'inclinazione da 0° a 90° mediante comando a pulsantiera. Testata regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Completo di: No. 02 cinghie ferma pazienti, No. 01 tavolino di appoggio, No. 04 ruote per lo spostamento del lettino, No. 02 pedane indipendenti regolabili con pistone a gas. La pedana, delle pedane indipendenti, è estraibile. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

PEGASO BED

Two sections bed. Two motors, one for height adjusting from 55 cm. to 100 cm. and one for inclination adjusting from 0° to 90° by means of hand control. Adjustable headpiece from +60° to -20° by means of gas-piston. Breathing hole. Complete of: No. 02 belt stop patient, No. 01 small table for static beds, No. 04 wheels, No. 02 independent footboard adjustable by means of gas-piston. The footrest, of the independent footboard, can be extracted.

Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.

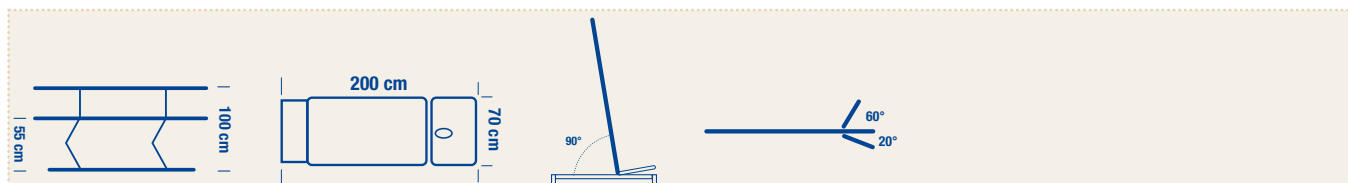

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Modello / Model	Dimensioni / Size		Codice / Code
Pegaso	ingombro full dimension	200X70X55-100	2035
	piano table	200X55	


kirone

KIRONE TAVOLO DI STATICA

Lettino a un segmento. Regolazione dell'inclinazione da -20° a $+90^{\circ}$ elettricamente mediante comando a pulsantiera. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Quattro ruote di cui due bloccabili. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

KIRONE STATIC TABLE

One section. Electrically adjustable inclination form -20° to 90° by handsets. It can assume the TRENDELENBURG position. Four wheels (two locking). Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.

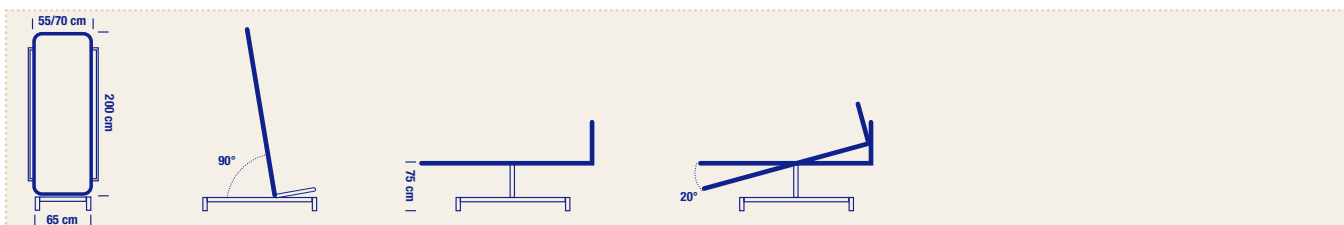

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Tavolino per tavoli di statica
Small table for static table



Goniometro per tavoli di statica
Goniometric for static table



Tavolino per tavoli di statica (optional)
Small table for static table (optional)

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Kirone	200X70X75	3035

Optionals	Codice / Code
TAVOLINO PER TAVOLI DI STATICA <i>Small table for static table</i>	3037
GONIOMETRO PER TAVOLI DI STATICA <i>Goniometric for static table</i>	3038


giasone

GIASONE TAVOLO DI STATICA

Lettino a un segmento. Regolazione dell'inclinazione da -20° a $+90^{\circ}$ elettricamente mediante comando a pulsantiera. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Quattro ruote di cui due bloccabili. CON PEDANE INDIPENDENTI. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

GIASONE STATIC TABLE

One section. Electrically adjustable inclination from -20° to 90° by handsets. It can assume the TRENDELENBURG position. Four wheels (two locking). WITH INDEPENDENT FOOTBOARD. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.

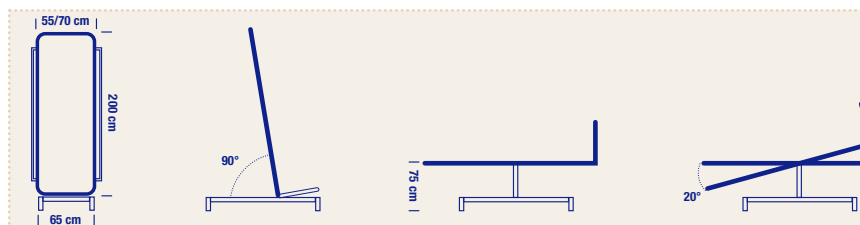

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Tavolino per tavoli di statica
Small table for static table



Goniometro per tavoli di statica
Goniometric for static table



Goniometro per tavoli di statica (optional)
Goniometric for static table (optional)

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Giasone	200X70X75	3036

Optionals	Codice / Code
TAVOLINO PER TAVOLI DI STATICA <i>Small table for static table</i>	3037
GONIOMETRO PER TAVOLI DI STATICA <i>Goniometric for static table</i>	3038


adone

LETTINO ADONE

Lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 55 a cm. 86 mediante comando a pedale. La sezione centrale è fissa. La sezione pediera è scorrevole di 12 cm. La testiera è regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ignifuga classe 1IM. Il basamento consente l'accostamento del solleva pazienti. Questo lettino dispone di sistemi per le terapie di trazione mediante apposita apparecchiatura elettronica non in dotazione. Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.

ADONE BED

Three section bed, electrically adjustable height from 55 to 86 cm by means of pedal control. Fixed central section. Trunk stretch 12 cm. Adjustable headpiece from -20° to +60° by means of gas piston. Breathing hole and removable plug. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Frame conceived for approach by a patient lifter. The couch has been developed to offer traction treatments with an electronic traction unit not supplied. Maximum load capacity 200 kg. well distributed.

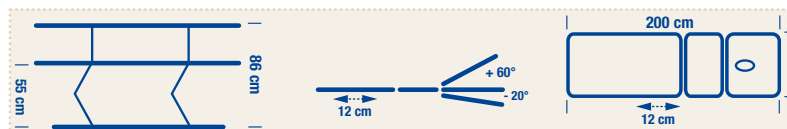

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Particolare della mensola
Detail of the shelf



Componenti in dotazione
Components supplied



Cuneo - cm 45x45x15
Wedge - 45x45x15 cm

Trapezio - cm 45x45x15
Trapezoid - 45x45x15 cm

Semicilindro - cm 30x16x8
Half-cylinder - 30x16x8 cm

N.B. Salvo diverse specifiche, i cuscini saranno consegnati nello stesso colore del lettino.
Note: Unless otherwise specified, the pillows will be delivered in the same color of the bed.



Imbragatura toracica piccola
Small thoracic traction harness



Imbragatura toracica grande
Large thoracic traction harness



Imbragatura pelvica piccola
Small pelvic traction harness



Imbragatura pelvica grande
Large pelvic traction harness



Archetto e mentoniera
chin strap and headband



Bilancino
Spreader bar

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Adone	200x70x55-86	3900

dafne

LETTINO DAFNE

Lettino a due segmenti mobili. Lo schienale è inclinabile di 10° e la pediera scorre di 12 cm. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ignifuga classe 1IM. Dotato di piedini cromati regolabili di posizionamento. Il basamento consente l'accostamento del solleva pazienti. Questo lettino dispone di sistemi per le terapie di trazione mediante apposita apparecchiatura elettronica non in dotazione. Portata max 200 Kg. uniformemente distribuiti.

DAFNE BED

Two movable sections: backrest section with lateral tilt angle 10° and trunk stretch 12 cm. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Equipped with chrome adjustable feet. Frame conceived for approach by a patient lifter. The couch has been developed to offer traction treatments with an electronic traction unit not supplied. Maximum load capacity 200 kg. well distributed.



colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------

Particolare della mensola
Detail of the shelf



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Dafne	200X70X65 cm	3901

Componenti in dotazione
Components supplied



Cuneo - cm 45x45x15
Wedge - 45x45x15 cm

Trapezio - cm 45x45x15
Trapezoid - 45x45x15 cm

Semicilindro - cm 30x16x8
Half-cylinder - 30x16x8 cm

N.B. Salvo diverse specifiche, i cuscini saranno consegnati nello stesso colore del lettino.
Note: Unless otherwise specified, the pillows will be delivered in the same color of the bed.



Imbragatura toracica piccola
Small thoracic traction harness



Imbragatura toracica grande
Large thoracic traction harness



Imbragatura pelvica piccola
Small pelvic traction harness



Imbragatura pelvica grande
Large pelvic traction harness



Archetto e mentoniera
chin strap and headband



Bilancino
Spreader bar

perseo


LETTINO PERSEO TRAZIONE AUTONOMA

Lettino a un segmento. Regolazione dell'inclinazione da -20° a $+90^{\circ}$ elettricamente mediante comando a pulsantiera. Può assumere la posizione TRENDELENBURG. Quattro ruote di cui due bloccabili. Completo di: bustino in similpelle, mentoniera in similpelle, cavigliere con gancio, Kg. 4 dischi in ghisa e di tutti gli attacchi. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 150 uniformemente distribuiti.

PERSEO BED SELF-CONTAINED TRACTION
One section. Electrically adjustable inclination form -20° to 90° by handsets. It can assume the TRENDELENBURG position. Four wheels (two locking). Complete of: small corset, leather and padded ANKLE STRAPS with hook and 4 Kg. DISKS for traction. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed.



Particolare della trazione
Traction detail

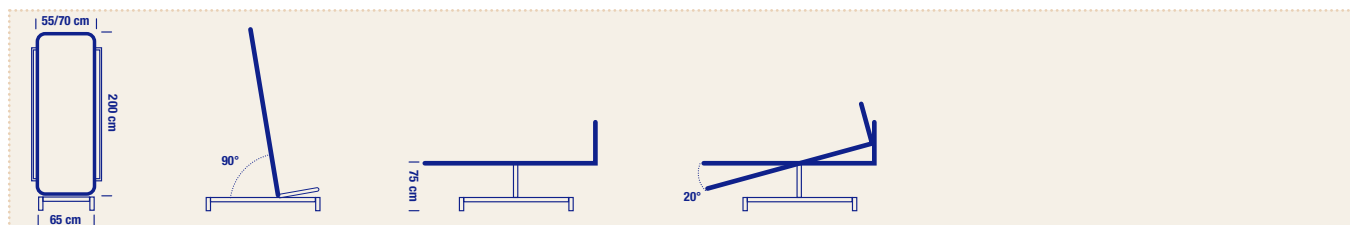

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Accessori trazione in dotazione
Traction accessories supplied

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Perseo	200X70X75	6090



Optionals: Tavolino per tavoli di statica - Goniometro per tavoli di statica - Sacchetti di sabbia con occhiello - Mentoniera in cuoio - Cavigliera in cuoio,
 Optionals: Small table for static table - Goniometric for static table - Sandbag with metal eyelet - Leather chin strap - Leather ankle strap -

Optionals		Codice / Code	OPTIONALS
TAVOLINO PER TAVOLI DI STATICA Small table for static table		3037	
GONIOMETRO PER TAVOLI DI STATICA Goniometric for static table		3038	
CAVIGLIERA CON GANCIO di colore nero, imbottita, per trazioni ai cavi. Rivestimento esterno in similpelle con anello passante in acciaio cromato. Altezza cm.10 Diametro interno ca. 8,5 cm.		4061	
ANKLE WITH HOOK colour black. Padded ankle for cable pull downs. Outer shell made of imitation leather with loop-through steel frame. Height 10 cm Internal diameter approx. 8.5 cm.			
MENTONIERA IN CUOIO Leather chin strap		4033	
SACCHETTO DI SABBIA CON OCCHIELLO Sandbag with metal eyelet	Kg 0,5	4037	
	Kg 1	4038	
	Kg 2	4039	
	Kg 3	4040	
	Kg 4	4041	
	Kg 5	4042	

gea demetra

LETTINO GEA

Lettino a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max 150 Kg. uniformemente distribuiti.

GEA bed


Two sections bed. Adjustable headpiece in positive position by means snap hinge. Breathing hole and plug. Painted steel frame. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximun load capacity 150 Kg well distributed.

LETTINO DEMETRA

Lettino ad un segmento. Gambe regolabili in altezza e richiudibili. Struttura in acciaio verniciato. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max 150 kg uniformemente distribuiti.


DEMETRA bed

One section bed. Legs adjustable in height and folding. Painted steel frame. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximun load capacity 150 Kg well distributed.

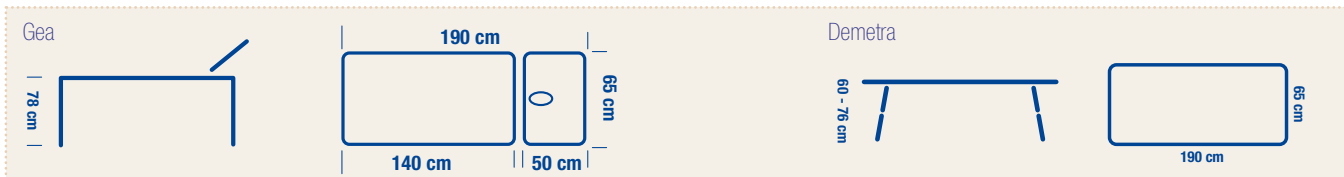



Demetra

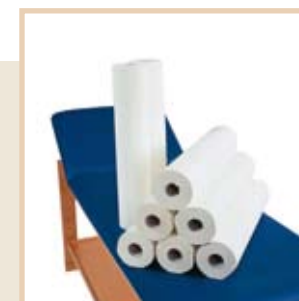
 Supporto rotolo carta per lettini fissi
Roll of paper dispenser for fixed beds

 Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Gea	190x65x78	3017
Demetra	190x65x60-76	3016

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA per lettini fissi <i>Roll of paper dispenser for fixed beds</i>	3029
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6

dionisio

LETTINO DIONISIO

Lettino a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo. Foro per la respirazione completo di tappo. Struttura in acciaio cromato. Il piano è imbottito e rivestito in PVC lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max Kg. 150 uniformemente distribuiti. COLORE NERO.

DIONISIO BED

Two sections bed, adjustable headpiece in positive position. Breathing hole. Painted steel frame, chromium-plated. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 150 Kg. well distributed. COLOUR BLACK.






Particolare della testiera
Headpiece detail

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Dionisio	180x60x72 h	222P



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser

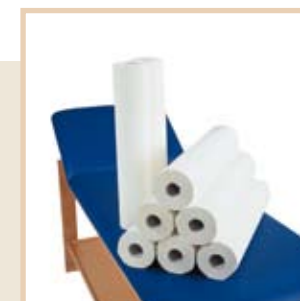

Lenzuolino carta a due veli
Two-layer paper sheet

OPTIONALS

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA <i>Roll of paper dispenser</i>	320P
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6

ponto

LETTINO PONTO

Lettino in legno di faggio verniciato a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

PONTO BED

Wooden bed, two sections. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-rip. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.







Piano inferiore per lettini in legno
Lower shelf for wooden beds



Supporto rotolo carta per lettini fissi
Roll of paper dispenser for wooden beds

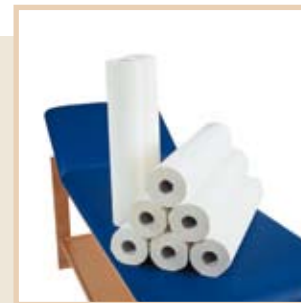

Lenzuolino carta a due veli cm. 60 X mt. 50
Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.

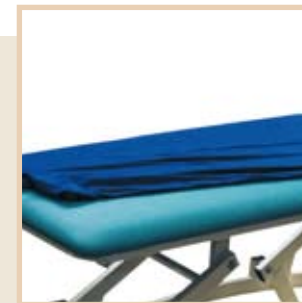

Coprilettino in spugna colore blu per lettini
larghezza cm. 65
Towelling bedspread, blue colour, for beds width 65 cm.

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Ponto	190X65X78 o 50	3023

Optionals	Codice / Code
PIANO INFERIORE PER LETTINI IN LEGNO <i>Lower shelf for wooden beds</i>	3028
SUPPORTO ROTOLO CARTA per lettini fissi <i>Roll of paper dispenser for fixed beds</i>	3029
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread, blue colour, for beds width 65 cm.</i>	3019

proteo rea

LETTINO PROTEO

Lettino in legno di faggio verniciato a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

PROTEO BED

Wooden bed, two sections, adjustable headpiece in positive position by means of spring-rip. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.

LETTINO REA

Lettino a un segmento. Struttura in legno verniciato. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

REA BED

One section. Painted steel frame. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.



Proteo



Rea




colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Piano inferiore per lettini in legno
Lower shelf for wooden beds



Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser

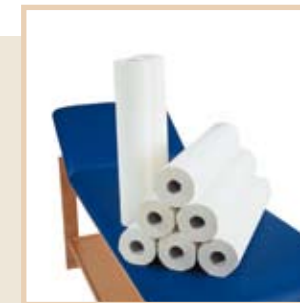

Lenzuolino carta a due veli cm. 60 X mt. 50
Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Proteo	190X90X78 o 50	3024
Rea	190X90X78 o 50	3027

Optionals	Codice / Code
PIANO INFERIORE Lower shelf	3028G
SUPPORTO ROTOLO CARTA Roll of paper dispenser	3030
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6


selene

LETTINO SELENE

Lettino in legno di faggio verniciato, a quattro segmenti. Testata e pediere regolabili a mezzo cerniere a scatto. La testata è regolabile solo in positivo con foro per la respirazione completa di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

SELENE BED

Wooden bed, four sections, adjustable headpiece and legs by means of spring-rip. Adjustable headpiece only in positive position, with breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.

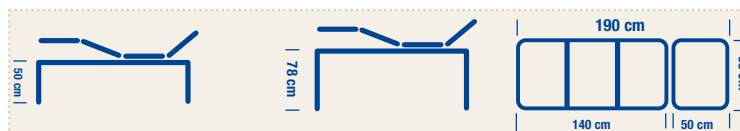




Piano inferiore per lettini in legno
Lower shelf for wooden beds



Supporto rotolo carta per lettini fissi
Roll of paper dispenser for wooden beds



Lenzuolino carta a due veli cm. 60 X mt. 50
Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.

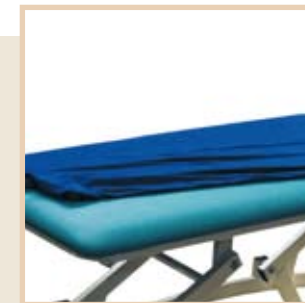

Coprilettino in spugna colore blu per lettini
larghezza cm. 65
Towelling bedspread, blue colour, for beds
width 65 cm.

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Selene	190X65X78 o 50	3025

Optionals	Codice / Code
PIANO INFERIORE PER LETTINI IN LEGNO Lower shelf for wooden beds	3028
SUPPORTO ROTOLO CARTA per lettini fissi Roll of paper dispenser for fixed beds	3029
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspread, blue colour, for beds width 65 cm.	3019


ares

LETTINO ARES

Lettino in legno di faggio verniciato a due segmenti, gambe inclinate e pieghevoli. Testata regolabile solo in positivo a mezzo cerniere a scatto. Foro per la respirazione completa di tappo. III piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

ARES BED

Wooden bed, two sections, inclined legs. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-rip. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.

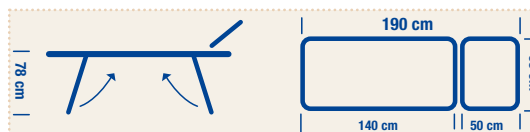

colori disponibili colours available	panna beige	giallo yellow	arancio orange	bordeaux bordeaux	verde green	blu blue	grigio grey	nero black
---	----------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------	----------------	---------------



Lettino Ares chiuso
Ares bed, closed

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Ares	190X65X78	3026



Supporto rotolo carta per lettini fissi
Roll of paper dispenser for wooden beds



Lenzuolino carta a due veli cm. 60 X mt. 50
Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.



Coprilettino in spugna colore blu per lettini larghezza cm. 65
Towelling bedspead, blue colour, for beds width 65 cm.

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA per lettini fissi Roll of paper dispenser for fixed beds	3029
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 Towelling bedspead, blue colour, for beds width 65 cm.	3019

OPTIONALS


apollo

LETTINO APOLLO

Lettino in legno di faggio verniciato a due segmenti. Regolazione dell'altezza da cm. 55 a cm. 85. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 130 uniformemente distribuiti.

APOLLO BED

Wooden bed, two sections. Adjustable height from 55 cm. to 85 cm. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-rip. Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 130 Kg. well distributed.

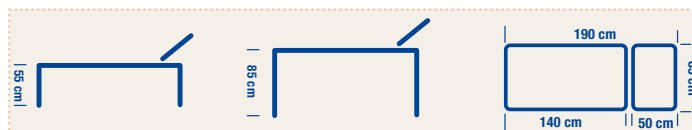




Supporto rotolo carta
Roll of paper dispenser



Lenzuolino carta a due veli cm. 60 X mt. 50
Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.

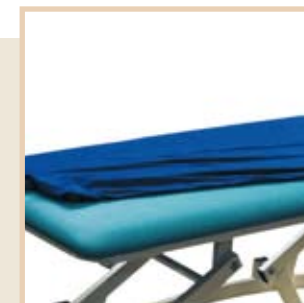

Coprilettino in spugna colore blu per lettini
larghezza cm. 67
Towelling bedspread, blue colour, for beds width 67 cm.

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Apollo	190X65X55 / 85	3034

Optionals	Codice / Code
SUPPORTO ROTOLO CARTA per lettini fissi <i>Roll of paper dispenser for fixed beds</i>	3029
LENZUOLINO CARTA A DUE VELI cm. 60 X mt. 50 <i>Two-layer paper sheet width 60 cm – length 50 mt.</i>	3010L6
COPRILETTINO IN SPUGNA COLORE BLU PER LETTINI LARGHEZZA CM. 65 <i>Towelling bedspread, blue colour, for beds width 65 cm.</i>	3019

antero

LETTINO ANTERO

Lettino in acciaio cromato chiudibile a valigia. A due segmenti. Testata regolabile solo in positivo mediante cerniera a scatto. Senza foro per la respirazione. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata Max kg. 95 uniformemente distribuiti. Peso del lettino KG. 18. Colore nero

ANTERO BED

Suitcase bed chromium steel painted frame. Two sections. Adjustable headpiece in positive position by means of spring-rip. WITHOUT Breathing hole. Covering is in washable vinyl and flame retardant Class 1 IM. Maximum load capacity 95 Kg. well distributed.

Weight : 18 Kg.

Colour: Black





Lettino Antero chiuso
Antero bed, closed



Borsone porta lettino ANTERO.
Bag for ANTERO bed.



Supporto facciale per lettino ANTERO.
Face support for ANTERO BED.

OPTIONALS

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
Antero	187X64X72 aperto / <i>open</i> 95X15X65 chiuso / <i>closed</i>	3031

Optionals	Codice / Code
Borsone porta lettino ANTERO. <i>Bag for ANTERO bed.</i>	3033
Supporto facciale per lettino ANTERO. <i>Face support for ANTERO BED.</i>	30321

hydra

colori disponibili
colours available

panna



beige

giallo



yellow

arancio



orange

bordeaux



bordeaux

verde



green

blu



blue

grigio



grey


nero



black

LETTINO PORTATILE HYDRA

Lettino per trattamenti chiudibile a valigia in legno. Gambe regolabili in altezza. Dotato di appoggia braccia e di appoggia testa estraibili. Il lettino si piega a metà racchiudendo al suo interno, gambe e appoggi e, una volta chiuso può essere agevolmente trasportato utilizzando il borsone disponibile a richiesta. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max Kg. 150 uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza.

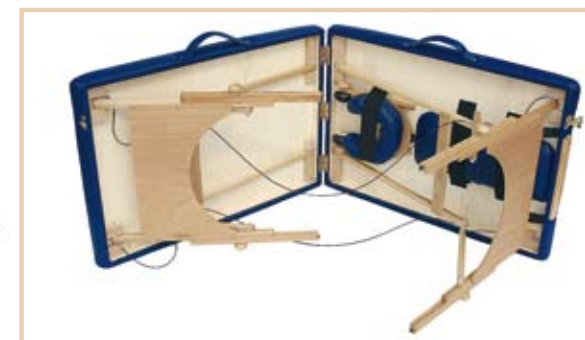

HYDRA PORTABLE BED

Wooden folding suitcase bed with legs. Legs adjustable in height. Equipped with removable armrests and headrest. The bed folds up in the middle, containing legs and supports. It can be easily transported using the bag, available on request. Maximun load capacity 150 Kg. well distributed. Available in two various measurement of width.

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code	Optionals	Codice / Code
Hydra	218x65x60-82 aperto / open 95x65x20 chiuso / closed Kg. 15,70 ca.	8010	Borsa in nylon per lettino HYDRA da cm. 65 Nylon bag for HYDRA bed 65 cm. wide.	3033M
Hydra LARGE	Larghezza cm. 75 Width 75 cm	8010LARGE	Borsa in nylon per lettino HYDRA da cm. 75 Nylon bag for HYDRA bed 75 cm. wide.	3033LM

arredamento studio medico

doctor's office furniture

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	ARMADIO A VETRI A DUE PORTE BATTENTI Armadio a vetri temperati con quattro ripiani regolabili a due porte battenti. Struttura in acciaio verniciato. Dimensioni: cm. 80x40x180 h. <i>GLASS CUPBOARD TWO LEAVES</i> <i>Glass cupboard with four adjustable shelves and two leaves. Steel painted frame.</i> <i>Size: 80x40x180 cm.</i>	3090
	ARMADIO A VETRI AD UNA PORTA BATTENTE Armadio a vetri temperati con quattro ripiani regolabili e una porta battente. Struttura in acciaio verniciato. Dimensioni: cm. 60x40x160 h. <i>GLASS CUPBOARD ONE LEAF</i> <i>Glass cupboard with four adjustable shelves and one leaves. Steel painted frame.</i> <i>Size: 60x40x160 cm.</i>	3091

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SCRIVANIA CON TRE CASSETTI Struttura in acciaio verniciato. Piano in bilaminato. Dimensioni: cm. 130x80x73 h. <i>WRITING DESK WITH THREE DRAWERS</i> <i>Steel painted frame, laminated top.</i> <i>Size: 130x80x73cm.</i>	3092
	POLTRONCINA GIREVOLE Poltroncina operativa con particolari linee estetiche funzionali con schienale alto a contatto permanente. Dotazione di serie: imbottitura indeformabile, regolazione in altezza a gas, braccioli, ruote. Dimensioni poltrona: Altezza cm. 109 – Lunghezza cm. 54 – Profondità cm. 63 Dimensioni seduta: Altezza cm. 55 larghezza cm. 46 Profondità cm. 44. <i>REVOLVING OFFICE CHAIR</i> <i>A special search for aesthetic and functionality is the salient feature of this operator chair with height backrest with adjustable backrest. Series equipped: unchangeable stuffing, gas lift, arm, castors.</i> <i>Chair measures: Height 109 cm. Length 54 depth 63 cm.</i> <i>Seat measures: Height 55 cm. Length 46 cm. Depth 44 cm.</i>	3093

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SEDIA Imbottitura indeformabile, struttura in ferro verniciato. Dimensioni sedia: Altezza cm. 75 Lunghezza cm. 71 Profondità cm. 66. Dimensioni della seduta: Altezza cm. 42 Lunghezza cm. 50 Profondità cm. 49. CHAIR <i>Non-deformable stuffing, steel frame black colour. Chair measures: Height 75 cm. Length 71 cm. Depth 66. Seat measures: Height 42 cm. Length 50 cm. Depth 49 cm.</i>	3094
	APPENDI ABITI A COLONNA Girevole con porta ombrelli e raccogli gocce. REVOLVING CLOTHES-STAND <i>With umbrella-stand and picking drops.</i>	3095



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PARAVENTO A TRE ANTE Struttura in acciaio cromato. Dimensioni: cm. 195x185 <i>THREE SHUTTER SCREEN Chromium Steel painted frame. Size: 195x185 cm</i>	3096
	CARRELLO MODELLO AP Carrello a due piani smontabile in tubo d'acciaio ovale verniciato a fuoco con polveri epossidiche. Piani in bilaminato. Dimensioni: Lunghezza cm. 43, larghezza cm. 30 Altezza cm. 70 Peso kg. 7 <i>TROLLEY MODEL AP Trolley with two removable shelves, oval steel tube structure painted with epossiac powder, shelves in laminated sheet. Dimension: Length 43 cm. Breadth 30 cm. Height 70 cm. Weight 7 Kg.</i>	4110
	Disponibile nella versione con ruote da 50 mm. <i>Models available: with wheels diameter 50 mm.</i>	4111

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CARRELLO MODELLO CP Carrello a tre piani in tubo d'acciaio ovale verniciato a fuoco con polveri epossidiche. Piani in bilaminato colore bianco. Dimensioni: Lunghezza cm. 43, Larghezza cm. 30 Altezza cm. 70 Peso kg. 9	4114
	<i>TROLLEY MODEL CP</i> <i>Trolley with three shelves, oval steel tube structure painted with epossiac powder, shelves in laminated sheet.</i> <i>Dimension: Length 43 cm. Breadth 30 cm. Height 70 cm. Weight 9 Kg.</i> Disponibile nella versione con ruote da 50 mm. <i>Models available: with wheels diameter 50 mm.</i>	4115
	CARRELLO MODELLO GR Carrello a due piani in tubo d'acciaio ovale verniciato a fuoco con polveri epossidiche. Piani in bilaminato colore bianco. Completo di ruote diametro mm 50. Dimensioni: Lunghezza cm. 60, Larghezza cm. 41, Altezza cm. 73, Peso kg. 10,4	4116
	<i>TROLLEY MODEL GR</i> <i>Trolley with two shelves, oval steel tube structure painted with epossiac powder, shelves in laminated sheet. With wheels diameter 50 mm.</i> <i>Dimension: Length 60 cm. Breadth 41 cm. Height 73 cm. Weight 10,4 Kg.</i>	

scendiletto, sgabelli, panche, sedie in legno

bedside stairs, stools, benches, wooden chairs

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SCENDILETTO A DUE GRADINI Struttura in acciaio cromato. Gradini antiscivolo. Dimensioni della base: lunghezza cm. 52 x larghezza cm. 39. Dimensioni del gradino: lunghezza cm. 20 x larghezza cm. 38 Altezza 1° scalino cm. 22 - Altezza 2° scalino cm. 44. Portata Max Kg. 150. <i>BEDISIDE STAIR WITH TWO STEPS</i> <i>Chromium-plated steel frame. Step anti-slip.</i> <i>Base size: length 52 cm. x width 39 cm.. Steps size: length 20 cm x width 38 cm.</i> <i>Height 1° step 22 cm. Height 2° step 44 cm.</i> <i>Maximum load capacity 150 Kg.</i>	4014
	SCENDILETTO AD UN GRADINO Struttura in acciaio cromato. Gradino antiscivolo. Dimensioni della base: lunghezza cm. 28 x larghezza cm. 39. Dimensioni del gradino: lunghezza cm. 20 x larghezza cm. 38 Altezza cm. 22. Portata Max Kg. 150 <i>BEDISIDE STAIR WITH ONE STEP</i> <i>Chromium-plated steel frame. Step anti-slip.</i> <i>Base size: Length 28 cm. Width 39 cm. Step size: length 20 x width 39cm. Height 22 cm.</i> <i>Maximum load capacity 150 Kg.</i>	4015

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SGABELLO GIREVOLE A cinque razze, altezza regolabile da cm. 40 a cm. 55 mediante pistone a gas. Sedile imbottito. Colore nero. Dimensioni della base diametro cm. 60. Dimensioni del sedile: diametro cm. 35 . Portata Max kg. 120. <i>REVOLVING STOOL On five-feet. Adjustable height from 40 cm. to 55 cm. by means of gas-piston. Black colour. Base size: diameter 60 cm. Seat size: diameter 35 cm. Maximum load capacity 120 Kg.</i>	4016
	SGABELLO IN LEGNO Dimensioni: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 45. Porta Max Kg. 120 <i>WOODEN STOOL Size: length 50 cm. - width 30 cm. - height 45 cm. Maximum load capacity 120 Kg.</i>	4017
	SGABELLO IN LEGNO Dimensioni: lunghezza cm. 37, larghezza cm. 18, altezza cm. 15. Porta Max Kg. 120 <i>WOODEN STOOL Size: length 37 cm. - width 18 cm - height 15 cm. Maximum load capacity 120 Kg.</i>	4018

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PANCHETTA Struttura in acciaio verniciato. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/ antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Dimensioni: lunghezza cm. 60 x larghezza cm. 30 x altezza cm. 45 COLORE BLU - Portata Max kg. 150.	4019
	LITTLE BENCH <i>Steel painted frame. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Size: length 60 cm. width 30 cm height 45 cm.</i> <i>BLUE COLOUR - Maximum load capacity 150 Kg.</i>	
	PANCA Struttura in acciaio verniciato. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/ antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Dimensioni: lunghezza cm. 120 x larghezza cm. 30 x altezza cm. 45 COLORE BLU - Portata Max kg. 150.	4020
	BENCH <i>Steel painted frame. Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Size: length 120 cm. width 30 cm height 45 cm.</i> <i>BLUE COLOUR - Maximum load capacity 150 Kg.</i>	
	PANCHETTA PIANO IN LEGNO Struttura in acciaio verniciato. Il piano è multistrato di pino verniciato al naturale. Dimensioni: lunghezza cm. 60 x larghezza cm. 30 x altezza cm. 45. Portata Max kg. 150.	4023
	LITTLE BENCH <i>Steel painted frame. Wooden frame. Size: length 60 cm. width 30 cm height 45 cm.</i> <i>Maximum load capacity 150 Kg.</i>	

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SEDIA IN LEGNO SENZA BRACCIOLI In legno verniciato, dimensioni: cm. 54 x 52 x 81 h. <u>Le sedie saranno inviate smontate e complete di viterie per il montaggio.</u>	4021
	<i>WOODEN CHAIR WITHOUT ARMREST</i> <i>Wooden frame. Size: 54x52x81 cm.</i> <u>The chairs are delivered NOT ASSEMBLED and complete of screws for the assembly</u>	
	SEDIA IN LEGNO CON BRACCIOLI In legno verniciato dimensioni: cm. 60 x 56 x 81 h <u>Le sedie saranno inviate smontate e complete di viterie per il montaggio.</u>	4022
	<i>WOODEN CHAIR WITH ARMREST</i> <i>Wooden frame. Size : 60 x 56 x 81 cm.</i> <u>The chairs are delivered NOT ASSEMBLED and complete of screws for the assembly</u>	

parallela chiudibile folding parallel bars

PARALLELA CHIUDIBILE


Parallela per deambulazione chiudibile.
Corrimano in legno a forma anatomica
regolabile in altezza da cm. 60 a cm. 100.
Dimensioni: cm. 300x60x60-100.

FOLDING PARALLEL BARS

*Folding parallel bars without footboard.
Adjustable wooden handrails from 60 cm.
to 100 cm.
Size: 300x60x60-100 cm.*



Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
PARALLELA CHIUDIBILE FOLDING PARALLEL BARS	300X60X60-100	3041

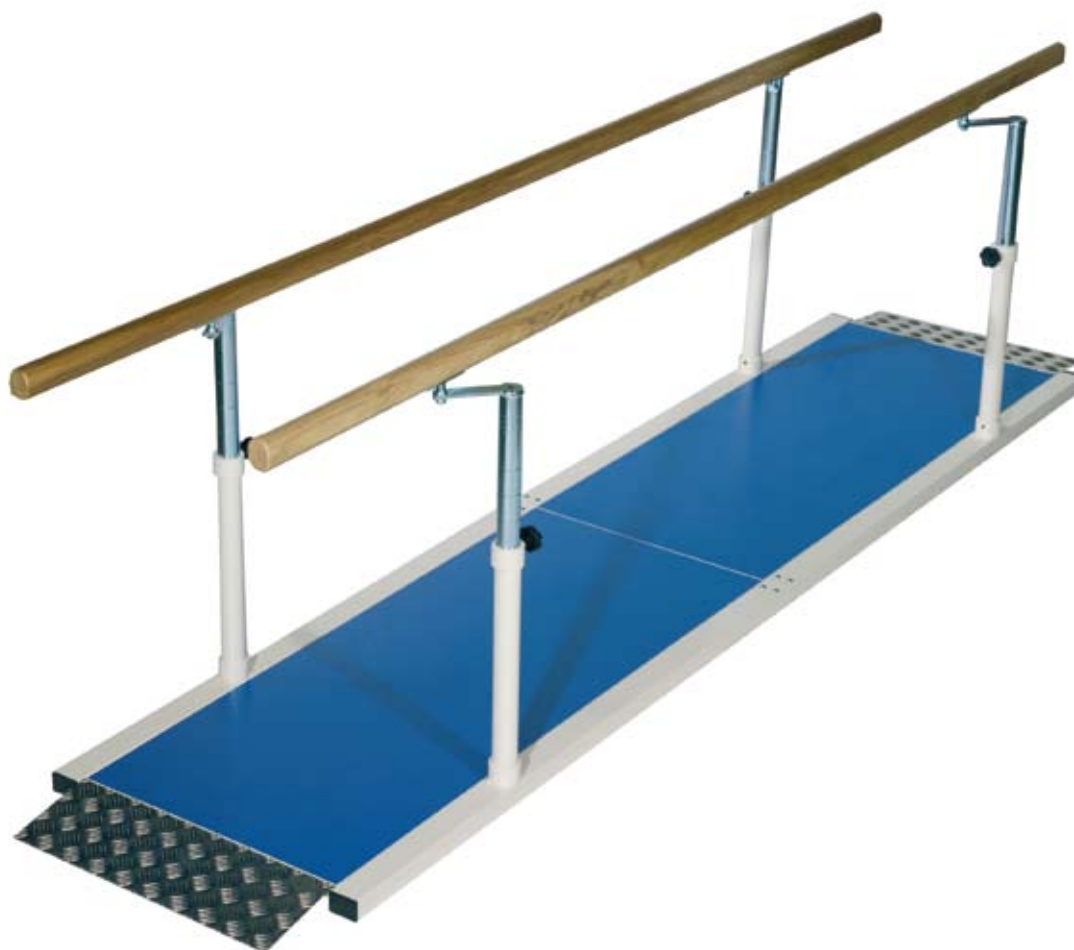

parallela parallel bars

PARALLELA PER DEAMBULAZIONE

Piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo di colore blu. Rampe di accesso in alluminio antiscivolo, per favorire l'accesso in carrozzella. Corrimano in legno a forma anatomica regolabile in altezza da cm. 70 a cm. 100 e in larghezza da cm. 40 a cm. 88. Le dimensioni sono: lunghezza della base e dei corrimano: cm. 300, larghezza della base: cm. 70, larghezza della tavola: cm. 59, larghezza dei corrimano: da cm. 40 a cm. 88, altezza: da cm. 70 a cm. 100. La base è divisa in due parti da cm. 150 cad. (questo per agevolare sia il montaggio che il trasporto). Gambe zincate e rullate per aumentare la resistenza su pressione verticale. La regolazione dei corrimano è effettuata mediante volantino. Ogni sede rullata viene segnalata da un grano pressore in modo da facilitarne l'individuazione. Ad ogni sede rullata il corrimano si fermerà a questo punto si chiuderà il volantino. Disponibile anche nella versione da mt. 4

PARALLEL BARS

Deambulation parallel bars wooden footboard with anti slip covering colour blue. Anti slip ramps. Height adjustable wooden handrails form 70 cm. to 100 cm., width from 40 cm. to 88 cm. Size: base and handrails length: 300 cm. - base width: 70 cm. - board width: 59 cm. - handrails width: from 40 to 88 cm. - height: from 70 to 100 cm. The base is divided up in two sections of 150 cm. each (in order to ease assembly and transport). The galvanized adjusting tubes to be fitted with new ribs to increase vertical stability. The handrails are adjusted by means of a hand wheel. Each rib is market by a dowel in order to locate it better.

The handrails stop at each rib.

*When the rib is reached, the hand wheel must be closed.
Models available: length for the base and handrails: 400 cm.*

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
PARALLELA PARALLEL BARS	300X70X70-100	3042
PARALLELA PARALLEL BARS	400X70X70-100	3042L

accessori per parallela - codice 3042

parallel bars accessories - code 3042

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	STABILIZZATORE Stabilizzatore applicabile alla parallela per offrire un maggiore sostegno in fase di deambulazione. Il sostegno toracico e le maniglie con reggi braccia sono regolabili. STABILIZER <i>Stabilizer used in combination with parallel bars in order to increase the amount of support for the patient during walking. Underarm supports arm prompts and handles are all independently adjustable in height.</i>	3040
	DIVARICATORE Divaricatore per parallela, struttura in legno verniciato dimensioni cm. 290. BARS ABDUCTION <i>Parallel bars abduction; varnished wooden frame size 290 cm. in height.</i>	3043

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SERIE DI OSTACOLI Serie di ostacoli trasversali regolabili con pioli in legno su tutta la lunghezza. Struttura in legno verniciato. Dimensioni: cm. 290x60x30 <i>SET OF ADJUSTABLE CROSS</i> <i>Set of adjustable cross hurdles with wooden pegs over all the length.</i> <i>Varnished wooden frame. Size: 290x60x30 cm.</i>	3047
 	PIANO CONCAVO CONVESSO Piani inclinati con due elementi che formano un percorso concavo o convesso. Struttura in legno verniciato. Dimensioni: cm. 290 x 60 x 10 h. <i>CONCAVE OR CONVEX WALK PATH</i> <i>Two sections footboard witch can be used to create both concave or convex walk path.</i> <i>Varnished wooden frame. Size: 290x60x10 cm.</i>	3049

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PIANO A LISCA DI PESCE Piano di camminamento a lisca di pesce. Struttura in legno verniciato. Dimensioni cm. 290x50x3 <i>FISH-BONE FOOTBOARD</i> <i>Fish-bone footboard. Varnished wooden frame. Size: 290x50x3 cm.</i>	3050
	TELAIO CON DIVISORI Telaio con divisori per contenere rulli in legno, sacchetti di sabbia o granuli. Struttura in legno verniciato. Dimensioni. Cm. 290x50x3 h. <i>FOOTBOARD DIVIDED IN SECTIONS</i> <i>Footboard divided in sections to contain wooden rolls, sandbags and grain bags. Varnished wooden frame. Size: 290x50x3 cm.</i>	3051

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SACCHETTI DI CALPESTIO in sabbia dimensioni: cm. 38x20 <i>MOTOR TRAINING SANDBAG. Size: 38x20 cm.</i>	3056
	SACCHETTI DI CALPESTIO con granuli in PVC. Dimensioni: cm. 38x20 <i>MOTOR TRAINING BAG with PVC grains. Size: 38x20 cm.</i>	3057
	RULLI IN LEGNO dimensioni: diametro cm. 3, lunghezza cm. 20 <i>WOODEN ROLLS. size: diameter cm. 3, length cm. 20</i>	3058
	BASTONCINI IN LEGNO dimensioni: diametro cm. 1, lunghezza cm. 20 <i>SMALL WOODEN STICKS size: diameter cm. 1, length cm. 20</i>	3059

scale deambulation stairs

Modello / Model

Descrizione / Description

Codice / Code



SCALA AD UNA RAMPA

Scala ad una rampa più pianerottolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano in acciaio verniciato, regolabili in altezza da cm. 60 a cm. 100. Gradini chiusi rivestiti in PVC con antiscivolo. Dimensioni del gradino cm. 56x30x13

3052

ONE FLIGHT DEAMBULATION STAIR

One flight deambulation stair.
Height adjustable steel painted handrails from 60 cm. to 100 cm. Closed steps and PVC covering with anti slip.
Step dimensions: cm. 56x30x13

Modello / Model

Descrizione / Description

Codice / Code



SCALA A DUE RAMPE

Scala a due rampe posizionabile in linea o ad angolo. Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zincocromato. Corrimano in acciaio verniciato regolabile in altezza da cm. 60 a cm. 100. Gradini chiusi e rivestiti in PVC con antiscivolo. Alzate differenti 13-16 cm. Larghezza del gradino cm. 56. Profondità del gradino cm. 30.

TWO FLIGHTS DEAMBULATION STAIR

Two flights deambulation stair with different steps 13-16 cm. Height adjustable steel frame from 60 cm. to 100 cm. Closed steps and PVC covering with anti slip. The stair can be positioned in the straight or corner version. Step width 56 cm. Step depth 30 cm.

3053



PIANO INCLINATO

Piano inclinato per scala, struttura in legno, rivestito in materiale antiscivolo.

INCLINED PLANE

Inclined plane for wooden frame stair, anti slip plane.

3055


set di tre gradoni

three steps set

Modello / Model

Descrizione / Description

Codice / Code

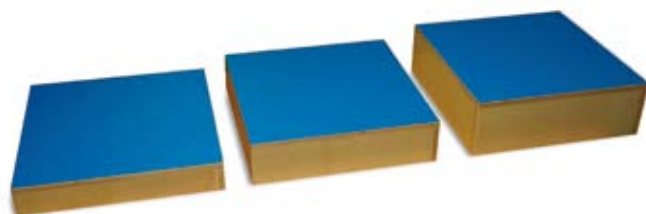

SERIE DI TRE GRADONI
di altezza diverse: cm. 10-15-20.
Larghezza base cm. 60X60.
In legno verniciato rivestiti con materiale antiscivolo.

*THREE WOODEN STEPS SET
different height: 10-15-20. cm.
Base size 60x60 cm.
Varnished wooden frame covered with anti slip material.*

3046

deambulatori walking frames

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	DEAMBULATORE IN LEGA LEGGERA ARTICOLATO Regolazione in altezza da cm. 77,5 a cm. 95. Quattro puntali di appoggio in gomma antimacchia. Manopole gommate larghezza utile cm. 48. Carreggiata ant/post 48/59 cm. Passo 45 cm. Peso Kg. 3 – Portata Max utilizzatore kg. 100. <i>ARTICULED WALKING FRAME (ALUMINIUM)</i> <i>Height adjustable from 77,5 cm. to 95 cm. Four not-slip ferrules. Width 48 cm. Wheelbase prior/post 48/59 cm. Yard 45 cm. Weight 3 Kg. Maximum load capacity 100 Kg.</i>	3061
	Disponibile nella versione DUE RUOTE unidirezionali diametro 6 cm. e DUE PUNTALI di appoggio in gomma antimacchia. <i>Models available: with two directional wheels and two not-slip ferrules.</i>	3062

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	DEAMBULATORE FISSO 4 RUOTE In acciaio cromato. Regolabile in altezza da cm. 76 a cm. 93,5. Quattro ruote piroettanti diametro cm. 6 di cui due con freno. Impugnatura larghezza utile cm. 50. Carreggiata ant/post cm. 52,5. Passo cm. 42,5. Peso kg. 4,5. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>FIXED WALKING FRAME 4 WHEELS</i> <i>In chromium-plated steel. Height adjustable from 76 cm. to 93,5 cm. Four turning wheels diameter 6 cm. Two wheels are with brakes. Width 50 cm. Wheelbase ant/pos 52,5 cm. Yard 42,5 cm. Weight 4,5 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	3063
	Disponibile nelle versioni / Models available: QUATTRO PUNTALI in gomma antimacchia / <i>with four not-slip ferrules</i> DUE RUOTE piroettanti diametro 6 cm. e DUE PUNTALI in gomma antimacchia / <i>with two directional wheels diameter 6 cm. and two not-slip ferrules</i>	3064 3065
	DEAMBULATORE SMONTABILE 4 RUOTE CON BARRE SEDILE In acciaio cromato regolabile in altezza da cm. 79 a cm. 96,5. Predisposto con barre di appoggio sedile. Quattro ruote piroettanti diametro cm. 6 di cui due con freno. Larghezza impugnatura utile cm. 45. Carreggiata ant./post. cm. 47,5 . Passo cm. 60. Peso Kg. 5. Portata Max utilizzatore kg. 150 <i>DISMOUNTABLE 4 WHEELS WALKING FRAME, WITH SUPPORT BARS FOR SEATING</i> <i>In chromium plated steel. Height adjustable from 79 cm. to 96,5 cm. Arrange with support bar for seat. Four turning wheels diameter 6 cm. Two are with brakes. Width 45 cm. Wheelbase ant/post 47,5 cm. Yard. 60 cm. Weight 5 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	3066

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	DEAMBULATORE SMONTABILE CON ASCELLARI E BARRE SEDILE In acciaio cromato con ascellari imbottiti in poliuretano regolabili in altezza da cm. 111 a cm. 144 e in larghezza da cm. 22 a cm. 70. Manubrio regolabile da cm. 94 a cm. 111. Predisposto con barre di appoggio sedile. Quattro ruote piroettanti diametro cm. 6 di cui due con freno. Larghezza utile cm. 45. Carreggiata ant/post cm. 47,5. Passo cm. 60. Peso Kg. 9,5. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>WALKER WITH ARMPIT SUPPORT AND ARRANGE SUPPORT BAR FOR SEAT</i> <i>In chromium plated steel. Height adjustable armpit from 79 cm. to 96,5 cm. and in width from 22 cm. to 70 cm. Arrange support bar for seat. Adjustable handle from 94 cm. to 111 cm. Four turning wheels diameter 6 cm. Two are with brakes. Width 45 cm. Wheelbase ant/post 47,5 cm. Yard. 60 cm. Weight 9,5 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	3067
Optionals per modelli 3066 - 3067 / Optionals for models 3066 - 3067		Codice / Code
SEDILE PER DEAMBULATORI <i>SEAT FOR WALKER</i>		3068
KIT APPOGGIO ANTIBRACCIALE <i>KIT ANTIBRACHIAL SUPPORT</i>		3069
KIT TAVOLINO IMBOTTITO <i>KIT HOLLOW TABLE</i>		3070



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	DEAMBULATORE CHIUDIBILE CON SOSTEGNO ASCELLARE Ascellari imbottiti in poliuretano regolabili in altezza da cm. 115 a cm. 144 e in larghezza da cm. 22 a cm. 70. Chiudibile su snodi articolati. Quattro ruote piroettanti diametro cm. 6 di cui due con freno. Larghezza utile cm. 47,5. Carreggiata ant/post cm. 50. Passo cm. 82. Peso Kg. 9,5. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>WALKING FRAME WITH ARMPIT SUPPORT</i> <i>With armpit support height adjustable from 115 cm. to 144 cm. and width adjustable from 22 cm. to 70 cm. Can be closed. Four turning wheels diameter 6 cm. Two are with brakes. Width 47,5 cm. Wheelbase ant/post 50 cm. Yard. 82 cm. Weight 9,5 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	3071
	DEAMBULATORE SMONTABILE CON FRENI A LEVA 4 RUOTE Regolabile in altezza da cm. 75 a cm. 100. Maniglie gommate con impugnatura larghezza utile cm. 45. Freni di rallentamento e stazionamento a leva sulle maniglie. Due ruote unidirezionali diametro cm. 10 e due ruote anteriori piroettanti diametro cm. 10. Carreggiata ant/post cm. 47,5. Passo cm. 60. Peso kg. 8. Portata Max utilizzatore Kg. 150. <i>WALKING FRAME WITH LEVER BRAKES FOUR WHEELS</i> <i>Height adjustable from 75 cm. to 100. Width 45 cm. Brakes of stationary and stop with lever. Two wheels directional diameter 10 cm. and two anterior turning wheels diameter 10 cm. Wheelbase ant/post 47,5 cm. Yard. 60 cm. Weight 8 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	3075

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
-----------------	---------------------------	---------------



DEAMBULATORE SMONTABILE CON SOSTEGNO ASCELLARE E FRENI A LEVA

In acciaio cromato con sostegno ascellare regolabile in altezza da cm. 115 a cm. 144 e in larghezza da cm. 22 a cm. 70. Costruzione fissa e predisposto con barre di appoggio sedile. Manubrio fisso altezza cm. 100 con freni di rallentamento e stazionamento a leva. Due ruote unidirezionali diametro cm. 10 con freno e due ruote anteriori piroettanti. Larghezza utile cm. 52,5. Carreggiata ant/post cm. 55. Passo cm. 70. Peso kg. 9,5. Portata Max utilizzatore kg. 150.

3077

WALKER WITH ARMPIT SUPPORT AND BRAKES

In chromium plated steel tubing. With armpit support height adjustable from 115 cm. to 144 cm. and width adjustable from 22 cm. to 70 cm. Arrange support bar for seat. Brakes of stationary and stop with lever. Two directional wheels diameter 10 cm with brakes and two directional wheels. Width 52,5 cm. Wheelbase ant/post 55 cm. Yard. 70 cm. Weight 9,5 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.

Optionals per modelli 3077 / Optionals for models 3077

Codice / Code

SEDILE PER DEAMBULATORI codice 3077

SEAT FOR WALKING FRAME code 3077



3079

rollator

rollator

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ACCIAIO VERNICIATO COLORE BLU CON FRENI A LEVA Deambulatore rollator chiudibile su cerniere in acciaio verniciato. Due ruote piroettanti e due ruote unidirezionali diametro cm. 20. Manubrio regolabile in altezza da cm. 78 a cm. 100 con manopole gommite larghezza cm. 43. Freni di rallentamento e stazionamento a leva sulle manopole. Completo di sedile, cestello e piano di appoggio rimovibile. Carreggiata ant/post cm. 37-50. Passo cm. 50. Peso Kg. 9. Portata Max utilizzatore Kg. 150. <i>ROLLATOR FOLDABLE BLUE COLOUR WITH BRAKES</i> <i>Foldable and adjustable walker in painted aluminium. Two of wheels are turning and two are directional diameter 20 cm. Height adjustable from 78 cm. to 100 cm. Handgrip not-slip. Width 45 cm. Brakes of stationary and stop with lever. Equipment with: seat, basket and remove support top. Wheelbase prior/post 37-50 cm. Yard 50 cm. Weight 9 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5275
Optionals per rollator (solo per articoli 5275-5276-5277) / <i>Optionals for rollators (only for items 5275-5276-5277)</i>		Codice / Code

APPOGGIO ANTIBRACCIALE COMPLETO DI FRENI.

ANTIBRACHIAL SUPPORT WITH BRAKES



5280

stampelle, tripodi, quadripodi crutches, tripods, 4-leg supports

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
 	STAMPELLA IN LEGA LEGGERA VERNICIATA COLORE GRIGIO Appoggio all'avambraccio in termoplastico fisso. Manopola in plastica con catarifrangente e puntale in gomma antiscivolo e antimacchia. Regolabile in altezza su 10 posizioni. Altezza min./ max alla manopola da cm. 68,5 a cm. 91. Altezza della sommità manopola/braccio fissa cm. 24. Peso Kg. 0,45. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>CRUTCH: ALUMINIUM - COLOUR GREEN</i> <i>Fixed support in thermoplastic resin at forearm, no slip rubber cap. Adjustable in height 10 different positions. Min./Max height at handgrip from 68,5 cm. to 91 cm. Fixed height knob/arm 24 cm. Weight 0,45 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5300
	Disponibile nella versione con manopola anatomica / Available with anatomic knob	5301
 	STAMPELLA IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO Con molla ammortizzante. Appoggio all'avambraccio in termoplastico fisso. Manopola in plastica catarifrangente e puntale in gomma antiscivolo e antimacchia. Regolabile in altezza su 14 posizioni. Altezza min./max alla manopola da cm. 69,5 a cm. 102. Altezza della sommità manopola-braccio fissa cm. 24. Peso Kg. 0,80. Portata Max utilizzabile kg. 150. <i>CRUTCH IN CHROMIUM PLATED IRON TUBING</i> <i>With shock absorber, Fixed support in thermoplastic resin at forearm, no slip rubber cap. Adjustable in height 14 different positions. Min./Max height at handgrip from 69,5 cm. to 102 cm. Fixed height knob/arm 24 cm. Weight 0,80 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5305
	Disponibile nella versione con manopola anatomica / Available with anatomic knob	5306



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	TRIPODE In tubo di acciaio cromato con puntali di gomma. Regolabile in altezza su 10 posizioni altezza minima-massima alla manopola da 75 a 103 cm. Dimensioni della pianta di appoggio cm. 20x30. Peso kg. 1,1. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>TRIPOD</i> <i>In chromium plated iron tubing with rubber cap. Adjustable in height 10 different positions. Min./Max height from 75 cm. to 103 cm. Base size: 20x30 cm. Weight 1,1 Kg. Maximum load capacity 150 Kg</i>	5315
	TRIPODE CON APPOGGIO ANTIBRACCHIALE Con appoggio antibrachiale in resina termoplastica. Struttura in tubo di acciaio cromato. Ambidestro. Regolabile in altezza su 13 posizioni, altezza minima-massima alla manopola da cm. 70 a cm. 100. Dimensioni della pianta di appoggio cm. 20x30. Peso Kg. 1,2. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>TRIPOD WITH ANTIBRACHIAL SUPPORT</i> <i>In thermoplastic resin. Chromium plated iron. Ambidextrous. Adjustable in height 13 different positions. Min./Max height from 70 cm. to 100 cm. Base size: 20x30 cm. Weight 1,2 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5317

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	QUADRIPODE In tubo di acciaio cromato con puntali in gomma. Regolabile in altezza su 10 posizioni altezza minima-massima alla manopola da cm. 79 a cm. 104. Dimensioni della pianta di appoggio cm. 19X22X24. Peso kg. 1,2. Portata Max utilizzatore kg. 150 <i>FOUR-LEG SUPPORT</i> <i>In chromium plated iron tubing with rubber cap. Adjustable in height 10 different positions. Min./Max height from 79 cm. to 104 cm. Base size: 19X22X24 cm. Weight 1,2 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5320
	QUADRIPODE CON APPOGGIO ANTIBRACHIALE Con appoggio antibrachiale in resina termoplastica. Struttura in tubo di acciaio cromato. Ambidestro. Regolabile in altezza su 13 posizioni appoggio avambraccio da cm. 84 a cm. 124. Altezza minima-massima alla manopola da cm. 70 a cm. 100. Dimensioni della pianta di appoggio cm. 22x24x19. Peso Kg. 1,3. Portata Max utilizzatore kg. 150. <i>FOUR-LEG SUPPORT WITH ANTIBRACHIAL SUPPORT</i> <i>In thermoplastic resin. Chromium plated iron. Ambidextrous. Height adjustable in 13 different positions forearm support from 84 cm. to 124 cm. Min./Max height from 70 cm. to 100 cm. Base size: 22x24x19 cm. Weight 1,3 Kg. Maximum load capacity 150 Kg.</i>	5321

bastoni ortopedici

orthopaedic walking-sticks

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	BASTONE ORTOPEDICO IN LEGA LEGGERA Con puntale di appoggio. Impugnatura fisiologica. Regolabile in altezza su 10 posizioni da cm. 73 a cm. 95,5. Peso Kg. 0,36. Portata Max utilizzatore kg. 100	5330
	<i>ORTHOPAEDIC WALKING-STICK (ALUMINIUM)</i> <i>Height adjustable in 10 positions from 73 cm. to 95,5 cm. Weight 0,36 Kg.</i> <i>Maximum load capacity 100 Kg.</i>	
	Disponibile con impugnatura curva / Available with curved handle	5331
	BASTONE ORTOPEDICO IN LEGA LEGGERA RICHIUDIBILE Con puntale di appoggio richiudibile e completo di custodia trasparente. Impugnatura fisiologica. Regolabile in altezza in 5 posizioni da cm. 81 a cm. 91. Peso kg. 0,39. Portata Max utilizzatore kg. 100	5332
	<i>ORTHOPAEDIC WALKING-STICK (ALUMINIUM) (CAN BE CLOSE)</i> <i>With case. Height adjustable in 5 positions from 81 cm. to 91. Weight 0,39 Kg.</i> <i>Maximum load capacity 100 Kg.</i>	

carrozzine pieghevoli

folding wheelchairs

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
	5355	CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA Su ruote posteriori in plastica con copertura piena dura. Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato colore blu e cromato nelle zone ad usura e movimento. Freno a leva utilizzabile su ruote posteriori. Ruote anteriori piroettanti. Gruppo pedane con rotazione antero posteriore estraibile, verticalizzabile e regolabile in altezza. Doppia crociera. Fiancate con braccio desk ribaltabili. Rivestimento ignifugo classe 1 IM. <i>FOLDING WHEELCHAIR FOR SELF-PUSH</i> <i>Blue colour varnish. Back wheels for self-push and with brake.</i> <i>The previous wheels are turning. Folding sides with arm desk.</i> <i>Covering flame retardant class 1 IM.</i>	cm. 17,50 diam. ruote anteriori / diam. previous wheels cm. 60 diam. ruote posteriori / diam. back wheels cm. 43 larghezza sedile / width seat cm. 51 altezza sedile / height seat cm. 42 profondità sedile / depth seat cm. 36 altezza schienale / height back cm. 23 altezza braccioli / height arm-chair cm. 59 ingombro larghezza carrozzina aperta / full width cm. 90 altezza totale carrozzina / height cm. 107 ingombro lunghezza carrozzina aperta / full length cm. 25 ingombro larghezza carrozzina chiusa / full width (closed) kg. 18 peso carrozzina / weight kg. 150 portata max utilizzatore / max load capacity

Optionals / Options

Poggia-gambe elevabile per carrozzina pieghevole regolabile e completo di cuscinetti di appoggio polpaccio.

Liftable footrests with leg-lifter, adjustable height and inclination with small cushions calf support.



Codice / Code

5356

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data	
	5357	CARROZZINA PIEGHEVOLE SCHIENALE RECLINABILE AD AUTOSPINTA Su ruote posteriori in plastica con copertura piena dura. Telaio pieghevole stabilizzato in acciaio verniciato colore blu e cromato nelle parti soggette ad usura e movimento. Freno a leva utilizzabile su ruote posteriori. Ruote anteriori piroettanti. Gruppo pedane estraibili, verticalizzabili e regolabili in altezza. Fascia appoggia gambe. Fiancate con bracciolo estraibile. Rivestimento ignifugo classe 1 IM. <i>FOLDING WHEELCHAIR FOR SELF-PUSH WITH WC ADJUSTABLE BACK</i> <i>Blue colour varnish. Back wheels for self-push and with brake. The previous wheels are turning. Revolving and removable footrest. Removable sides.</i> <i>Covering flame retardant class 1 IM.</i>	cm. 20	diam. ruote anteriori / diam. previous wheels
			cm. 60	diam. ruote posteriori /diam. back wheels
			cm. 43	larghezza sedile / width seat
			cm. 51	altezza sedile / heigth seat
			cm. 43	profondità sedile / depth seat
			cm. 55	altezza schienale / height back
			cm. 23	altezza braccioli / height arm-chair
			cm. 61	ingombro larghezza carrozzina aperta / full widht
			cm. 106	altezza totale carrozzina / height
			cm. 114	ingombro lunghezza carrozzina aperta/ full length
			cm. 30	ingombro larghezza carrozzina chiusa/ full width (closed)
			kg. 23	peso carrozzina / weight
			kg. 150	portata max utilizzatore / max load capacity

Optionals / Optionals	Codice / Code
Poggia-gambe elevabile per carrozzina pieghevole con schienale reclinabile regolabile e completo di cuscinetti di appoggio polpaccio. <i>Liftable footrests with leg-lifter, adjustable height and inclination with small cushions calf support.</i>	 5358
Inclinazione schienale con servocomando. <i>Adjustable back with servo-control.</i>	 5359

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data	
	5360	CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPER LEGGERA AD AUTOSPINTA Su ruote posteriori in lega leggera con copertura skin ad alta pressione. Regolazione posizione perni ruote posteriori ad estrazione rapida, freno a leva utilizzatore su ruote posteriori. Ruote anteriori piroettanti su forcella regolabile in posizione ed inclinazione. Gruppo pedane con rotazione antero posteriore estraibile, verticalizzabile e regolabile in altezza doppia crociera. Fiancate para-abiti regolabili. Telaio pieghevole stabilizzato in lega di alluminio ed acciaio verniciato blu. Rivestimento ignifugo classe 1 IM.	cm. 15	diam. ruote anteriori / diam. previous wheels
			cm. 60	diam. ruote posteriori /diam. back wheels
			cm. 43	larghezza sedile / width seat
			cm. 50	altezza sedile / heigth seat
			cm. 42	profondità sedile / depth seat
			cm. 36	altezza schienale / height back
			cm. 60	ingombro larghezza carrozzina aperta / full widht
			cm. 89	altezza totale carrozzina / height
			cm. 100	ingombro lunghezza carrozzina aperta/ full length
			cm. 30	ingombro larghezza carrozzina chiusa/ full width (closed)
			kg. 13	peso carrozzina / weight
			kg. 130	portata max utilizzatore / max load capacity
		<i>FOLDING WHEELCHAIR FOR SELF-PUSH SUPER LIGHT Blue colour varnish. Back wheels for self-push and with brake. The previous wheels are turning. Revolving and removable footrest. Adjustable sides. Covering flame retardant class 1 IM.</i>		

Optional per carrozzine pieghevoli (escluso articolo 5360) / Optionals for folding wheelchairs (except item 5360)
Codice / Code

TAVOLINO RIBALTABILE DX/SX a scelta con incavo avvolgente e bordi. In termoformato rinforzato. Dimensioni 60x48 cm. Regolabile in profondità ed estraibile.

FOLDING SMALL TABLE RIGHT/LEFT . Dimension: 60x48 cm. Adjustable dept and removable.



5365

TAVOLINO FISSO con incavo avvolgente e bordi. In termoplastico rinforzato. Dimensioni: cm. 60x48. Regolabile in profondità ed estraibile.

FIXED SMALL TABLE. Dimension: 60x48 cm. Adjustable dept and removable.



5366

carrozzine rigide

stiff wheelchairs

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
	5370	CARROZZINA RIGIDA AD AUTOSPINTA CON WC SCHIENALE RECLINABILE. Ruote posteriori da auto-spinta in metallo a copertura pneus. Ruote anteriori piroettanti. Freno di stazionamento su ruote posteriori. Schienale reclinabile con maniglione. Gruppo pedane estraibili, verticalizzabili, girevoli e regolabili in altezza. Poggia gambe elevabile a inclinazione regolabile e completo di cuscinetti appoggia polpaccio. Fiancate estraibili con braccioli. Tappezzeria imbottita maggiorata cm. 8. Rivestimento ignifugo classe 1 IM.	cm 20 diam. ruote anteriori / diam. previous wheels
		<i>WHEELCHAIR FOR SELF-PUSH WITH WC ADJUSTABLE BACK</i> <i>In chromium-plated steel with WC. Back wheels for self-push and with brake. The previous wheels are turning. Lift able footrests with leg-lifter, adjustable height and inclination with small cushions calf support. Removable sides. Thickness padding 8 cm. Covering flame retardant class 1 IM.</i>	cm 60 diam. ruote posteriori / diam. back wheel cm 43 larghezza sedile / width seat cm 54 altezza sedile / height seat cm 45 profondità sedile / depth seat cm 58 altezza schienale / height back cm 23 altezza braccioli / height arm-chair cm 64 ingombro larghezza carrozzina / full width cm 110 altezza totale carrozzina / height cm 123 ingombro lunghezza carrozzina / full length kg 25 peso carrozzina / weight kg 150 portata max utilizzatore / max load capacity

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
-----------------	---------------	---------------------------	-------------------------------

5375



CARROZZINA RIGIDA DA TRANSITO CON WC SCHIENALE FISSO

Ruote anteriori piroettanti, ruote posteriori unidirezionali in plastica con copertura gommata. Freno di stazionamento su ruote posteriori. Tappezzeria in similpelle lavabile. Schienale fisso. Gruppo pedane estraibili, verticalizzabili, girevoli e regolabili in altezza. Poggia gambe sfilabile completo di fascia di appoggio. Fiancate estraibili con braccioli. Dispositivo WC con tappo sedile estraibile frontalmente. Rivestimento ignifugo classe 1 IM.

WHEELCHAIR WITH WC FIXED BACK

In chromium-plated steel with WC. The previous wheels are turning. The back wheels are directional and with brake. Revolving and removable footrest. Removable sides. Thickness padding 8 cm. Covering flame retardant class 1 IM.

Thickness padding 8 cm.

cm	20	diam. ruote anteriori / diam. previous wheels
cm	30	diam. ruote posteriori / diam. back wheel
cm	43	larghezza sedile / width seat
cm	54	altezza sedile / height seat
cm	45	profondità sedile / depth seat
cm	43	altezza schienale / height back
cm	23	altezza braccioli / height arm-chair
cm	63	ingombro larghezza carrozzina / full width
cm	94	altezza totale carrozzina / height
cm	103	ingombro lunghezza carrozzina / full length
kg	20	peso carrozzina / weight
kg	150	portata max utilizzatore / max load capacity

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data			
	5376	CARROZZINA RIGIDA DA TRANSITO CON WC SCHIENALE RECLINABILE. In acciaio cromato con WC. Ruote anteriori unidirezionali, ruote posteriori piroettanti. Freno integrato. Tappezzeria in similpelle lavabile. Schienale reclinabile. Gruppo pedane estraibili, verticalizzabili, girevoli e regolabili in altezza. Poggia gambe elevabile ad inclinazione regolabile completo di cuscinetti appoggia polpaccio. Fiancate estraibili con braccioli. Dispositivo WC con tappo sedile estraibile frontalmente. Rivestimento ignifugo classe 1 IM.	cm	20	diam. ruote anteriori / diam. previous wheels	
			cm	20	diam. ruote posteriori / diam. back wheel	
<i>WHEELCHAIR WITH WC BACK ADJUSTABLE</i> <i>In chromium-plated steel with WC. The previous wheels are turning. The back wheels are directional and with brake. Lift able footrests with leg-lifter, adjustable height and inclination with small cushions calf support. Removable sides. Thickness padding 8 cm. Covering flame retardant class 1 IM.</i>			cm	43	larghezza sedile / width seat	
			cm	54	altezza sedile / height seat	
			cm	45	profondità sedile / depth seat	
			cm	58	altezza schienale / height back	
			cm	23	altezza braccioli / height arm-chair	
			cm	55	ingombro larghezza carrozzina / full width	
			cm	110	altezza totale carrozzina / height	
			cm	90	ingombro lunghezza carrozzina / full length	
			kg	20	peso carrozzina / weight	
			kg	150	portata max utilizzatore / max load capacity	
						

Optional per carrozzine rigide / Optionals for stiff wheelchairs

TAVOLINO RIBALTABILE DX/SX a scelta con incavo avvolgente e bordi. In termoformato rinforzato. Dimensioni 60x48 cm. Regolabile in profondità ed estraibile.

FOLDING SMALL TABLE RIGHT/LEFT . Dimension: 60x48 cm. Adjustable dept and removable.



5365

TAVOLINO FISSO con incavo avvolgente e bordi. In termoplastico rinforzato. Dimensioni: cm. 60x48. Regolabile in profondità ed estraibile.

FIXED SMALL TABLE. Dimension: 60x48 cm. Adjustable dept and removable.



5366

seggioloni polifunzionali

polyfunctional wheelchair

Modello / Model

Codice / Code

Descrizione / Description

Dati tecnici / Technical data

5380



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE BASCULANTE

Ruote posteriori diametro cm. 60 montate su telaio per esterni con mancorrente per autospinta. Ruote anteriori diametro cm. 20 piroettanti su telaio per esterni. Sedile reclinabile di 20° e schienale di 30° in modo indipendente (50° dopo basculamento). Basculamento oleopneumatico con comandi a leva sul maniglione accompagnatore. Freni di stazionamento e rallentamento. Schienale anatomico su sistema pensionabile e posizione regolabile in altezza. Fianchetti imbottiti con braccioli regolabili in altezza e sincronizzati al movimento dello schienale. Movimento adattativo di schienale e seduta per mantenimento posizione sistemi di postura. Sistema di chiusura a pacco.

POLYFUNCTIONAL TILTING WHEELCHAIR

Rear wheels for patient use and pivoting front wheels for outdoor use. Independent tilting seat 20° and backrest 30° (50° after both tilting). Assisted pneumatic movement with lever at the attendant handle. Stop and slowing drum brakes with lever at the attendant handle. Multifunctional leg and footrest set, adjustable for height and inclination. Anatomic backrest on adjustable tension strap system with adjustable height position. Padded seat side with arm rest height adjustable and synchronized with the movement of the back rest. Self adapting movement of seat and back rest for position of postural systems. Pack folding system.



cm	20	diam. ruote anteriori / diam. front wheels
cm	60	diam. ruote posteriori / diam. rear wheel
cm	44	larghezza sedile / seat width
cm	53	altezza sedile / seat height
cm	45	profondità sedile / seat deep
cm	55	altezza schienale / backrest height
cm	22-34	altezza braccioli / armrest height
cm	68	ingombro larghezza seggiolone aperto / overall width open tilting wheelchair
cm	70- 92	altezza totale seggiolone / overall height open tilting wheelchair
cm	116	ingombro lunghezza seggiolone aperto / overall length open tilting wheelchair
cm	68x80x80	ingombro imballo / overall dimension packing
kg	32	peso / weight
kg	150	portata max utilizzatore / max load occupant

fisiotek 3000

Mobilitazione passiva arto inferiore

Passive mobilization lower limb

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
FISIOTEK 3000 E	3000E	Il modello Fisiotek 3000 E permette la mobilizzazione dell'articolazione di ginocchio ed anca attraverso il movimento di flesso-estensione. Il movimento dell'apparecchio è basato sulla corretta regolazione della lunghezza del femore del paziente, che risulta necessaria per il posizionamento dell'arto. Il peso ridotto, solo 9,5 kg, assicura la massima maneggevolezza durante l'utilizzo. Possono essere riabilitati arti relativi ad una lunghezza del femore del paziente compresa tra cm 32 e cm 49.	DATI TECNICI Alimentazione: 85 ÷ 260V ~ 50 ÷ 60 Hz Sicurezza elettrica: Classe I B Norma EN 60601-1 Compatibilità elettromagnetica: Gruppo 1 Classe B Norma EN 60601-1-2 Classificazione secondo Dir. UE 93/42: Classe IIa Peso: Kg. 9,5 FUNZIONI PROGRAMMABILI - Ampiezza movimento flesso-estensione ginocchio da -10° a 120° - Ampiezza movimento anca da 7° a 115° - Velocità - Forza da 0 a 40 kg - Tempo di lavoro - Pausa in flessione - Warm up (nel menù funzioni) - Ripetizioni al limite di flessione - Ripetizioni al limite di estensione Appoggio piede: l'appoggio del piede può essere regolato per fornire alla caviglia del paziente la posizione più confortevole.




Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
FISIOTEK 3000 E	3000E	<i>Fisiotek 3000 E model uses flexion-extension movement to allow mobilisation of the knee and hip.</i> <i>The movement of the device is based on the correct adjustment of the length of the patient's femur, which is necessary for the positioning of the limb.</i> <i>The device is light-weight, only 9.5 kg, to ensure the greatest manoeuvrability during use.</i> <i>Limbs with a length relative to the patient's femur from 32 cm to 49 cm can be rehabilitated.</i>	ENGINEERING DATA <i>Power supply: 85 ÷ 260V ~ 50 ÷ 60 Hz</i> <i>Electrical safety: Class I B Standard EN 60601-1</i> <i>Electromagnetic compatibility: Group 1 Class B Standard EN 60601-1-2</i> <i>Classification according to EEC Dir. 93/42: Class IIa</i> <i>Weight: Kg. 9,5</i> PROGRAMMABLE FUNCTIONS - Flexion-extension knee movement range from -10° to 120° - Hip movement range from 7° to 115° - Speed - Force - Working time - Pause in flexion - Warm-up (menu's page) - Repetitions to extension limit - Repetitions to flexion limit <i>Foot support: the foot support can be adjusted to allow more comfortable positioning of the patient's ankle</i>



Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
FISIOTEK 3000 G 	3000G	Il modello 3000 G permette la mobilizzazione dell'articolazione di ginocchio ed anca attraverso il movimento di flesso-estensione. Il movimento dell'apparecchio è basato sulla corretta regolazione della lunghezza del femore del paziente, che risulta necessaria per il posizionamento dell'arto. Il peso ridotto, solo 9,5 kg, assicura la massima maneggevolezza durante l'utilizzo. Possono essere riabilitati arti relativi ad una lunghezza del femore del paziente compresa tra cm 32 e cm 49.	DATI TECNICI Alimentazione: 85 ÷ 260V ~ 50÷60 Hz Sicurezza elettrica: Classe I B Norma EN 60601-1 Compatibilità elettromagnetica: Gruppo 1 Classe B Norma EN 60601-1-2 Classificazione secondo Dir. UE 93/42: Classe IIa Peso: Kg. 9,5 FUNZIONI PROGRAMMABILI - Ampiezza movimento flesso-estensione ginocchio da -10° a 120° - Ampiezza movimento anca da 7° a 115° - Velocità - Forza - Tempo di lavoro - Incremento automatico angolo di flessione - Incremento automatico angolo di estensione - Pausa in flessione - Pausa in estensione - Warm Up (nel menù funzioni) - Limite incremento automatico in flessione - Limite incremento automatico in estensione - Ripetizioni al limite di flessione - Ripetizioni al limite di estensione Appoggio piede: l'appoggio del piede può essere regolato per fornire alla caviglia del paziente la posizione più confortevole.
FISIOTEK 3000 GS 	3000GS	Come il FISIOTEK 3000G ma con Memory card: permette di memorizzare i parametri programmati per ciascun paziente e tenere traccia dei progressi raggiunti 	

Modello / Model	Codice / Code	Descrizione / Description	Dati tecnici / Technical data
FISIOTEK 3000 G 	3000G	<i>Fisiotek 3000 G model uses flexion-extension movement to allow mobilisation of the knee and hip.</i> <i>The movement of the device is based on the correct adjustment of the length of the patient's femur, which is necessary for the positioning of the limb.</i> <i>The device is light-weight, only 9.5 kg, to ensure the greatest manoeuvrability during use.</i> <i>Limbs with a length relative to the patient's femur from 32 cm to 49 cm can be rehabilitated</i>	ENGINEERING DATA <i>Power supply: 85 ÷ 260V ~ 50 ÷ 60 Hz</i> <i>Electrical safety: Class I B Standard EN 60601-1</i> <i>Electromagnetic compatibility: Group 1 Class B Standard EN 60601-1-2</i> <i>Classification according to EEC Dir. 93/42: Class IIa</i> <i>Weight: Kg. 9,5</i> PROGRAMMABLE FUNCTIONS - Flexion-extension knee movement range from -10° to 120° - Hip movement range from 7° to 115° - Flexion speed - Extension speed - Force - Working time - Automatic flexion angle increase - Automatic extension angle increase - Pause flexion - Pause extension - Warm-up (special console button) - Limit automatic flexion increase - Limit automatic extension increase - Repetitions to extension limit - Repetitions to flexion limit Foot support: the foot support can be adjusted to allow more comfortable positioning of the patient's ankle
FISIOTEK 3000 GS 	3000GS	<i>Like FISIOTEK 3000G but with</i> Memory card: <i>allows the user to store programmed parameters for each patient and keep track of progress</i>	

ginnastica propriocettiva training therapy

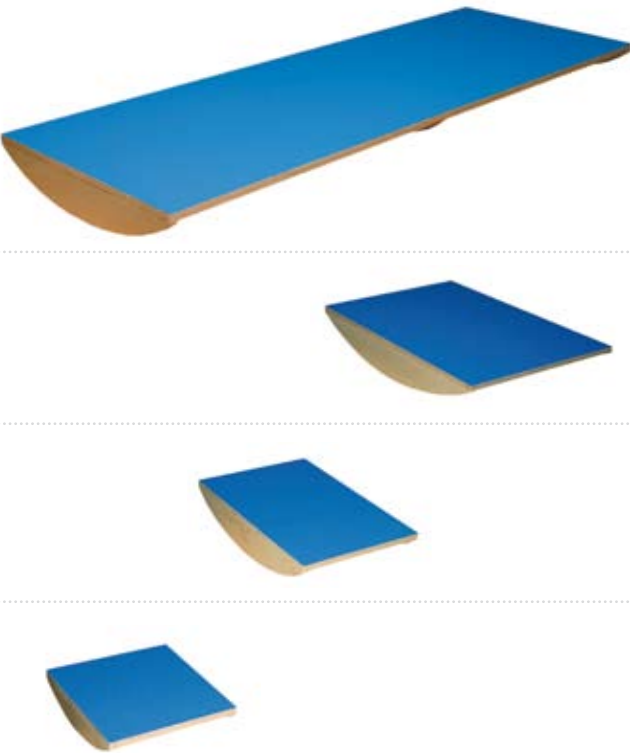Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PEDANE OSCILLANTI Con struttura in legno verniciato e piano antiscivolo. <i>ROCKING FOOTBOARDS</i> <i>wooden frame and anti-slip top.</i>	
	cm 170x60x14 h	3082
	cm 80x60x13 h	3083
	cm 60x40x10 h.	3084
	PEDANINA UFO cm 40x35x9 h.	3085

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PEDANA TIPO ACCELERATORE In legno verniciato con all'interno un cuscino a cuneo rivestito in similpelle. Dimensioni cm. 24x14x15 h.	3086
	<i>LITTLE WOODEN FOOTBOARD, LIKE ACCELERATOR</i> <i>Gradual expansion. Size: 24x14x15 cm.</i>	
	DONDOLI BOBATH Dondolo bobath in legno verniciato con piano antiscivolo	3087
	<i>BOBATH AT ROCKING</i> <i>Bobath at rocking footboard, wooden frame and anti-slip top.</i>	
	DIAMETRO 60x13 h.	
	DIAMETRO 80x13 h.	3088




Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	TEMIX FOOT cm 54x38x19 h	995203
	BOARD TRAINER cm 60x30x19 h	995016

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PROPRIO FOOT ANTISCIVOLO Diametro cm. 37x11 h <i>Diameter cm. 37x11 h</i>	995201
	SOMBRERO Diametro cm. 37x14 h <i>Diameter cm. 37x14 h</i>	995212

apparecchi per diagnosi diagnosis instruments

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PODOSCOPIO A LUCE POLARIZZATA A LED Apparecchio per l'analisi plantare dei piedi. Offre la possibilità di avere una reale visualizzazione della pianta del piede evidenziando i punti di maggiore e minore carico. Struttura in legno di faggio verniciata. Piano di carico in cristallo. Specchio sottostante incollato sul pannello. Doppia illuminazione laterale con luce a LED ad alto effetto. Portata max KG. 135 <i>PLANTAR-SCOPE POLARIZED LED LIGHT</i> This foot examining system allows full visualizing of foot sole by highlighting the minimum or maximum weight bearing spots. Varnished beech-wooden supporting structure. Crystal load base. Underlying mirror attached to panel. Double side lighting with LED high impact. Max load capacity 135 Kg.	3099
	OTTOTIPO CON TAVOLA DECIMALE MISTA MT. 3 Caratteristiche: truciolare rivestito esternamente in noce tanganica, tavola test in vetro serigrafato, opale diffusore di fondo, lampadine di illuminazione ad alta densità, cavo con interruttore e spina. DIMENSIONI: Larghezza cm. 31 - Altezza cm. 68 - Profondità cm. 9. <i>OPTOTYPE WITH WECKER SEC SNELLEN 3 MT.</i> Features: Shivering wood board covered with walnut wood, test table on satiated glass with white contrast back and opal panel, with highly uniformly illumination, to be wall hang, with cable and plug. SIZE: Length 31 cm. - Breadth 68 cm. - Height 9 cm.	4001

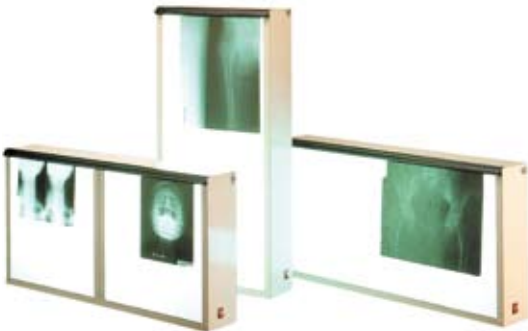Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	NEGATIVOSCOPIO orizzontale 90X60 Cassa in lamiera di acciaio stampata e verniciata a fuoco con polveri epossidiche. Reggipellicola a rulli onde evitare possibili graffiature della stessa. Diffusore originale in estruso opale, lampade di illuminazione a luce fredda uniformemente distribuita. Fori posteriori per il fissaggio a parete. Dotati di interruttore luminoso, cavo con la spina. Dimensioni: cm. 90x60.	4003
	<i>X-RAY FILM VIEWER 90X60</i> <i>Steel structure painted in epossic powder, roller film holders to avoid damging film, illuminated lamp with cold light uniformly distributed original diffuser in extruded opal wall fixing holes, appliance supplied with luminous switch with cable and plug.</i> <i>Size: 90 x 60 cm.</i>	
	Disponibile nella versione ORIZZONTALE 70x43 <i>Models available: Horizontal 70 x 43</i>	4004



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	BILANCIA PESAPERSONE CON COLONNA Bilancia pesapersona professionale a orologio con colonna. Struttura metallica e alluminio in pressofusione verniciata a polvere epossidica con pedana in gomma atossica/antiscivolo. Sistema di pesatura con leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento della bilancia. Misurazione del peso con sistema interno a leve con tirante ad asta a equilibrio non automatico. Completa di piedini antiscivolo in gomma. Dimensioni pedana: 270 x 400 x 85 mm. Dimensioni quadrante diametro 180 mm. Dimensione colonna 900 mm h. – Portata Max 150 kg. – Divisione 1000 g <i>DIAL SCALE</i> <i>Medical personal dial scale, structure completely in metal with white epossific paint with platform no toxic, no-slip rubber coated ire. Weighing system lever mechanism in cast aluminium with zinc plated steel knife edges, hand machined to guarantee a perfect, long lasting performance of the scale. With no-slip rubber feet. Platform dimension 270x400x85 mm. Pole dimension diameter 180 mm. Capacity 150 kg. Division 1000 g.</i>	4006
	BILANCIA PESAPERSONE SENZA COLONNA Bilancia pesa persone professionale a orologio. Struttura metallica e alluminio in pressofusione verniciata con polvere epossidica con pedana in gomma atossica/antiscivolo. Sistema di pesatura con leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio zincato lavorati a mano per garantire un perfetto funzionamento della bilancia. Misurazione del peso con sistema interno a leve con tirante ad asta a equilibrio non automatico. Completa di piedini antiscivolo in gomma. Dimensioni pedana: 270 x 400 x 85 mm. Dimensioni quadrante diametro 180 mm. – Portata Max 150 kg. – Divisione 1000 g <i>DIAL SCALE</i> <i>Medical personal dial scale structure completely in metal with white epossific paint with platform no toxic, no-slip rubber coated ire. Weighing system lever mechanism in cast aluminium with zinc plated steel knife edges, hand machined to guarantee a perfect, long lasting performance of the scale. With no-slip rubber feet. Platform dimension 270x400x85 mm. Pole dimension diameter 180 mm. Capacity 150 kg. Division 1000 g.</i>	4013

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	OPTIONAL PER BILANCIA PESA PERSONE Altimetro misura altezza. Divisione 5 mm. Dimensioni mm. 33x30x1600. <i>OPTIONAL FOR SCALE Height meter. Division 5 mm. Dimension 33x30x1600 mm.</i>	4009
	FILO A PIOMBO PLUMB-LINE	4007

apparecchi per trazione

traction instruments

codice/code 4028

APPARECCHIO PER TRAZIONE A PARETE

Apparecchio a parete per trazione. Con carico variabile completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi. (SENZA PESI)

Dimensioni: Lunghezza cm. 80 Altezza cm. 30
Spessore cm. 4

WALL TRACTION INSTRUMENT

Adjustable weight, complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack (WITHOUT PAINTED CAST IRON DISK).

Size: Length 80 cm. Width 30 cm. Thickness 4 cm.

codice/code 4029

APPARECCHIO MOBILE A COLONNA

Apparecchio mobile a colonna per trazione regolabile in altezza, completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi (SENZA PESI).

Dimensioni: lunghezza cm. 62 cm. Larghezza cm. 62 Altezza cm. 150/225

MOVABLE HEIGHT-ADJUSTABLE TRACTION INSTRUMENT

Movable height adjustable traction instrument complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack. (WITHOUT PAINTED CAST IRON DISK)

Size: Length 62 cm. Width 62 cm. Height 150/225 cm

codice/code 4030

APPARECCHIO SU SEDIA

Apparecchio su sedia regolabile in altezza, completo di fune, archetto per mentoniera, mentoniera in similpelle e porta dischi. (SENZA PESI).

Dimensioni: lunghezza cm. 65 Larghezza cm. 50
Altezza cm. 150/225

HEIGHT-ADJUSTABLE TRACTION INSTRUMENT WITH SEAT

Height-adjustable traction instrument with seat, complete of cord, little arch for chin, imitation leather chin strap and disk-rack. (WITHOUT PAINTED CAST IRON DISK)

Size: Length 65 cm. Width 50 cm. Height 150/225 cm

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
APPARECCHIO PER TRAZIONE A PARETE WALL TRACTION INSTRUMENT	cm 80x30x4	4028
APPARECCHIO MOBILE A COLONNA MOVABLE HEIGHT-ADJUSTABLE TRACTION INSTRUMENT	cm 62x62x150/225 h.	4029
APPARECCHIO PER TRAZIONE SU SEDIA WALL TRACTION INSTRUMENT	cm 65x50x150/225 h.	4030



Optionals	Codice / Code
MENTONIERA in cuoio. <i>LEATHER chin strap</i>	4033
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 0,5 <i>SANDBAG with metal eyelet - 0,5 Kg.</i>	4037
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 1 <i>SANDBAG with metal eyelet - 1 Kg.</i>	4038
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 2 <i>SANDBAG with metal eyelet - 2 Kg.</i>	4039
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 3 <i>SANDBAG with metal eyelet - 3 Kg.</i>	4040
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 4 <i>SANDBAG with metal eyelet - 4 Kg.</i>	4041
SACCHETTO di sabbia con occhiello da kg. 5 <i>SANDBAG with metal eyelet - 5 Kg.</i>	4042
PESI. Dischi in ghisa verniciati con foro diametro 25 - AL KG. <i>PAINTED CAST IRON DISK with hole diam. 25 - for Kg.</i>	4050

terapia arti superiori

upper limb therapy

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PANNELLO ERGOTERAPIA Pannello in legno bilaminato con nove attrezzi per l'esercizio degli arti superiori. Dimensioni: cm. 100x50 <i>ERGOTHERAPY WALL BOARD</i> <i>Wooden laminate board with nine implements for upper limb exercise.</i> <i>Size: 100x50 cm.</i>	4053
	SCALETTA IN LEGNO Per esercizio arti superiori. Dimensioni: cm. 30x60 <i>WOODEN LADDER</i> <i>Wooden ladder for upper limb exercise. Size: 30x60 cm.</i>	4054

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SPIRALE VERTICALE Per la torsione e la prono supinazione della mano e del braccio. Dimensioni: cm. 40x17x30 <i>VERTICAL SPIRAL</i> <i>For prone-supine positioning and twisting of arm and hand. Size. 40X17X30 cm.</i>	4055
	SPIRALE ORIZZONTALE Per la prono-supinazione della mano e dell'avambraccio. Dimensioni: cm. 40x17x25. <i>HORIZONTAL SPIRAL</i> <i>For prone-supine positioning and forearm and hand. Size: 40x17x25 cm.</i>	4056
	VITE SENZA FINE Per la rotazione della mano. Dimensioni: cm. 40x17x20 <i>WORM SCREW</i> <i>For hand twisting. Size: 40x17x20 cm.</i>	4057



Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MANUBRIO A FORCA Impugnatura in spugna. <i>PIE HANDGRIP</i> <i>Foam handle.</i>	4058
	PALLINE IN SPUGNA GR. 12 <i>FOAM BALLS 12 GR.</i>	4063

ruote dei lapidari lapidary's wheels

RUOTA DEI LAPIDARI A PARETE
 Struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata. Ruota regolabile in altezza. Frizione per graduare lo sforzo. Dimensioni: Altezza cm. 160 Larghezza cm. 110 Profondità cm. 30



LAPIDARY'S WHEEL
 With painted steel frame and chromium-plated sliding parts. The Wheel is adjustable in height. Provided with clutch for resistance regulation.
 Size: Height 160 cm. Width 110 cm. Depth 30 cm.

RUOTA DEI LAPIDARI A PAVIMENTO
 Struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata. Ruota regolabile in altezza. Frizione per graduare lo sforzo. La base della struttura è in acciaio verniciato con antiscivolo. Dimensioni: Base: cm. 90x60 Ingombro Altezza cm. 160 Larghezza cm. 110 Profondità cm. 66.



LAPIDARY'S WHEEL ON FLOOR
 With painted steel frame and chromium-plated sliding parts. The wheel is adjustable in height. Provided with clutch for resistance regulation. Base steel frame with anti slip.
 Size: Base: 90x60 cm. Dimensions: Height 160 cm. Width 110 cm. Depth 66 cm.

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
RUOTA DEI LAPIDARI A PARETE	Altezza cm. 160 Larghezza cm. 110 Profondità cm. 30	4052
<i>LAPIDARY'S WHEEL (WALL)</i>	<i>Height 160 cm. Width 110 cm. Depth 30 cm.</i>	

Modello / Model	Dimensioni / Size	Codice / Code
RUOTA DEI LAPIDARI A PAVIMENTO	Base: cm. 90x60 Altezza cm. 160 Larghezza cm. 110 Profondità cm. 66.	4100
<i>LAPIDARY'S WHEEL ON FLOOR</i>	<i>Base: 90x60 cm. Height 160 , Width 110, Depth 66 cm.</i>	

ercolina singola

single ercolina

ERCOLINA SINGOLA

Attrezzatura con una sola stazione a doppio rinvio a corda adatta alla terapia riabilitativa. Carico di lavoro regolabile con pesi da kg. 1 per un peso max di kg. 8. Struttura in acciaio verniciato. Dimensioni: Altezza cm. 195 Larghezza cm.30 Profondità cm. 28. SENZA PESI.

SINGLE ERCOLINA

Equipment with one pulley system, suitable for rehabilitation therapy. Adjustable working load with weights form 1 Kg. up to 8 Kg. Painted steel frame. Size: Height 195 cm. Width 30 cm. Depth 28 cm. WITHOUT CAST IRON DISK.



Disco in ghisa
Painted cast iron disk

OPTIONALS



Modello / Model	Codice / Code
ERCOLINA SINGOLA SINGLE ERCOLINA	4051

Optionals	Codice / Code
DISCO IN GHISA VERNICIATO CON FORO DIAM. 25 AL KG. Painted cast iron disk with hole diam. 25 For kg.	4050



ercolina doppia double ercolina

ERCOLINA DOPPIA

Ercolina doppia struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate. E' composta da due ercoline laterali a doppio rinvio e da un piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1M.

DIMENSIONI: Altezza cm. 185 Larghezza cm. 102 Profondità cm. 28. SENZA PESI .

DOUBLE ERCOLINA

Double ercolina painted steel frame with chromium-plated sliding parts. The equipment includes two side and central padded backrest and covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1M and washable vinyl.

Size: Height 185 cm. Width 102 cm. Depth 28 cm.

WITHOUT CAST IRON DISK.



Disco in ghisa
Painted cast iron disk

OPTIONALS

Modello / Model	Codice / Code
ERCOLINA DOPPIA DOUBLE ERCOLINA	4049

Optionals	Codice / Code
DISCO IN GHISA VERNICIATO CON FORO DIAM. 25 AL KG. Painted cast iron disk with hole diam. 25 For kg.	4050

poliercolina poliercolina

POLIERCOLINA

Ercolina doppia struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate. E' composta da due ercoline laterali a doppio rinvio e da una spalliera centrale in legno.

Dimensioni: Altezza cm. 230 Larghezza cm. 145 Profondità cm. 28. SENZA PESI.

POLIERCOLINA

Double ercolina steel frame with chromium-plated sliding parts. The equipment includes two sides and central wooden wall-bars.

SIZE: Height 230 cm. Width 145 cm. Depth 28 cm. WITHOUT CAST IRON DISK.



Disco in ghisa
Painted cast iron disk

OPTIONALS



Modello / Model	Codice / Code
POLIERCOLINA <i>Poliercolina</i>	4059

Optionals	Codice / Code
DISCO IN GHISA VERNICIATO CON FORO DIAM. 25 AL KG. <i>Painted cast iron disk with hole diam. 25 For kg.</i>	4050

spalliere e scale ortopediche

wall-bars and orthopaedic ladder

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SCALA ORTOPEDICA DRITTA in metallo e legno Con tavoletta centrale. Da fissare a parete, montanti di acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio. Dimensioni: cm. 300x100. <i>STRAINGH ORTHOPEDIC LADDER</i> <i>With central board. Wall mounted straight ladder, steel columns and wooden rungs.</i> <i>Size: 300x100 cm.</i>	4077M
	SCALA ORTOPEDICA CURVA in metallo e legno Con tavoletta centrale. Da fissare a parete, montanti di acciaio verniciato colore blu e pioli in legno di faggio. Dimensioni: cm. 300X100. <i>CURVED ORTHOPEDIC LADDER</i> <i>With central board. Wall mounted curved ladder, steel columns and wooden rungs.</i> <i>Size: 300x100 cm.</i>	4078M

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	Spalliera con MONTANTI IN ACCIAIO verniciato. Dotata di 13 pioli in legno di faggio. Dimensioni Larghezza cm. 90 – Altezza cm. 240 <i>Wall bar with upright steel supports and 13 beech rungs.</i> <i>Dimensions: Width 90 cm. - Height 240 cm.</i>	4075

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	Spalliera con MONTANTI IN ACCIAIO verniciato. Dotata di 14 pioli in legno di faggio. Dimensioni Larghezza cm. 90 – Altezza cm. 240 <i>Wall bar with upright steel supports and 14 beech rungs.</i> <i>Dimensions: Width 90 cm. - Height 240 cm.</i>	4076

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SPALLIERA AD UNA CAMPATA Struttura in legno dimensioni: cm. 250x90 <i>SINGLE WALL -BARS</i> <i>Wooden frame. Size: 250x90 cm.</i>	4079
	SPALLIERA A DUE CAMPATE Struttura in legno. Dimensioni: cm. 250x180 <i>DOUBLE WALL -BARS</i> <i>Wooden frame. Size: 250x180 cm.</i>	4080

Accessori per spalliera / accessories for wall-bars

Codice / Code

POGGIASCHIENA CURVO PER SPALLIERA

Imbottito in espanso densità 25 e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Colore NERO

CURVED BACK REST FOR WALL BARS

Padded and covered with washable vinyl with treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM. Colour: BLACK



4082

PANCA AGGANCIABILE A SPALLIERA

Piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM COLORE NERO. Completa di cinghia ferma piedi. Dimensioni: cm. 180x30

BENCH FOR WALL -BARS

With foot block strap. Padded and covered with washable vinyl with treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM. BLACK COLOUR. Size: 180x30 cm.



4083

PARTE SPORGENTE APPLICABILE A SPALLIERA

Per puleggioterapia.
Dimensioni: cm. 65x75

OUTSTANDING ACCESORY GRID

It can be combined with wall bars for pulley therapy. Size: 65x75 cm.



6171

specchi mirrors

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SPECCHIO QUADRETTATO 200X100 Specchio spessore 4 mm. dotato di pellicola retinata adesiva antinfortunistica, molto importante perché in caso di rottura dello specchio i vetri rimarranno ancorati alla pellicola stessa. Lo specchio completo di pellicola viene incollato a un pannello di polistirolo rifinito con uno di MDF bianco. Il tutto viene sostenuto da un profilo di alluminio. Disponibile fissaggio a muro o su carrello con ruote. Dimensioni: cm 200x100 - Dimensioni serigrafia: cm 10 x cm 5 <i>GRID MIRROR 200X100</i> <i>Mirror 4 mm thick, with safety film on the reverse. This safety adhesive film is very important because in case of breakage of the mirror the glass will remain anchored to the film itself. The mirror is bonded to a polystyrene panel finished with a white MDF back for added safety. Aluminium frame. Available as a wall mounted mirror or on trolley with castors.</i> <i>Dimensions: 200x100 cm - Rectangular grid 10 cm x 5 cm</i>	7000
	SPECCHIO LISCIO 200X100 Specchio spessore 4 mm. dotato di pellicola retinata adesiva antinfortunistica, molto importante perché in caso di rottura dello specchio i vetri rimarranno ancorati alla pellicola stessa. Lo specchio completo di pellicola viene incollato a un pannello di polistirolo rifinito con uno di MDF bianco. Il tutto viene sostenuto da un profilo di alluminio. Disponibile fissaggio a muro o su carrello con ruote. Dimensioni: cm 200x100 <i>PLAIN MIRROR 200X100</i> <i>Mirror 4 mm thick, with safety film on the reverse. This safety adhesive film is very important because in case of breakage of the mirror the glass will remain anchored to the film itself. The mirror is bonded to a polystyrene panel finished with a white MDF back for added safety. Aluminium frame. Available as a wall mounted mirror or on trolley with castors.</i> <i>Dimensions: 200x100 cm</i>	7001

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	SPECCHIO QUADRETTATO 170X100 Specchio spessore 4 mm. dotato di pellicola retinata adesiva antinfortunistica, molto importante perche in caso di rottura dello specchio i vetri rimarranno ancorati alla pellicola stessa. Lo specchio completo di pellicola viene incollato a un pannello di polistirolo rifinito con uno di MDF bianco. Il tutto viene sostenuto da un profilo di alluminio. Disponibile fissaggio a muro o su carrello con ruote. Dimensioni: cm 170x100 - Dimensioni serigrafia: cm 10 x cm 5	
	GRID MIRROR 170X100 <i>Mirror 4 mm thick, with safety film on the reverse. This safety adhesive film is very important because in case of breakage of the mirror the glass will remain anchored to the film itself. The mirror is bonded to a polystyrene panel finished with a white MDF back for added safety. Aluminium frame. Available as a wall mounted mirror or on trolley with castors.</i> <i>Dimensions: 170x100 cm - Rectangular grid 10 cm x 5 cm</i>	7002

Accessori per specchi / accessories for mirrors		Codice / Code
CARRELLO PORTA SPECCHI Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile per specchi dimensioni 170x100.		7003SM
TROLLEY FOR MIRROR <i>Transportable and inclinable trolley for mirror size: 170x100 cm.</i>		
CARRELLO PORTA SPECCHI Carrello per specchio trasportabile ed inclinabile per specchi dimensioni 200x100.		7003
TROLLEY FOR MIRROR <i>Transportable and inclinable trolley for mirror size: 200x100 cm.</i>		

materassi

mattress

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MATERASSO IN ESPANSO DENSITÀ 25 Materasso imbottitura in poliuretano espanso densità 25. Rivestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II antibatterico, antiacaro. COLORE BLU. Dimensioni: cm. 200x100x5 <i>MATTRESS DENSITY 25</i> <i>Plastic foam mattress density 25. PVC 600 gr/m² ant mould, antibacterial not inflammable Class II covering. COLOUR BLUE. Dimension: 200x100x5 cm.</i>	5020
	MATERASSO IN ESPANSO DENSITÀ 21 Materasso imbottitura in poliuretano espanso densità 21. Rivestito in PVC 600 gr/m² ignifugo classe II, antibatterico, antiacaro. COLORE BLU. Dimensioni: cm. 200x100x10 <i>MATTRESS DENSITY 21</i> <i>Plastic foam mattress density 21. PVC 600 gr/m² ant mould, antibacterial not inflammable Class II covering. COLOUR BLUE. Dimension: 200x100x10 cm.</i>	5021

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
-----------------	---------------------------	---------------



particolare della maniglia
handle



agglomerato
agglomerate

MATERASSO IN AGGLOMERATO DENSITÀ 80
Rivestito in materiale antimuffa antibatterico ignifugo classe II. COLORE BLU. Dimensioni: cm.
200x100x5

AGGLOMERATE MATTRES DENSITY 80
Ant mould and antibacterial, not inflammable Class II. COLOUR BLUE. Dimension:
200x100x5 cm.

5023

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MATERASSO MAT GOLD PK 14 Densità 200 a cellule chiuse. Dimensioni: cm. 200x100x3	5028
	<i>MAT GOLD PK 14</i> <i>Density 200 closed cells. Dimension: 200x100x3 cm.</i>	
	MATERASSO MAT GOLD PK 16 Densità 200 a cellule chiuse. Dimensioni: cm. 200x100x4	5029
	<i>MAT GOLD PK 16</i> <i>Density 200 closed cells. Dimension: 200x100x4 cm.</i>	
	MATERASSO MAT GOLD PK 20 Densità 200 a cellule chiuse. Dimensioni: cm. 200x100x5	5030
	<i>MAT GOLD PK 20</i> <i>Density 200 closed cells. Dimension: 200x100x5 cm.</i>	

Accessori per specchi / accessories for mirrors

CARRELLO PORTA MATERASSI

Carrello porta materassi in acciaio verniciato mobile su quattro ruote.

COLORE BLU.

Dimensioni: 200x100

TROLLEY FOR MAT

Varnished steel mat trolley, mobile on wheels.

COLOUR BLUE.

Dimension: 200x100



5031

stuoie mats

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	STUOIA PIEGHEVOLE 180X60X4 Interno in polietilene 30 Kg/m³ rivestimento in Nylon. Colore BLU <i>FOLDING MAT 180X60X4 In polyethylene 30 Kg/m³ Nylon covering. Colour: BLUE</i>	5024
	STUOIA INTERA 180X50X1 In polietilene 30 Kg/m³. Colore BLU <i>STIFF MAT SIZE 180X50X1 In polyethylene 30 Kg/m³. Colour: BLUE</i>	5025
	STUOIA PIEGHEVOLE 180X50X1 In polietilene 30 Kg/m³. Colore BLU <i>FOLDING MAT SIZE 180X50X1 In polyethylene 30 Kg/m³. Colour: BLUE</i>	5026



prodotti Airex

la linea di prodotti professionali

“Professional Exercise Line”.


Airex items: “Professional Exercise Line”


I prodotti AIREX si riconoscono dalle tipiche bande orizzontali - gli originali che da 50 anni sono leader in materia ed utilizzati nello sport, nel settore terapeutico e nei passatempi. La grande esperienza e la conoscenza come leader del settore, offrono una qualità svizzera di prim'ordine e ben percettibile nei prodotti AIREX. A ciò si aggiunge un contributo prezioso da parte di medici, fisioterapisti, specialisti del fitness, di sportivi agonisti e dalle organizzazioni sportive.

Un prodotto nettamente migliore. Le innovative schiume a cellule chiuse dei prodotti AIREX sono state sviluppate dopo anni di lavoro. Tale materiale è estremamente resistente, sostiene molto bene, è caldo, dolce ed ammortizzante. Le articolazioni, i tendini e la muscolatura possono muoversi liberamente ed efficacemente.


Everyone recognizes the AIREX mats with the typical horizontal stripes - the original for 50 years and the clear number one amongst all therapeutic, sports and leisure mats. The wide range of experience, the know-how of the market leader and the Swiss premium quality are tangibly integrated into the development of all AIREX products. Additionally, there is the valuable support from doctors, physiotherapists, fitness specialists, high-performance sportsmen and leisure sports organizations.

The innovative, close-cell foam of the AIREX mats was developed over many years of work. The extremely hard-wearing material is on the one hand supportive and on the other hand warm, soft and absorbing. Joints, tendons and muscles can thereby be trained extremely gently and efficiently.

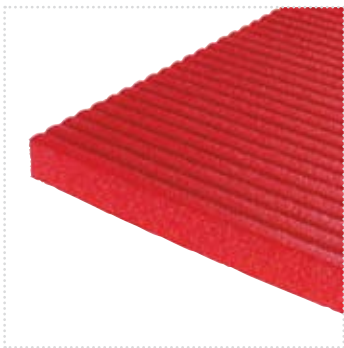Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CORONELLA BLU, ROSSO E VERDE Dimensioni: Lunghezza cm. 185 x larghezza cm. 60 x altezza cm. 1,5 – Peso Kg. 2,2. Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED. <i>CORONELLA BLUE, RED AND GREEN</i> <i>Dimension: length 185 cm. x width 60 cm. x height 1,5 cm. – Weight 2,2 Kg.</i> <i>Suitable for: FINTESS PREVENTION – PILATES YOGA – PHYSIOTHERAPY REHABILITATION – CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT – BEBALANCED</i>	5100A
	CORONA BLU, ROSSO e VERDE Dimensioni: Lunghezza cm. 185 x larghezza cm. 100 x altezza cm. 1,5 – Peso Kg. 3,8 Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED. <i>CORONA BLUE, RED AND GREEN</i> <i>Dimension: length 185 cm. x width 100 cm. x height 1,5 cm. – Weight 3,8 Kg.</i> <i>Suitable for: FINTESS PREVENTION – PILATES YOGA – PHYSIOTHERAPY REHABILITATION – CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT – BEBALANCED</i>	5101A
	ATLAS RED Dimensioni: Lunghezza cm. 200 x larghezza cm. 125 x altezza cm. 1,5 – Peso Kg. 5,5 Adatto per: FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED. <i>ATLAS RED</i> <i>Dimension: length 200 cm. x width 125 cm. x height 1,5 cm. – Weight 5,5 Kg.</i> <i>Suitable for: PHYSIOTHERAPY REHABILITATION – CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT – BEBALANCED</i>	5102A

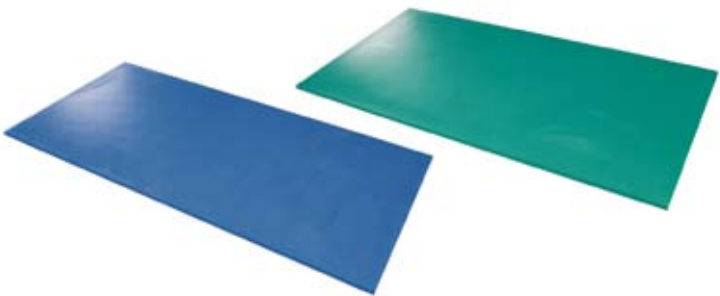Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	HERCULES BLU E VERDE Dimensioni: Lunghezza cm. 200 x larghezza cm. 100 x altezza cm. 2,5 – Peso Kg. 6,6 Adatto per: FITNESS – FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI.	5103A
	<i>HERCULES BLUE AND GREEN</i> <i>Dimension: length 200 cm. x width 100 cm. x height 2,5 cm. – Weight 6,6 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - PHYSIOTHERAPY REHABILITATION – CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT.</i>	
	FITLINE 180 Dimensioni: Lunghezza cm. 180 x larghezza cm. 58 x altezza cm. 1 – Peso Kg. 1,5 Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED	5104A
	<i>FITLINE 180</i> <i>Dimension: length 180 cm. x width 58 cm. x height 1 cm. – Weight 1,5 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - PILATES YOGA - CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT - BEBALANCED</i>	
	FITNESS 120 Dimensioni: Lunghezza cm. 120 x larghezza cm. 60 x altezza cm. 1,5 - Peso Kg. 1,4 Adatto per: FINTESS – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED	5105A
	<i>FITNESS 120</i> <i>Dimension: length 120 cm. x width 60 cm. x height 1,5 cm. – Weight 1,4 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT - BEBALANCED</i>	


Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	YOGA PILATES PURPLE Dimensioni: Lunghezza cm. 190 x larghezza cm. 60 x altezza cm. 0,8 – Peso Kg. 1,4 Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – BEBALANCED. <i>YOGA PILATES PURPLE</i> <i>Dimension: length 190 cm. x width 60 cm. x height 0,8 cm. – Weight 1,4 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - PILATES YOGA - BEBALANCED</i>	5106A
	BALANCE PAD ELITE Dimensioni: Lunghezza cm. 50 x larghezza cm. 41 x altezza cm. 6 – Peso Kg. 0,7 Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED. <i>BALANCE PAD ELITE</i> <i>Dimension: length 50 cm. x width 41 cm. x height 6 cm. – Weight 0,7 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - PILATES YOGA - PHYSIOTHERAPY REHABILITATION - CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT - BEBALANCED</i>	5108A
	BALANCE-BEAM Dimensioni: Lunghezza cm. 160 x larghezza cm. 24 x altezza cm. 6 – Peso Kg. 0,9 Adatto per: FINTESS – YOGA PILATES – FISIOTERAPIA RIABILITAZIONE – SPORT SCOLASTICI ED ASSOCIAZIONI – BEBALANCED. <i>BALANCE-BEAM</i> <i>Dimension: length 160 cm. x width 24 cm. x height 6 cm. – Weight 0,9 Kg.</i> <i>Suitable for: FITNESS PREVENTION - PILATES YOGA - PHYSIOTHERAPY REHABILITATION - CLUB SPORT AND SCHOOL SPORT - BEBALANCED</i>	5109A

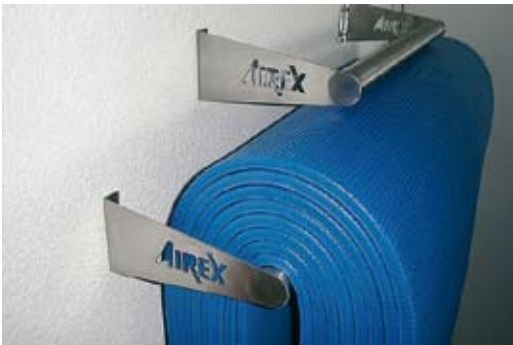Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	OCCHIELLI PER MATERASSI AIREX CORONELLA E FITNESS 120 <i>FLEXIBLE EYELET TYPE 15 FOR CORONELLA AND FITLINE 120</i>	5120A
	OCCHIELLI PER MATERASSI AIREX FITLINE 140/180 <i>FLEXIBLE EYELET TYPE 105 FOR FITLINE 140/180</i>	5121A
	SUPPORTO A PARETE PER MATERASSI AIREX CON OCCHIELLO (CORONELLA- FITNESS 120 – FITLINE 140/180) <i>WALL SUPPORT FOR AIREX MATTRESSES WITH EYELET (CORONELLA-FITNESS120-FITLINE 140/180)</i>	5130A
	SUPPORTO A PARETE PER MATERASSI AIREX SENZA OCCHIELLO (CORONELLA- FITNESS 120 – FITLINE 140/180) <i>WALL SUPPORT FOR AIREX MATTRESSES WITHOUT EYELET (CORONELLA-FITNESS120-FITLINE 140/180)</i>	5135A
	SUPPORTO A PARETE PER MATERASSI AIREX SENZA OCCHIELLO (CORONA) <i>WALL SUPPORT FOR AIREX MATTRESSES WITHOUT EYELET (CORONA)</i>	5136A

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CINTURA HYDRO-BUOY 45N Dimensioni: ca 86x38x2,5 cm. Peso Kg. 0,8 – Per persona da 40 a 70 Kg. di peso. <i>HYDRO-BUOY 45N Dimensions: aprox 86x38x2,5 cm. Weight 0,8 Kg. Form 40 to 70 kg. of weight.</i>	5150A
	CINTURA HYDRO-BUOY 50N Dimensioni: ca 96x40x2,5 cm. Peso Kg. 0,9 – Per pesi superiori ai 70 Kg. <i>HYDRO-BUOY 45N Dimensions: aprox 96x40x2,5 cm. Weight 0,9 Kg. For weights over 70 Kg.</i>	5151A
		

cuscini cushions

colori assortiti
assorted colours

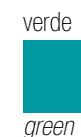

Cuscini di varie forme e dimensioni:

- Interno in espanso densità 30 ignifugo classe 1IM.
- Rivestimento in similpelle lavabile, trattamento antibatterico/antiacaro ed ignifugo classe 1IM. COLORI ASSORTITI

Cushions of various shapes and sizes:

- *plastic foam inside 30 DS flame retardant class 1IM.*
- *Covering is treatment-sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. ASSORTED COLORS*

CILINDRO / ROLL

Codice
Code



cm. 20x8	4085
cm. 35x15	4086
cm. 50x15	4087
cm 30x30	4088
cm 50x25	4089
cm. 100x25	4090
cm. 100x40	4091
cm. 60x30	4092
cm. 120x30	4093

SEMICILINDRO / HALF-ROLL

Codice
Code



cm. 30X16	5003
cm. 50x25	5004
cm. 60x30	5005

CUBO / CUBE Codice
Code



cm. 30x30x30 7005

cm. 40x40x40 5006

CUNEO / WEDGE Codice
Code



cm. 35x35x10 5007

cm. 25x25x10 5008

cm. 60x45x15 5009

cm. 60x60x15 5010

cm. 60x60x30 5011

cm. 45x45x15 5013


PARALLELEPIPEDO / RECTANGLE Codice
Code



cm. 40x20x10 5014

cm. 50x25x25 5032

TRAPEZIODALE / TRAPEZOIDAL Codice
Code

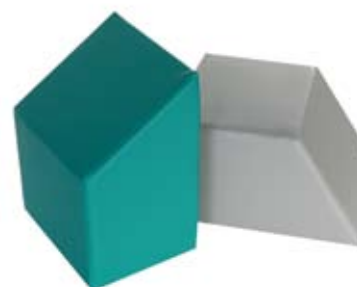

cm. 40x50x30 5015

palloni psicomotorial

psicomotorial balls

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 45. COLORE GIALLO <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 45 CM. COLOUR: YELLOW.</i>	5033
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 55. COLORE ROSSO <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 55 CM. COLOUR: RED.</i>	5034
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 65. COLORE BLU <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 65 CM. COLOUR: BLUE.</i>	5035
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 75. COLORE GIALLO <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 75 CM. COLOUR: YELLOW.</i>	5036
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 85. COLORE ROSSO <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 85 CM. COLOUR: RED.</i>	5037
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. CM. 95. COLORE BLU <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 95 CM. COLOUR: BLUE.</i>	5038
	PALLONE PSICOMOTORIAL DIAM. 120 CM. COLORE ROSSO <i>PSICOMOTORIAL BALL DIAM. 120 CM. COLOUR: RED.</i>	5039

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	THERASENSORY DIAM. CM. 100 COLORE ROSSO <i>THERASENSORY DIAM. 100 CM. COLOUR RED</i>	5405L
	THERASENSORY DIAM. CM. 65 COLORE VERDE <i>THERASENSORY DIAM. 65 CM. COLOUR GREEN</i>	5406L
	GYMNIC CLASSIC PLUS BRQ. rappresentano la nuova generazione di palloni utilizzati nel settore riabilitativo, sportivo e del fitness in quanto appositamente studiati per prestazioni ad alto livello e per soddisfare le esigenze più sofisticate. Portata massima kg. 120 <i>GYMNIC CLASSIC PLUS BRQ is the new generation of the popular therapy and fitness ball specifically designed for high risk patients or high performance workouts. Weight load 120 Kg.</i>	
	DIAMETRO CM. 55. COLORE ROSSO <i>DIAMETER 55 CM. COLOUR: RED</i>	5410L
	DIAMETRO CM. 65. COLORE BLU <i>DIAMETER 65 CM. COLOUR: BLUE</i>	5411L
	DIAMETRO CM. 75. COLORE GIALLO <i>DIAMETER 75 CM. COLOUR: YELLOW</i>	5412L

Accessori per palloni / accessories for balls

Codice / Code

BALL RACK

Carrello porta palle mediche, palle ritmiche e palle da diametro cm. 7,5 a diametro cm. 23.
Dimensioni carrello: Lunghezza cm. 150 x larghezza cm. 90 x Altezza cm. 47

BALL RACK

For medic balls, ritmic balls and balls of diameter from 7,5 cm. to 23 cm.
Size: 150x90x47 cm.



5900L

BALL SUPPORT S DIAMETRO CM. 47

Supporto per palloni psicomotorial da diametro cm. 45 a diametro cm. 55.

BALL SUPPORT S DIAMETER 47 CM.

For ball of diameter 45 cm. and diameter 55 cm.



5901L

BALL SUPPORT M DIAMETRO CM. 60

Supporto per palloni psicomotorial da diametro cm. 65 a diametro cm. 75.

BALL SUPPORT M DIAMETER 60 CM.

For ball of diameter 65 cm. and diameter 75 cm.



5902L

POWER PUMP

POWER PUMP



5904L

palloni soft soft balls

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLONE DA CALCIO IN GOMMAPIUMA DIAM. CM. 20 <i>FOAM SOCCER BALL DIAM. 20 CM.</i>	4070
	SOFTGYM DIAM. MAX CM. 25 Colori: assortiti. (rosso, giallo e blu) <i>SOFTGYM MAX DIAM. 25 CM. Assorted colours: red, yellow blue</i> 	5407L

palle mediche

medic balls

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLA MEDICA DA KG. 0,5 COLORE VERDE DIAMETRO CM. 10 <i>MEDIC BALL 0,5 KG. COLOUR GREEN DIAMETER 10 CM.</i>	6081
	PALLA MEDICA DA KG. 1 COLORE ROSSO DIAMETRO CM. 12 <i>MEDIC BALL 1 KG. COLOUR RED DIAMETER 12 CM.</i>	6080
	PALLA MEDICA DA KG. 2 COLORE GIALLO DIAMETRO CM. 15 <i>MEDIC BALL 2 KG. COLOUR YELLOW DIAMETER 15 CM.</i>	5040
	PALLA MEDICA DA KG. 3 COLORE BLU DIAMETRO CM. 17 <i>MEDIC BALL 2 KG. COLOUR BLUE DIAMETER 17 CM.</i>	5041
	PALLA MEDICA DA KG. 4 COLORE VIOLA DIAMETRO CM. 20 <i>MEDIC BALL 4 KG. COLOUR PURPLE DIAMETER 20 CM.</i>	5042
	PALLA MEDICA DA KG. 5 COLORE ARANCIONE DIAMETRO CM. 23 <i>MEDIC BALL 5 KG. COLOUR ORANGE DIAMETER 23 CM.</i>	5043

palle per ritmica

rhythmic balls

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLA PER RITMICA GR. 280 DIAMETRO MAX CM. 17. COLORI ASSORTITI (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) <i>RHYTHMIC BALL GR. 280 DIAMETER MAX CM. 17 ASSORTED COLOURS (RED, YELLOW, BLUE, GREEN)</i>	5044
	PALLA PER RITMICA GR. 400 DIAMETRO MAX CM. 18 COLORI ASSORTITI (ROSSO, GIALLO, BLU, VERDE) <i>RHYTHMIC BALL GR. 400 DIAMETER MAX CM. 18 ASSORTED COLOURS (RED, YELLOW, BLUE, GREEN)</i>	5045

altri articoli per fisioterapia e riabilitazione items for physiotherapy and rehabilitation


Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PHYSIO ROLL DIAMETRO CM. 30 LUNGHEZZA CM. 50 COLORE BLU	5400L
	<i>PHYSIO ROLL DIMETER 30 CM. LENGTH 50 CM. COLOUR BLUE</i>	
	PHYSIO ROLL DIAMETRO CM. 40 LUNGHEZZA CM. 65 COLORE ROSSO	5401L
	<i>PHYSIO ROLL DIAMETER 40 CM. LENGTH 65 CM. COLOUR RED</i>	
	PHYSIO ROLL DIAMETRO CM. 55 LUNGHEZZA CM. 90 COLORE GIALLO	5402L
	<i>PHYSIO ROLL DIAMETER 55 CM. LENGTH 90 CM. COLOUR YELLOW</i>	
	PHYSIO ROLL DIMETRO CM. 70 LUNGHEZZA CM. 115 COLORE BLU	5403L
	<i>PHYSIO ROLL DIAMETER 70 CM. LENGTH 115 CM. COLOUR BLUE</i>	
	PHYSIO ROLL DIAMETRO CM. 85 LUNGHEZZA CM. 130 COLORE ROSSO	5404L
	<i>PHYSIO ROLL DIAMETER 85 CM. LENGTH 130 CM. COLOUR RED</i>	

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MOVIN'SIT COLORE BLU – DIMENSIONI CM. 36X36 <i>MOVIN'SIT COLOUR BLUE – SIZE 36X36 CM.</i>	5408L
	MOVIN'STEP COLORE VIOLA – DIMENSIONI CM. 35X35 <i>MOVIN'STEP COLOUR PURPLE – SIZE 35X35 CM.</i>	5409L

palle riccio massageball reflex

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLA RICCIO GR. 85 DIAMETRO CM. 8 (SET 2 PZ) - Colore verde. <i>MASSAGEBALL REFLEX gr. 85 diameter 8 cm. (set 2 pcs) - Colour: green.</i>	2210T
	PALLA RICCIO GR. 120 DIAMETRO CM. 9 (SET 2 PZ) – Colore blu <i>MASSAGEBALL REFLEX gr. 120 Diameter 9 cm. (set 2 pcs) – Colour Blue.</i>	2211T
	PALLA RICCIO GR. 150 DIAMETRO CM. 10 (SET 2 PZ) – Colore verde. <i>MASSAGEBALL REFLEX gr. 150 Diameter 10 cm. (set 2 pcs) – Colour green.</i>	2212T

rullo per massaggi activ roll

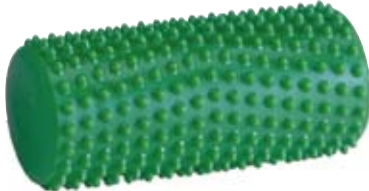Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	RULLO PER MASSAGGIO Lunghezza cm. 15 colore verde. <i>ACTIV ROLL</i> <i>Length 15 cm. Colour green.</i>	2225T

palla sensoriale sensyball

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PALLA SENSORIALE SENSYBALL Peso gr. 70 - Diametro cm. 10 - Set da due pezzi - Colore giallo	9750T
	<i>SENSYBALL</i> <i>Weight 70 gr. Diameter 10 cm. Set 2 pcs. Colour Yellow.</i>	
	PALLA SENSORIALE SENSYBALL Peso gr. 330 - Diametro cm. 20 - Colore giallo	9751T
	<i>SENSYBALL</i> <i>Weight 330 gr. - Diameter 20 cm. - Colour Yellow.</i>	
	PALLA SENSORIALE SENSYBALL Peso gr. 400 - Diametro cm. 28 - Colore giallo	9752T
	<i>SENSYBALL</i> <i>Weight 400 gr. - Diameter 28 cm. - Colour Yellow.</i>	

cuscino palla disc'o' sit disc'o sit

Modello / Model

Descrizione / Description

Codice / Code



CUSCINO PALLA DISC'O' SIT
Diametro cm. 39 - Colore blu.

DISC'O SIT
Diameter 39 cm. - Color blue.

21332T



FEDERA PER CUSCINO PALLA DISC'O' SIT
Colore BLU

COVER DISC'O' SIT
Colour: blue

9927T

bastoni e accessori

sticks and accessories

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 70 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 70 CM.</i>	5056
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 80 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 80 CM.</i>	5057
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 90 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 90 CM.</i>	5058
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 100 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 100 CM.</i>	5059
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 120 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 120 CM.</i>	5060
	BASTONE IN LEGNO DIAMETRO CM. 2,4 LUNGHEZZA CM. 150 <i>WOODEN STICK 2,4 CM. LENGTH 150 CM.</i>	5061
	BASTONE IN PVC LUNGHEZZA CM. 100 IN CONFEZIONE DA 4 PEZZI COLORI ASSORTITI <i>PVC STICK – LENGTH 100 CM. SET 4 PCS ASSORTED COLOUR</i>	5070
	PORTABASTONI Mensola in acciaio verniciato colore blu porta bastoni da fissare a parete. Dimensioni: Lunghezza cm. 50 x larghezza cm. 35 altezza cm. 35 <i>RACK FOR GYMNASTIC STICKS CODE 5080</i> <i>Varnished steel wall rack for gymnastic sticks.</i> <i>Size. Length 50 cm. Width 35 cm. Height 35 cm.</i>	5080

clave

indian claves

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CLAVE IN LEGNO PICCOLE da mm. 310 x 56 <i>SMALL INDIAN CLAVE from 310x56 mm.</i>	5083
	CLAVE IN LEGNO MEDIE da mm. 350 x 56 <i>MEDIUM INDIAN CLAVE from mm. 350 x 56</i>	5084
	CLAVE IN LEGNO GRANDI da mm. 390 x 56 <i>BIG INDIAN CLAVE from mm. 390 x 56</i>	5085
	CLAVE IN LEGNO MEDIE COLORATE da mm. 350 x 56 <i>MEDIUM INDIAN CLAVE COLOURED from mm. 350 x 56</i>	5086
	CLAVE IN NYLON COLORATE LUNGHEZZA CM. 45 <i>NYLON INDIAN CLAVE 45 cm. long.</i>	5087

cerchi hoops

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CERCHIO IN NYLON SEZIONE PIATTA DA CM. 60 <i>NYLON HOOP, FLAT SECTION 60 CM.</i>	5075
	CERCHIO IN NYLON SEZIONE PIATTA DA CM. 70 <i>NYLON HOOP, FLAT SECTION 70 CM.</i>	5076
	CERCHIO IN NYLON SEZIONE PIATTA DA CM. 80 <i>NYLON HOOP, FLAT SECTION 80 CM.</i>	5077

polsiere e cavigliere

ankle bands

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	POLSIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 1 (Kg. 0,5 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 1 KG. (Kg. 0,5 Cad.)</i>	6060
	POLSIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 2 (Kg. 1 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 2 KG. (Kg. 1 Cad.)</i>	6061
	POLSIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 3 (Kg. 1,5 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 3 KG. (Kg. 1,5 cad.)</i>	6062
	POLSIERE - CAVIGLIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 4 (Kg. 2 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 4 KG. (Kg. 2 cad.)</i>	6063
	POLSIERE - CAVIGLIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 5 (Kg. 2,5 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 5 KG. (Kg. 2,5 cad.)</i>	6064
	POLSIERE – CAVIGLIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 6 (Kg. 3 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 6 KG. (Kg. 3 cad.)</i>	6065
	POLSIERE - CAVIGLIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 7 (Kg. 3,5 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 7 KG. (Kg. 3,5 cad.)</i>	6066
	POLSIERE - CAVIGLIERE A FASCIA IN SIMILPELLE DA KG. 8 (Kg. 4 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER FROM 8 KG. (Kg. 4 cad.)</i>	6067

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	POLSIERE - CAVIGLIERE A PESI ESTRAIBILI IN SIMILPELLE DA KG. 2 (KG. 1 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER EXTRACTABLE WEIGHTS FROM 2 KG. (KG 1 cad.)</i>	6068
	POLSIERE - CAVIGLIERE A PESI ESTRAIBILI IN SIMILPELLE DA KG. 3,2 (KG. 1,6 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER EXTRACTABLE WEIGHTS FROM 3,2 KG. (KG 1,6 cad.)</i>	6069
	POLSIERE – CAVIGLIERE A PESI ESTRAIBILI IN SIMILPELLE DA KG. 4,2 (KG. 2,15 cad.) <i>ANKLE BANDS IN IMITATION LEATHER EXTRACTABLE WEIGHTS FROM 4,2 KG. (KG 2,15 cad.)</i>	6070

sport - ginnastica

sport - gymnastics


Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MINI TRAMPOLINO: diametro cm. 90 altezza cm. 20. <i>MINI TRAMPOLINE: round shape diameter 90 cm. height 20 cm.</i>	5081
	FUNICELLA PER SALTELLI con manopole e ingrossamento centrale <i>SKIPPING ROPE with handgrips and central thickening</i>	5091
	FUNICELLA PIOMBATA colori assortiti <i>SKIPPING ROPE with counterbalance</i>	5093

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	TAMBURELLO per ritmica diametro cm. 30 <i>TAMBOURINES for callisthenics diameter 30 cm.</i>	5047
	CARRELLO PORTA ATTREZZI a tre ripiani in legno massiccio con ruote. Dimensioni del carrello: cm. 91,5x68x 95 h. <i>TROLLEY FOR TOOLS. Three shelves, wooden frame, with wheels.</i> <i>Size: 91,5x68x95 cm.</i>	5054




Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	KIT PER CARRELLO PORTA ATTREZZI (<u>carrello escluso</u>) composto da:	
	NR. 01 bastone in legno lunghezza cm. 70. NR. 01 bastone in legno lunghezza cm. 80. NR. 01 bastone in legno lunghezza cm. 90. NR. 01 confezione di bastoni in PVC lunghezza cm. 100. NR. 04 coni forati con tre fori e 4 scanalature altezza cm. 30. NR. 02 PAIO di clave in legno piccole. NR. 01 PAIO di appoggi medi. NR. 01 PAIO di appoggi piccoli. NR. 01 PAIO di ceppi. NR. 02 cerchi in nylon sezione piatta da cm. 60. NR. 02 cerchi in nylon sezione piatta da cm. 70. NR. 02 cerchi in nylon sezione piatta da cm. 80. NR. 04 funicelle con manopole e ingrossamento centrale. NR. 04 funicelle piombate colori assortiti. NR. 04 palle per ritmica da gr. 320. Colori assortiti. NR. 01 palla medica da kg. 2 NR. 01 PAIO di cavigliere-polsiere da kg. 1 (Kg. 0,5 cad.). NR. 02 sacchetti di calpestio in sabbia. NR. 02 sacchetti di calpestio in granuli di PVC. NR. 02 elastici a banda colore verde (medio) dimensioni cm. 120x14,5. NR. 01 Cuscino cilindro dimensioni cm. 35x15. NR. 01 Cuscino cilindro dimensioni cm. 50x25	5055

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	<i>KIT FOR TROLLEY TOOLS (trolley excluded) compete of:</i> No. 01 wooden sticks size 70 cm. No. 01 wooden sticks size 80 cm. No. 01 wooden sticks size 90 cm. No. 01 packing of PVC sticks size 100 cm. No. 04 cones with hole and grooves No. 02 pair of little wooden Indian claves No. 01 pair medium supports No. 01 pair small supports No. 01 pair stocks No. 02 nylon hoops flat section from 60 cm. No. 02 nylon hoops flat section from 70 cm. No. 02 nylon hoops flat section from 80 cm. No. 04 skipping ropes with handgrips and central thickening No. 04 skipping ropes with counterbalance No. 04 balls for callisthenics from 320 gr. Various colours. No. 01 medic ball from 2 kg. No. 01 pair ankle band form 1 Kg. No. 02 motor training sandbag No. 02 motor training bag with PVC grains No. 02 green medium rep band size 120x14,5 cm. No. 01 roll cushion size 35x15 cm. No. 01 roll cushion size 50x25 cm.	5055

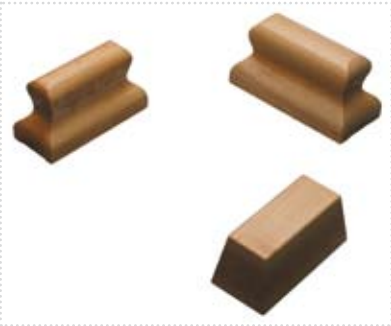Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	CONO FORATO con tre fori e quattro scanalature altezza cm. 30 <i>PERFORATED CONE with three grooves, and four holes height 30 cm.</i>	5048
	APPOGGI BAUMANN MEDI in legno dimensioni mm. 168x92x65 <i>MEDIUM SUPPORTS wooden frame. Size 168x92x65 mm.</i>	5072
	APPOGGI BAUMANN PICCOLI in legno dimensioni mm. 150x88x65 <i>SMALL SUPPORTS wooden frame. Size 150x88x65 mm. 3</i>	5073
	CEPPI BAUMANN in legno mm. 140x65x65 <i>STOCKS wooden frame. Size. 140x65x65 mm.</i>	5074
	DISCHI IN LEGNO COLORATI Diametro mm. 60x30 <i>Wooden frame disk. Colour assorted.</i> <i>Diameter: 60x30 mm.</i>	5078
	BOCCE SFERE IN LEGNO COLORATE CONFEZIONE DA 4 PEZZI <i>Wooden frame ball. Colour assorted. Set of 4 pcs.</i>	5079

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	MAGIC CIRCLE diametro cm. 38. Colore nero. <i>MAGIC CIRCLE diameter 38 cm. Colour: black.</i>	5500L
	CORE BALANCE diametro cm. 40. Altezza cm. 25. Colore verde. Inclusa base di colore nero. <i>CORE BALANCE diameter 40 cm. height 25 cm. Colour: green with black base included.</i>	5501L
		

elastici a banda e tubing elastic bands

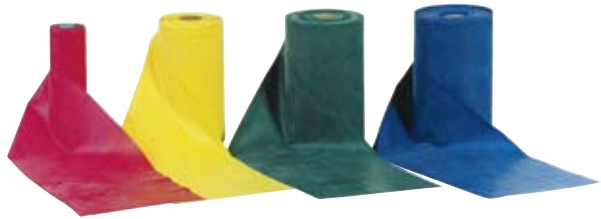Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	ELASTICO A BANDA GIALLO EXTRA LEGGERO Dimensioni: lunghezza cm. 120 - altezza cm. 14,5 <i>YELLOW REP BAND EXTRA SOFT</i> <i>Dimension: length 120 cm. - height 14,5 cm.</i>	1720M
	Disponibile nella versione: rotolo lunghezza 25 m. - altezza cm. 14,5 <i>Models available: roll length 25 Mt. - height 14,5 cm.</i>	1725M
	ELASTICO A BANDA COLORE ROSSO LEGGERO Dimensioni: lunghezza cm. 120 - altezza cm. 14,5 <i>RED REP BAND SOFT</i> <i>Dimension: length 120 cm. - height 14,5 cm.</i>	1721M
	Disponibile nella versione: lunghezza MT 25 altezza cm. 14,5 <i>Models available: roll length 25 Mt. - height 14,5 cm.</i>	1726M

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	ELASTICO A BANDA COLORE VERDE MEDIO Dimensioni: lunghezza cm. 120 - altezza cm. 14,5 <i>GREEN REP BAND MEDIUM</i> <i>Dimension: length 120 cm. - height 14,5 cm.</i>	1722M
	Disponibile nella versione: lunghezza m. 25 - altezza cm. 14,5 <i>Models available: roll length 25 Mt. - height 14,5 cm.</i>	1727M
	ELASTICO A BANDA COLORE BLU FORTE Dimensioni: lunghezza cm. 120 - altezza cm. 14,5 <i>BLUE REP BAND RESISTANT</i> <i>Dimension: length 120 cm. - height 14,5 cm.</i>	1723M
	Disponibile nella versione: lunghezza m. 25 - altezza cm. 14,5 <i>Models available: roll length 25 Mt. - height 14,5 cm.</i>	1728M
	ELASTICO TUBING CON MANIGLIE ROSSO (LEGGERO) Dimensioni: cm. 8x10 <i>RED REP TUBING WITH HANDLE (SOFT)</i> <i>Dimension: 8x10 cm.</i>	1710M
	Disponibile nella versione: rotolo da 10 m. SENZA MANIGLIE. <i>Model available: roll length 10 Mt. WITHOUT HANDLE.</i>	1714M

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	ELASTICO TUBING CON MANIGLIE GIALLO (MEDIO) Dimensioni: cm. 8x10 <i>YELLOW REP TUBING WITH HANDLE (MEDIUM)</i> <i>Dimension: 8x10 cm.</i>	1711M
	Disponibile nella versione: rotolo da 10 m. SENZA MANIGLIE. <i>Model available: roll length 10 Mt. WITHOUT HANDLE.</i>	1715M
		ELASTICO TUBING CON MANIGLIE VIOLA/BLU (FORTE) Dimensioni: cm. 8x10 <i>BLUE/PURPLE REP TUBING WITH HANDLE (RESISTANT)</i> <i>Dimension: 8x10 cm.</i>
Disponibile nella versione: rotolo da 10 m. SENZA MANIGLIE. <i>Model available: roll length 10 Mt. WITHOUT HANDLE.</i>		1716M
	MANIGLIE PER ELASTICI TUBING <i>REP TUBING HANDLE</i>	1713M

manubri e accessori dumbbells

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	Manubri in ghisa ricoperti in vinile da kg. 1 <i>PVC covered cast iron dumbbells from 1 kg.</i>	6006
	Manubri in ghisa ricoperti in vinile da kg. 2 <i>PVC covered cast iron dumbbells from 2 kg.</i>	6007
	Manubri in ghisa ricoperti in vinile da kg. 3 <i>PVC covered cast iron dumbbells from 3 kg.</i>	6008
	Manubri in ghisa ricoperti in vinile da kg. 4 <i>PVC covered cast iron dumbbells from 4 kg.</i>	6009
	Manubri in ghisa ricoperti in vinile da kg. 5 <i>PVC covered cast iron dumbbells from 5 kg.</i>	6010
	RASTRELLIERA PORTA MANUBRI <i>DUMBBELLS SUPPORT</i>	6011

giochi per bambini

children's games

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
 	ROCK'N RODY Dai 3 anni colori assortiti rosso o giallo completo di pedana. <i>ROCK'N RODY</i> From 3 years. Colour assorted red or yellow with base.	5800L
 	DISC'O' BOCCE Disco bocce soffice Diametro cm. 9,5. Colori assortiti. Set da 9 pezzi. <i>DISC'O BOCCE</i> Soft disk diameter 9,5 cm. Colour assorted. Set from 9 pcs.	5801L
 	EDUC'O DISKS Diametro cm. 21. Set da 12 pezzi 3 rossi, 3 gialli, 3 blu e 3 verdi. Incluse etichette da apporre composte da: 3 mani destre, 3 mani sinistre, 3 piedi destri, 3 piedi sinistri e 3 frecce direzionali. <i>EDUC'O DISKS</i> Diameter 21 cm. Set of 12 pcs 3 red, 3 yellow, 3 blue, 3 green. Stickers included: No. 3 right hands and No. 3 left hands, No. 3 right feet and No. 3 left feet, No. 3 arrows.	5802L

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
 	MULTIACTIV STONE Diametro cm. 16 - altezza cm. 8. Set da 6 pezzi colori: rosso, blu, giallo, verde, arancio e violetta. ** ATTENZIONE BASTONI NON INCLUSI** <i>MULTIACTIV STONE</i> <i>Diameter 16 cm. H. 8 cm. Set pcs 6 colour: red, blue, yellow, green, orange and violet.</i> <i>** ATTENTION STICKS NOT INCLUDED**</i>	5803L
	MULTIFORM SET Multiforme in materiale soffice. Set di 16 pezzi colori assortiti. <i>MULTIFORM SET</i> <i>Soft forms set pcs 16 in box carton. Colour assorted.</i>	5804L



panche spogliatoio


locker room benches

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PANCA SOLO SEDUTA DA MT. 1 Panchina spogliatoio semplice, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: lunghezza cm. 100 x larghezza cm. 35 x altezza cm. 45. <i>LOCKER ROOM BENCH FROM 1 MT.</i> <i>Locker room bench, varnished steel structure planks.</i> <i>Size: Length 100 cm. Width 35 cm. Height 45 cm.</i>	6018
	PANCA SOLO SEDUTA DA MT. 2 Panchina spogliatoio semplice, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: cm. Lunghezza cm. 200 x larghezza cm. 35 x altezza cm. 45. <i>LOCKER ROOM BENCH FROM 2 MT.</i> <i>Locker room bench, varnished steel structure planks.</i> <i>Size: Length 200 cm. Width 35 cm. Height 45 cm.</i>	6020
	PANCA CON SCHIENALE DA MT. 1 Panchina spogliatoio con schienale, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: lunghezza cm. 100 x larghezza cm. 40 x altezza cm. 85. <i>LOCKER ROOM BENCH WITH BACKREST FROM 1 MT.</i> <i>Locker room bench with backrest, varnished steel structure and wooden planks.</i> <i>Size: Length 100 cm. Width 40 cm. Height 85 cm.</i>	6021

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	PANCA CON SCHIENALE DA MT. 2 Panchina spogliatoio con schienale, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: lunghezza cm. 200 x larghezza cm. 40 x altezza cm. 85. <i>LOCKER ROOM BENCH WITH BACKREST FROM 2 MT. Locker room bench with backrest, varnished steel structure and wooden planks. Size: Length 200 cm. Width 40 cm. Height 85 cm.</i>	6023
	PANCA COMPLETA DA MT. 1 Panchina spogliatoio completa, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: lunghezza cm. 100 x larghezza cm. 40 x altezza cm. 180. <i>COMPLETE LOCKER ROOM BENCH FROM 1 MT. Complete locker room bench, varnished steel structure and wooden planks. Size: Length 100 cm. Width 40 cm. Height 180 cm.</i>	6027
	PANCA COMPLETA DA MT. 2 Panchina spogliatoio completa, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno. Dimensioni: lunghezza cm. 200 x larghezza cm. 40 x altezza cm. 180. <i>COMPLETE LOCKER ROOM BENCH FROM 2 MT. Complete locker room bench, varnished steel structure and wooden planks. Size: Length 200 cm. Width 40 cm. Height 180 cm.</i>	6029

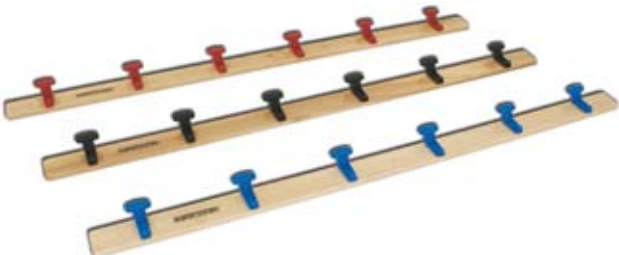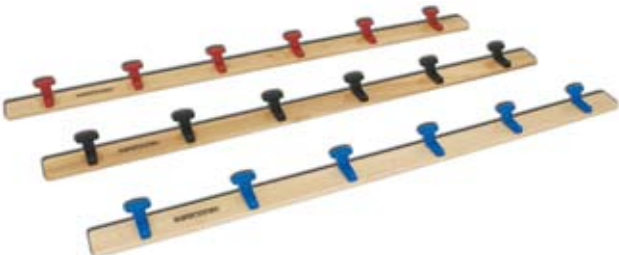

Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	APPENDIABITI A PARETE CON PORTABORSE DA MT. 1 Attaccapanni con porta borse da fissare a parete, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno lunghezza cm. 100 con 3 grucce in nylon.	6030
	<i>WALLED CLOTHES-HOOK WITH BAGS-RACK 1 MT. LONG</i> <i>Clothes hanger rail with bags support to be fixed to the wall, varnished steel structure and wooden planks, length 1 mt. with 3 nylon hangers.</i>	
	APPENDIABITI A PARETE CON PORTABORSE DA MT. 2 Attaccapanni con porta borse da fissare a parete, struttura in acciaio verniciato e listoni di legno lunghezza cm. 200 con 6 grucce in nylon.	6032
	<i>WALLED CLOTHES-HOOK WITH BAGS-RACK 2 MT. LONG</i> <i>Clothes hanger rail with bags support to be fixed to the wall, varnished steel structure and wooden planks, length 2 mt. with 6 nylon hangers.</i>	
	APPENDIABITI A TAVOLETTA DA MT. 1 Tavola attaccapanni di legno da fissare a parete lunghezza cm. 100 con 3 grucce di nylon.	6033
	<i>BOARD CLOTHES-STAND 1 MT. LONG</i> <i>Wooden clothes hanger rail to be fixed to the wall, length 100 cm. with 3 nylon hangers.</i>	

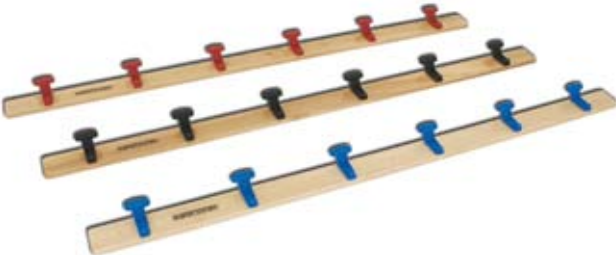Modello / Model	Descrizione / Description	Codice / Code
	APPENDIABITI A TAVOLETTA DA MT. 2 Tavola attaccapanni di legno da fissare a parete lunghezza cm. 200 con 6 grucce di nylon. <i>BOARD CLOTHES-STAND 2 MT. LONG</i> <i>Wooden clothes hanger rail to be fixed to the wall, length 200 cm. with 6 nylon hangers.</i>	6035
	PEDANA APPOGGIAPIEDI DA MT. 1 Pedana appoggiapiedi in legno con piedini gommati. Lunghezza cm. 100 <i>WOODEN FOOTREST 1 MT. LONG.</i> <i>Wooden footrest with rubber feet. Length 100 cm.</i>	6036
	PEDANA APPOGGIAPIEDI DA MT. 2 Pedana appoggiapiedi in legno con piedini gommati. Lunghezza cm. 200 <i>WOODEN FOOTREST 2 MT. LONG.</i> <i>Wooden footrest with rubber feet. Length 200 cm.</i>	6038

home fitness

CYCLETTE MAGNETICA PER HOME FITNESS / CYCLETTE MAGNETIC FOR HOME FITNESS

Codice / Code: JKF1755



Sistema frenante	Magnetico
Regolazione inerzia	8 livelli di resistenza
Volano	7 Kg.
Schermo	1 finestra lcd
Visualizzazione	Tempo/velocità/distanza/ pulsazioni/calorie/bmr/ bmi/fat.
Programmi	No
Rilevazione pulsazioni	Hand grip
Fascia cardio	No
Manubrio	Ergonomico, impugnature multiple, regolabile
Sella	Ad alto assorbimento, regolazione orizzontale e verticale
Portata max utilizzatore	120 Kg.
Peso netto	32 Kg.
Peso lordo	34 Kg.
Dimensioni	94x48x142 cm. (LxWxH)
Dimensioni imballo	92x26x61 cm. (LxWxH)
Ruote trasporto	Si
Certificazioni	CE, ROHS, EN957

<i>Resistance System</i>	<i>magnetic</i>
<i>Tension Levels</i>	<i>8 levels manual tension</i>
<i>Flywheel</i>	<i>7 kg</i>
<i>Display</i>	<i>LCD</i>
<i>Functions</i>	<i>time, speed, distance, calories, pulse, BMR, BMI, FAT%</i>
<i>Programs</i>	<i>no</i>
<i>Heart Rate Monitoring</i>	<i>hand pulse</i>
<i>Heart Rate Chest Belt</i>	<i>no</i>
<i>Handlebar</i>	<i>ergonomic</i>
<i>Seat</i>	<i>horizontally and vertically adjustable</i>
<i>Maximum User Weight</i>	<i>120 kg</i>
<i>Net Weight</i>	<i>32 kg</i>
<i>Gross Weight</i>	<i>34 kg</i>
<i>Set-Up Sizes</i>	<i>94 x 48 x 142 cm (LxWxH)</i>
<i>Package Dimensions</i>	<i>92 x 26 x 61 cm (LxWxH)</i>
<i>Transportation Wheels</i>	<i>yes</i>
<i>Certifications</i>	<i>CE, ROHS, EN957</i>

CYCLETTE PER HOME FITNESS PERFORMA 1900 / CYCLETTE FOR HOME FITNESS PERFORMA 1900
Codice / Code: JKF1900


Sistema frenante	elettromagnetico
Regolazione inerzia	16 livelli di resistenza gestita elettronicamente
Volano	8 kg
Schermo	1 finestra lcd retroilluminata blu
Visualizzazione	tempo / velocità / distanza / pulsazioni / calorie / rpm / temperatura ambiente / programma / livello sforzo / watt
Programmi	- manuale - 12 preimpostati (16 livelli) - 5 HRC : HRC1 fino al 55% della frequenza teorica massima, HRC2 fino al 65% ftn, HRC3 fino al 75% ftn, HRC4 fino al 85% ftn, THR frequenza impostabile dall'utente - 1 watt costanti - 4 personalizzabili e memorizzabili - body fat
Rilevazione pulsazioni	hand grip
Fascia cardio	no
Manubrio	ergonomico, impugnature multiple, regolabile
Sella	compressione graduata, regolabile orizzontalmente e verticalmente
Portata max utente	120 kg
Peso netto	28 kg
Peso lordo	33 kg
Dimensioni	99 x 52 x 132 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	106 x 28 x 66 cm (LxWxH)
Ruote trasporto	si
Certificazioni	CE, ROHS, EN957

<i>Resistance System</i>	<i>Electromagnetic</i>
<i>Tension Levels</i>	<i>16 levels</i>
<i>Flywheel</i>	<i>8 kg</i>
<i>Display</i>	<i>LCD window with blue backlight</i>
<i>Functions</i>	<i>time, speed, distance, calories, pulse, rpm, temperature, program, tension level, Watt</i>
<i>Programs</i>	<i>1 manual - 12 pre-set - 4 customer - 5 HRC (55%, 65%, 75%, 85%, THR) 1 Watt control - 1 body fat</i>
<i>Heart Rate Monitoring</i>	<i>hand pulse</i>
<i>Heart Rate Chest Belt</i>	<i>no</i>
<i>Handlebar</i>	<i>adjustable, ergonomic</i>
<i>Seat</i>	<i>horizontally and vertically adjustable</i>
<i>Maximum User Weight</i>	<i>120 kg</i>
<i>Net Weight</i>	<i>28 kg</i>
<i>Gross Weight</i>	<i>33 kg</i>
<i>Set-Up Sizes</i>	<i>99 x 52 x 132 cm (LxWxH)</i>
<i>Package Dimensions</i>	<i>106 x 28 x 66 cm (LxWxH)</i>
<i>Transportation Wheels</i>	<i>yes</i>
<i>Certifications</i>	<i>CE, ROHS, EN957</i>

CYCLETTE ORIZZONTALE PER HOME FITNESS PERFORMA 2600 / CYCLETTE FOR HOME FITNESS PERFORMA 2600

Codice / Code: JKF2600



Sistema frenante	magnetico
Regolazione inerzia	8 livelli di resistenza manuale
Volano	6 kg
Schermo	1 finestra lcd
Visualizzazione	tempo / velocità / distanza / pulsazioni / calorie / recovery
Programmi	no
Rilevazione pulsazioni	hand grip
Fascia cardio	no
Manubrio	ergonomico, antiscivolo
Sedile	alto assorbimento, schienale ergonomico e traspirante, regolabile orizzontalmente
Portata max utente	130 kg
Peso netto	38 kg
Peso lordo	42 kg
Dimensioni	142 x 60,5 x 113 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	137,5 x 30 x 58 cm (LxWxH)
Ruote trasporto	si
Certificazioni	CE, ROHS

Resistance System	magnetic
Tension Levels	8 levels manual tension
Flywheel	6 kg
Display	1 LCD window
Functions	time, speed, distance, calories, pulse, recovery
Programs	no
Heart Rate Monitoring	hand pulse
Heart Rate Chest Belt	no
Handlebar	ergonomic
Seat	horizontal adjustable
Maximum User Weight	130 kg
Net Weight	38 kg
Gross Weight	42 kg
Set-Up Sizes	142 x 60,5 x 113 cm (LxWxH)
Package Dimensions	137,5 x 30 x 58 cm (LxWxH)
Transportation Wheels	yes
Certifications	CE, ROHS

TAPPETO SCORREVOLE PER HOME FITNESS GENIUS 10200 / TREADMILL FOR HOME FITNESS GENIUS 10200
Codice / Code: JKF10200


Motore	2,5hp DC continuativi / 3,5hp DC di spunto	Motor	2,5 continuous HP/ 3,5 peak HP
Velocità	1-16 km/h incremento 0,1 km/h, 5 velocità preimpostate	Speed	1,0-16 km/h with 0,1 km/h increase, 5 speed quick selection (3/6/9/12/15 km/h)
Inclinazione	elettrica 0 - 10% 12 livelli, 5 step preimpostati	Incline	power incline 12 levels - 10% max incline, 5 incline quick selection (2/4/6/8/10%)
Schermo	1 finestra 112 x 42 mm lcd, retroilluminato blu	Display	1 LCD window 112 x 42 mm, blue backlight
Visualizzazione	tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni	Functions	time, speed, distance, calories, pulse, incline
Programmi	- manuale - 12 preimpostati con variazione della velocità e dell'inclinazione - 1 HRC con variazione automatica, ogni 15" di velocità e inclinazione - body fat - 2 programmi personalizzabili e memorizzabili	Programs	1 manual 12 pre-set HRC 2 user body fat function
Rilevazione pulsazioni	hand grip + rilevazione telemetrica	Heart Rate Monitoring	hand pulse + wireless receiver
Fascia cardio	polar t34 optional	Heart Rate Chest Belt	Polar T34 optional
Pedana	pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico	Running Deck	easy unfolding system
Piano di corsa	45 x 130 cm ammortizzato da 2 air shox + 4 elastomeri	Running Surface/ Cushioning	45 x 130 cm - 4 absorbing cushions - 2 air shox
Diametri rulli	anteriore 46 mm, posteriore 42 mm	Roller Size	46 mm front, 42 mm rear
Nastro	antiscivolo su tela cotone a tramatura doppia, 1,6 mm	Running Belt	antislip, 1,6 mm thickness
Comandi corrimano	inclinazione / velocità, impugnatura antiscivolo	Handrail Buttons	yes
Accessori	2 portaborraccia	Accessories	2 bottle holder
Ruote trasporto	si	Transportation Wheels	yes
Pre-assemblato	si	All-In-One Assembly	yes
Dimensioni aperto	170 x 80 x 140 cm (LxWxH)	Set-Up Sizes	170 x 80 x 140 cm (LxWxH)
Dimensioni chiuso	90 x 80 x 160 cm (LxWxH)	Folded Size	90 x 80 x 160 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	85 x 33 x 178 cm (LxWxH)	Package Dimensions	85 x 33 x 178 cm (LxWxH)
Portata max utente	120 kg	Maximum User Weight	120 kg
Peso netto	65 kg	Net Weight	65 kg
Peso lordo	73 kg	Gross Weight	73 kg
Certificazioni	CE, ROHS, EN957	Certifications	CE, ROHS, EN957

TAPPETO SCORREVOLE PER HOME FITNESS COMPETITIVE 10500 / TREADMILL FOR HOME FITNESS COMPETITIVE 10500

Codice / Code: JKF10500



Motore	3,0hp DC continuativi / 4,5hp DC di spunto
Velocità	1-20 km/h incremento 0,1 km/h, 5 velocità preimpostate
Inclinazione	elettrica 0 - 15% 18 livelli, 5 step preimpostati
Schermo	1 finestra da 128 x 63 mm lcd, retroilluminato blu
Visualizzazione	tempo / distanza / velocità / inclinazione / calorie / pulsazioni / profilo del percorso
Programmi	- manuale - 20 preimpostati con variazione della velocità e dell'inclinazione - 2 HRC - body fat - 3 programmi personalizzabili e memorizzabili
Rilevazione pulsazioni	hand grip + rilevazione telemetrica
Fascia cardio	polar t34 optional
Pedana	pieghevole, apertura servoassistita da pistone idraulico
Piano di corsa	52 x 145 cm ammortizzato da 2 air shox e 4 elastomeri
Diametri rulli	anteriore 56 mm, posteriore 50 mm
Nastro	antiscivolo su tela cotone tramatura doppia, 1,6 mm
Comandi corrimano	inclinazione / velocità, corrimano soft touch
Accessori	mp3 + altoparlanti + slot per sd + usb + 2 portaborraccia
Ruote trasporto	sì
Pre-assemblato	no
Dimensioni aperto	195 x 88 x 155 cm (LxWxH)
Dimensioni chiuso	100 x 88 x 170 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	93 x 38 x 193 cm (LxWxH)
Portata max utente	135 kg
Peso netto	93 kg
Peso lordo	101 kg
Certificazioni	CE, ROHS, EN957

Motor	3,0 continuous HP / 4,5 peak HP
Speed	1.0-20 km/h with 0,1 km/h increase, 5 speed quick selection (4/8/12/14/16 km/h)
Incline	power incline 18 livelli - 15% max incline, 5 incline quick selection (1/5/10/12/15%)
Display	1 LCD window 128x63 mm with blue backlight
Functions	time, speed, distance, calories, pulse, incline, program profile
Programs	1 manual - 20 pre-set - 2 HRC - 3 user - body fat function
Heart Rate Monitoring	hand pulse + wireless receiver
Heart Rate Chest Belt	Polar T34 optional
Running Deck	easy unfolding system
Running Surface/ Cushioning	52x145 cm - 4 absorbing cushions - 2 air shox
Roller Size	56 mm front, 50 mm rear
Running Belt	antislip, 1,6 mm thickness
Handrail Buttons	yes
Accessories	mp3 + SD + usb + 2 bottle holder + speaker
Transportation Wheels	yes
All-In-One Assembly	no
Set-Up Sizes	195 x 88 x 155 cm (LxWxH)
Folded Size	100 x 88 x 170 cm (LxWxH)
Package Dimensions	93 x 38 x 193 cm (LxWxH)
Maximum User Weight	135 kg
Net Weight	93 kg
Gross Weight	101 kg
Certifications	CE, ROHS, EN957

STEPPER RICHIUDIBILE PER HOME FITNESS / FOLD-AWAY STEPPER FOR HOME FITNESS
Codice / Code: JKF5030

 Stepper aperto
 Open stepper

 Stepper chiuso
 Folded stepper

Regolazione sforzo	pistoncini idraulici indipendenti 12 livelli intensità
Richiudibile	Sì
Display	1 finestra lcd
Visualizzazione	tempo, passi, passi/minuto, calorie
Manubrio	ergonomico, multiforme
Dimensioni aperto	75 x 43 x 131 cm (LxWxH)
Dimensioni chiuso	100 x 39 x 20 cm (LxWxH)
Dimensioni imballo	101 x 45,5 x 20 cm (LxWxH)
Portata max utente	100 kg
Peso netto	19 kg
Peso lordo	20 kg

Resistance	independent hydraulic pistons - 12 levels
Foldable	Si
Display	1 LCD window
Functions	time, step, step/minute, calorie
Handlebar	ergonomic
Set-Up Sizes	75 x 43 x 131 cm (LxWxH)
Folded Size	100 x 39 x 20 cm (LxWxH)
Package Dimensions	101 x 45,5 x 20 cm (LxWxH)
Maximum User Weight	100 kg
Net Weight	19 kg
Gross Weight	20 kg

VOGATORE MAGNETICO RICHIUDIBILE PER HOME FITNESS / FOLD-AWAY MAGNETIC ROWING MACHINE FOR HOME FITNESS
Codice / Code: JKF5075


Regolazione freno	magnetico - 8 livelli
Richiudibile	Sì
Display	1 finestra a cristalli liquidi
Visualizzazione	tempo, vogate, distanza, calorie, pulse
Rilevazione pulsazioni	Fascia Polar optional
Dimensioni aperto	205x51x64 cm (lxwxh)
Dimensioni chiuso	90x51x122 cm (lxwxh)
Dimensioni imballo	112x27x75 cm (lxwxh)
Portata max utente	120 kg
Peso netto	34 kg
Peso lordo	41 kg

Foldable	Si
Display	LCD Display
Functions	time, stroke, distance, calories, pulse
Heart Rate Monitoring	Polar optional
Set-Up Sizes	205x51x64 cm (lxwxh)
Folded Size	90x51x122 cm (lxwxh)
Package Dimensions	112x27x75 cm (lxwxh)
Maximum User Weight	120 kg
Net Weight	34 kg
Gross Weight	41 kg

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ordinazioni

Gli ordini devono pervenire a mezzo fax allo 0438/478762 oppure a mezzo e-mail info@fisiotech.com, e il codice articolo e l'eventuale colore deve sempre essere specificato.

Prezzi

Salvo diversi accordi, i prezzi sono per merce franco fabbrica; IVA, altre tasse ed oneri a carico dell'acquirente; i prezzi possono subire variazioni in funzione della dinamica dei costi delle materie prime e del costo del lavoro.

Spedizioni

Vengono eseguite col mezzo dalla venditrice giudicato più idoneo o, in subordine, col mezzo indicato dal committente; la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se pattuita franco destino.

Reclami

Il cliente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a comunicare entro 8 giorni eventuali vizi riscontrati. Nel caso in cui la confezione risulti ammaccata, bagnata o presenti qualunque altra anomalia (esempio: pacco chiuso con nastro del corriere, cellophan danneggiato) va indicato sul DDT che rimane al corriere, sul palmare

indicando: **RISERVA DI CONTROLLO CON MOTIVAZIONE** (pallet sconnesso, pacco bucato o ammaccato, pacco bagnato, collo con presenza del nastro imballo del corriere). Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce. I resi dovranno essere concordati preventivamente con FISIOTECH SRL ed in ogni caso dovranno pervenirci in porto franco.

Recesso

Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale. Sono perciò esclusi dal diritto di recesso, gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende e da persone fisiche che agiscono per scopi legati ad una attività professionale. Il solo "consumatore" ha diritto di recedere dal contratto entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della merce, restituendo il bene oggetto del recesso al venditore, il quale gli rimborserà il prezzo della merce restituita.

Pagamenti

Da concordare. Ritardi sulle scadenze pattuite comporteranno l'addebito degli interessi di mora e la modifica delle condizioni di pagamento in uso.

Garanzia

La durata della garanzia è di 24 mesi dalla data di

consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso di qualsiasi attrezzatura, i danni causati dal trasporto (vedi reclami). Qualora il sigillo di garanzia risulti danneggiato o alterato, la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta e all'autorizzazione, ci dovrà pervenire copia della fattura e del DDT di vendita.

Controversie

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Treviso.

Consegne

I termini di consegna da noi indicati sono approssimativi, eventuali ritardi non danno diritto a reclami o rimborsi di alcun genere.

N.B.: La venditrice si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e l'aspetto dei propri prodotti senza preavviso alcuno. Tali modifiche avranno sempre come obiettivo fondamentale il miglioramento del rapporto qualità/prezzo.

TERMS OF SALES

Orders

Orders must be sent by fax at 0039 0438 478762 or by e-mail at info@fisiotech.it. No. Code and finishing of the article must be always specified.

Prices

Different terms excepted, prices are for goods ex factory; VAT and other tax charges not included; prices could change due to the rise of raw materials and labor costs.

Delivery

The chosen means of transport is the one the seller considers as the most suitable one, or in subordinate position, the one chosen according to the customer's advise: goods always travel at the buyer's risk, even there was an arrangement free delivery.

Complaints

Check carefully the packaging upon receipt of the material and in case of fault, please inform FISIOTECH SRL by mail at info@fisiotech.com or by fax 0039 0438 478762 within 8 days. If damaged packaging, wet cardboard or any others faults (i.e. packaging closed with tape of the transport company, cellophan broken...) has to be noted on the delivery note of the courier or in the palmar: **SUBJECT TO INSPECTION WITH EXPLANATION** (bumpy pallet – dented packaging, wet packaging or tape of the transport company). Complaints are not accepted

over the first 8 days. Goods' return have to be previously arranged with FISIOTECH and, in any case, they have to reach us without transport freights..

Right of withdrawal

The right of withdrawal applies to the physical individuals (consumers) who are acting for purposes unrelated to their commercial activity. The Right of withdrawal therefore is not applicable in the case of purchases made by resellers or companies. The consumer has the right to exercise his Right of withdrawal within 10 days of delivery of the article, that consists in the faculty of restitution of the good acquired to the vendor, and in the consequent relative reimbursement at the price of purchase.

Payments

To agree. Delays on arranged expiry date will involve the charge of interests.

Warranty

Our products are guaranteed only to the factory defects for 24 months from delivery date. The warranty does not apply to: consumable and normal wear materials failures caused by knocks and/or falls, wrong or incorrect use, use by untrained personnel. In case the warranty seal is damaged or altered the warranty automatically becomes null and void. Repairs under warranty are intended

as carried out at the manufacturer's office and upon authorization. The parts to repair under warranty must be sent to the manufacturer carriage free and with original packaging. For repairs you must send a written request with a copy of the invoice and of the transport document.

Contests

The place of jurisdiction for any contest is the law court of Treviso.

Deliveries

Dates of delivery indicated by us are approximate, any delay doesn't give right to complaints or to any refund.

N.B.: The seller reserves the right to change features and appearances of the products without any notice. Such modifications will always have as primary purpose to improve the relationship quality/price.



Fisiotech

tecnologie e benessere

Fisiotech srl
via Valdoni, 19
31013 Cimavilla di Codognè (TV) Italy
Tel. +39 0438.470342
Fax +39 0438.478762

www.fisiotech.com
info@fisiotech.com